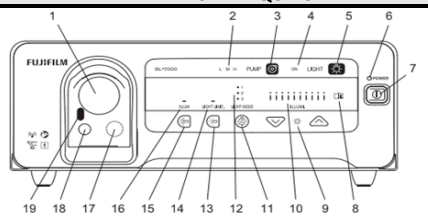
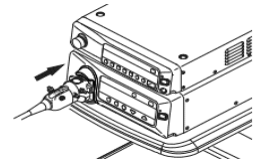


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>27</td> <td>MES</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AÑO</td> <td>2023</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	27	MES	12	AÑO		
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	27	MES	12														
AÑO			2023														
Nombre del equipo:	FUENTE DE LUZ	Modelo:	BL-7000		Riesgo del equipo:	IIA											
Marca:	FUJIFILM				Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO											
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO			PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO												
					1. Realice inspecciones de seguridad antes del uso 2. Conecte el endoscopio como se muestra en la siguiente figura 												
Dispositivo medico para diagnostico, diseñado con una fuente de 4 luces LED de alta intensidad. Es utilizado en cirugía para procedimientos con equipos de endoscopia.		Panel frontal 1. Toma del conector del endoscopio 2. Indicador del suministro de aire 3. Tecla para elegir alguno de los 4 niveles del suministro de aire 4. Indicador de encendido de luz 5. Tecla para encender o apagar la luz 6. Luz indicadora de encendido de equipo 7. Tecla para encender o apagar el equipo 8. Indicador de estado de la fuente de luz 9. Tecla para ajustar el brillo 10. Indicador de intensidad de la luz 11. Tecla del modo de luz 12. Indicador del modo de luz 13. Tecla para limitacion de luz 14. Indicador de limitacion de luz 15. Tecla XLUM 16. Indicador de XLUM			3. Enganche el tanque de agua lleno con agua estéril en la fuente de luz. 4. Conecte el conector del tanque de agua al endoscopio. 5. Retire la tapa protectora de toma del procesador que se conectará al endoscopio. 6. Encienda el carro y la fuente de luz. La luz indicadora de encendido se ilumina. 7. Pulse el botón bomba para corroborar si la bomba de suministro de aire alterna entre "HI," 8. Encienda el procesador. 9. Pulse el botón de luz de la fuente de luz. 10. Coloque la palma frente al extremo distal del endoscopio y asegúrese de que el nivel del indicador de la fuente de luz cambia. 11. Ajuste el brillo y el suministro de aire en caso de ser necesario. 12. Inicie la exploración deseada. 13. Recuerde de hacer el pre-lavado de los equipos, antes de reprocesar.												
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					ALARMAS Y POSIBLES ERRORES												
1. Voltaje: 100 - 240 V~ 2. Frecuencia: 50 - 60 hz 3. Potencia: 300 W 4. Consumo: 1.2 - 0.7 A 5. Dimensiones: 390x155x485 mm 6. Peso: 12kg 7. Temperatura: +10 a +40 °C 8. Humedad: 30 a 85 % HR (sin condensación) 9. Presion: 70 a 106 kPa 10. Intensidad luminica: 1400 lm					1) El endoscopio no está conectado. 2) El sensor de detección defectuoso. 3) El LED está defectuoso.												
LIMPIEZA Y DESINFECCION					1) Asegure el endoscopio 2) Consulte con su distribuidor local 3) Consulte con su distribuidor local												
La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		17. Seccion de la fuente de alimentacion 18. Ventana de recepcion 19. Ventana de comunicación (LED) RECOMENDACIONES GENERALES 1. Cuando conecte el endoscopio, insértelo por completo 2. No desinfecte ni esterilice la fuente de luz.			La luz no se enciende aunque se pulse el botón de luz.												
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	