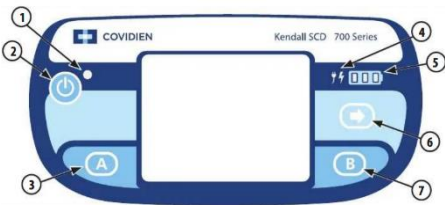


 		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: COMPRESOR VASCULAR		CÓDIGO: NA	
MARCA: COVIDIEN		VERSIÓN: 1	
MODELO: KENDALL SCD		FECHA DE ELABORACIÓN: 8/04/2023	

USO DEL EQUIPO   Dispositivo médico encargado de realizar compresiones neumáticas intermitentes para aumentar el retorno venoso y el embolismo pulmonar.		PARTES DEL EQUIPO  1. Indicador de encendido del equipo 2. Botón de encendido del equipo o espera 3. Botón para control A 4. Indicador de alimentación AC 5. Indicador del estado de batería 6. Botón de flecha derecha 7. Botón para control B		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table><tr><td> Alarma de alta presión  </td><td>Compruebe si hay tubos acodados o interferencias del paciente con las fundas</td></tr><tr><td> Alarma de alta presión en las fundas del pie o las piernas </td><td>Compruebe si la funda está demasiado apretado y ajústelo como corresponda.</td></tr><tr><td> Alarma de baja presión en las fundas del pie o las piernas.  </td><td>Compruebe si la funda está demasiado suelto y ajústelo como corresponda, compruebe si las mangueras tienen fuga.</td></tr></table>		Alarma de alta presión 	Compruebe si hay tubos acodados o interferencias del paciente con las fundas	Alarma de alta presión en las fundas del pie o las piernas	Compruebe si la funda está demasiado apretado y ajústelo como corresponda.	Alarma de baja presión en las fundas del pie o las piernas. 	Compruebe si la funda está demasiado suelto y ajústelo como corresponda, compruebe si las mangueras tienen fuga.
Alarma de alta presión 	Compruebe si hay tubos acodados o interferencias del paciente con las fundas										
Alarma de alta presión en las fundas del pie o las piernas	Compruebe si la funda está demasiado apretado y ajústelo como corresponda.										
Alarma de baja presión en las fundas del pie o las piernas. 	Compruebe si la funda está demasiado suelto y ajústelo como corresponda, compruebe si las mangueras tienen fuga.										
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  - Compresión secuencial de tobillo-pantorrilla-muslo - Compresión en gradiente 45-40-30 mm Hg - Batería recargable cada 8 horas - Presiones de pie en 130 mm Hg - Presiones de tobillo en 45 mm Hg - Presiones de pantorrilla en 40 mm Hg - Presiones de muslo en 30 mm Hg		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO  1. Coloque el controlador en el piecero de la cama, para mayor comodidad en la terapia. 2. Seleccione la funda y la media del paciente según su necesidad. 3. Conecte el juego de mangueras en la parte posterior del equipo, y en las fundas del paciente respectivamente en su lado A y B. 4. Conecte el equipo a la red eléctrica y enciéndalo, ajuste el tiempo de tratamiento. 5. En la pantalla aparecerá la configuración respectiva, de los puertos A y B para elegir las compresiones deseadas de manera intermitente.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.							
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación I bajo riesgo.											