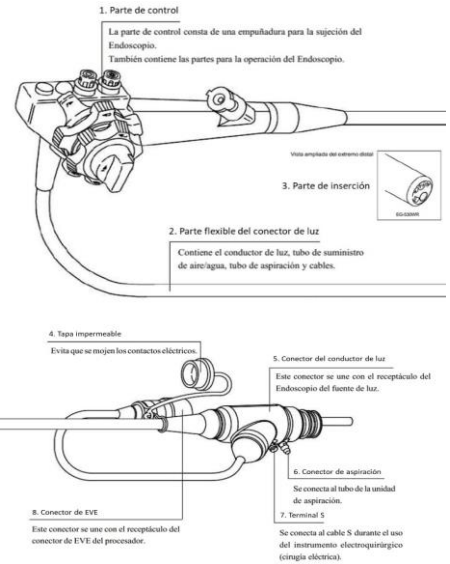
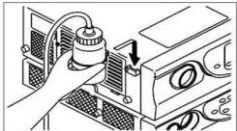
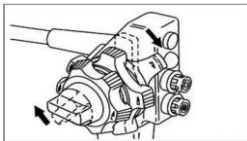
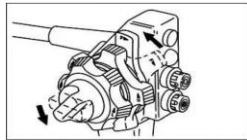
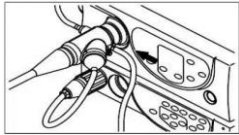


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>15</td> <td>MES</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2023</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	15	MES	03	AÑO	2023	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	15	MES	03														
AÑO	2023																
Nombre del equipo:	VIDEOGASTROSCOPIO	Modelo:	EG-530WR		Riesgo del equipo:	IIA											
Marca:	FUJIFILM			Clasificación del equipo:	DIAGNÓSTICO												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO			PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO												
					- Preparar los accesorios y el fórceps, etc. a utilizarse - Adoptar el tratamiento previo apropiado para el objeto del examen - Colocar la boquilla en la boca del paciente - Desbloquear la palanca de bloqueo arriba/abajo y perilla de bloqueo izq./der. hasta que hagan tope - Conectar la energía del procesador y encender la lámpara - Aplicar lubricante limpio en la parte de la inserción si fuera necesario - Inserte el extremo distal del Endoscopio desde la cavidad oral hacia la faringe observando el proceso - Controlar el brillo con el botón de nivel de fuente de luz - Cerrar el orificio central del botón de aire/agua con el dedo para suministrar el aire en el tracto digestivo - Dirigir el extremo distal del endoscopio hacia la región deseada girando las perillas de control - En caso de ser necesario aspirar la mucosa, colocarse el extremo distal del endoscopio sobre el lago mucoso y pulsar el botón de aspiración - Dirigir el extremo distal del endoscopio hacia el lugar de la biopsia - Verificar la apertura y cierre del fórceps - Acercar lentamente el fórceps hasta las proximidades del lugar de la biopsia - Tomar el espécimen manipulando las perillas de control de ángulo permitiendo que entre y salga el fórceps - Extraer lentamente y tomar el espécimen de la biopsia - Una vez concluido el examen, aspirar el excedente de aire de la cavidad del cuerpo - Enderezar la parte curva hasta que quede casi recto operando las perillas de control ángulo - Extraer lentamente el endoscopio												
Endoscopio medicinal para el tracto digestivo superior. Se utiliza para la observación, diagnóstico y tratamiento endoscópico del esófago, estómago y bulbo duodenal.																	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																	
1. Tamaño de imagen: Superimagen																	
2. Campo de visión: 140°																	
3. Diámetro del extremo distal: 9,4 mm																	
4. Diámetro de la parte flexible: 9,3 mm																	
5. Diámetro del conducto de fórceps: 2,8 mm																	
6. Longitud de trabajo: 1100 mm																	
7. Longitud total: 1400 mm																	
8. Gama de observación: 4 a 100 mm																	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																	
1. Utiliza detergente enzimático o solución para limpiar todas las superficies del endoscopio		1. Parte control.			15. Tomar el espécimen manipulando las perillas de control de ángulo permitiendo que entre y salga el fórceps												
2. Enjuague completamente con agua estéril		2. Parte flexible del conector de luz.			16. Extraer lentamente y tomar el espécimen de la biopsia												
3. Sumerge el endoscopio en una solución desinfectante		3. Parte de inserción.			17. Una vez concluido el examen, aspirar el excedente de aire de la cavidad del cuerpo												
4. Enjuaga el endoscopio con agua estéril o desionizada para eliminar cualquier residuo del desinfectante		4. Tapa impermeable.			18. Enderezar la parte curva hasta que quede casi recto operando las perillas de control ángulo												
5. Utiliza aire comprimido para eliminar la humedad		5. Conector de conductor de luz.			10. Extraer lentamente el endoscopio												
6. Almacena en un área limpia y seca		6. Conector de aspiración.															
		7. Conector EVE.															
		8. Terminal S.															
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:	FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE 01
FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO	
				15	03	2023	

Nombre del equipo:	VIDEOGASTROSCOPIO	Modelo:	EG-530WR	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	FUJIFILM			Clasificación del equipo:	DIAGNÓSTICO

PASOS A SEGUIR ANTES DE USAR EL ENDOSCOPIO	PASOS A SEGUIR ANTES DE USAR EL ENDOSCOPIO	PASOS A SEGUIR ANTES DE USAR EL ENDOSCOPIO
1. Mover el carro con el procesador hasta el lugar donde se utilice el endoscopio.	9. Ajustar la presión de aspiración entre 40-53 kPa.	18. Inspeccionar el buen estado y correcto funcionamiento del fórceps.
2. Después de fijar el interruptor principal en posición OFF, encuchar el cable de energía del carro al receptáculo con protección a tierra.	10. Verificar visualmente las anomalías de la parte de inserción como roturas, melladuras, bordes filosos o protuberancias que puedan lastimar al paciente.	17. Inspeccionar el buen estado y correcto funcionamiento del lente objetivo.
3. Instalar la botella de aspiración en la unidad de aspiración.	11. Tome la parte flexible con las dos manos, hágala avanzar en sentido indicado por la flecha manteniendo un semicírculo de 200 mm confirme que se ha doblado suficientemente sin haber alguna parte difícil de doblar.	ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO 1. Fórceps para biopsia: Frenestrada BF2416SF Frenestrada con la aguja BF2416FN Mandíbula larga BF2416NL Tipo cocodrilo BF2216A 2. Fórceps asidores: Tres dientes K2418M Tipo B GF2416V Pico de pato K2418F 3. Fórceps de cesta: Normal K2418B / K2418BW 4. Tijeras 5. uchillo diatérmico 6. Lazo diatérmico: Medialuna E2224M Hexagonal E2224H 7. Electrodo de coagulación diatérmico: Tipo bola G2418R Tipo aspiración G2418S Tipo pinza K2418S 8. Fórceps de biopsia en caliente K2418A 9. Cepillo citodiagnóstico normal CB3518S 10. Cepillo de limpieza WB3218FW2 11. Cepillo de limpieza para válvula WB11001FW2 12. Tubo de lavado WT1720ST 13. Válvula de fórceps FOV-DV7 14. Boquilla MPC-ST
4. Instalar el tanque con agua llenado hasta el 80% sobre el procesador.	12. Desbloquear la palanca de bloqueo arriba/abajo y perilla de bloqueo izq./der.girando en dirección F >	
		
5. Insertar el conector del endoscopio en el receptáculo del endoscopio de la unidad de fuente de luz.	13. Girar la perilla de control de ángulo arriba/abajo y perilla de control de ángulo izq./der. En dirección U, D, L y R hasta que haga tope.	
6. Insertar el conector del EVE del endoscopio en el receptáculo del conector del EVE del procesador.	14. Girar la palanca de bloqueo arriba/abajo y perilla de bloqueo iz./der. En dirección opuesta a F > y luego bloquearlas.	
7. Enchufar el conector del tanque de agua en la conexión de suministro de agua del endoscopio.		
8. Conectar la unidad de aspiración y el conector de aspiración del endoscopio al tubo de aspiración.	15. Girar las perillas de control de ángulo de manera similar al paso (12) y verificar cómo se dobló la parte curva.	
	16. Inspeccionar el correcto funcionamiento de suministro de aire/agua, aspiración y canal de conducto del fórceps.	

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.