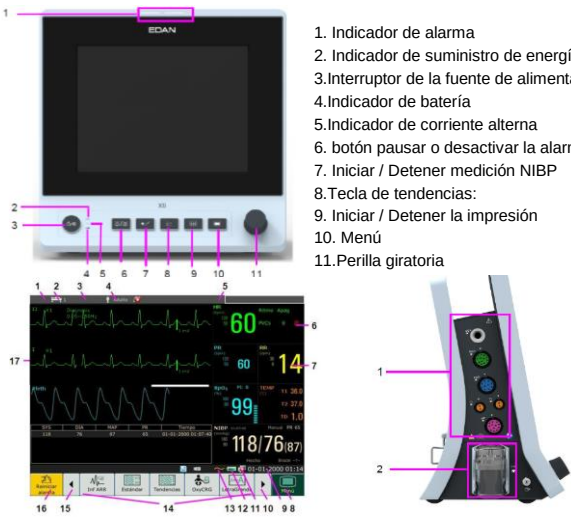


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012	
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 15 MES 03 AÑO 2023
Nombre del equipo: Monitor de Signos Vitales	Modelo: X8	Riesgo del equipo: IIB		
Marca: EDAN			Clasificación del equipo: Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO Es un equipo avanzado diseñado para el monitoreo de pacientes en diferentes entornos clínicos. Ofrece funciones como la medición de ECG, SpO2, NIBP y otros parámetros vitales, todo en una pantalla táctil de alta resolución. Su diseño ergonómico incluye modos de funcionamiento como el nocturno. Este monitor asegura un control preciso y confiable con opciones personalizables para diferentes tipos de pacientes.	PARTES DEL EQUIPO 		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Antes de limpiar el monitor, asegúrese de que esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación. 1. Apague el monitor y desconéctelo de la fuente de alimentación. 2. Limpie en profundidad toda la superficie exterior del equipo y sus accesorios, incluida la pantalla, con un paño suave humedecido con la solución de limpieza(recomendadas en manual), hasta que no queden restos de agentes contaminantes visibles. 3. Después de la limpieza, quite la solución de limpieza con un paño limpio o una toalla humedecida con agua de la llave, hasta que no queden residuos del agente de limpieza. 4. Seque el monitor en un lugar fresco y ventilado. En el caso de los dispositivos o accesorios que han tenido contacto con superficies mucosas, se debe realizar una desinfección de alto nivel.	
MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Modo Demo: Es solo para fines de demostración, toda la información de tendencias almacenada se elimina de la memoria del monitor. Modo de Espera: El monitor interrumpe la supervisión de los pacientes y almacena los datos de monitoreo. El monitor sale del modo de espera en cualquiera de las siguientes condiciones: El usuario hace clic en cualquier lugar de la pantalla o presiona cualquier tecla (excepto la tecla de encendido/apagado). anteriores. Modo Nocturno: En modo nocturno, el sonido de las teclas, el latido cardíaco y el pulso se silenciarán; el volumen de la alarma y el brillo de la pantalla se ajustarán al nivel mínimo; los ajustes de volumen de teclas, volumen de latido, volumen de PR, volumen de alarma y brillo de la pantalla no están disponibles. Modo de privacidad: La pantalla muestra el mensaje: Modo de privacidad y el paciente está siendo monitoreado sin alarma de audio ni lucas indicadoras de alarma. Haga clic en la pantalla o en la tecla fija para salir Modo NFC: El modo NFC está diseñado para circunstancias en las que los usuarios necesitan observar constantemente las alarmas fisiológicas de HR. En el modo NFC, la alarma fisiológica de HR se activa automáticamente o se mantiene persistentemente activada; el usuario no puede desactivarlo.	1. Departamento 2. Número de cama 3. Nombre paciente 4. Tipo paciente 5. Área de alarma 6. Alarma desactivada 7. Valor de medición 8. Menú 9. Fecha y Hora 10. Desplácese hacia la derecha para visualizar más 11. Símbolo de conexión a redes 12. Símbolo de estado de la batería 13. Símbolo de fuente de alimentación CA 14. Área de teclas rápidas 15. Desplácese hacia izquierda para visualizar más 16. Reiniciar la alarma 17. Onda de parámetro		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES El monitor proporciona dos tipos de alarmas: alarmas fisiológicas y alarmas técnicas. Además, también ofrece indicadores. El sistema indica niveles de alarma altos/medios/bajos en las siguientes formas: <u>Alto:</u> se activa una vez cada 10 segundos. El indicador de alarma parpadea en color rojo, con una frecuencia de 1,4 Hz~2,8 Hz. <u>Medios:</u> Se activa una vez cada 25 segundos. El indicador de alarma parpadea en color amarillo, con una frecuencia de 0,4~0,8 Hz. <u>Bajos:</u> se activa una vez cada 30 segundos. Cuando la alarma fisiológica se activa, el indicador de la alarma se mantiene constante en amarillo. Durante la alarma técnica, el indicador de la alarma se mantiene constante en azul	
		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Revisar que el equipo tiene los accesorios requeridos para el monitoreo del paciente. 2. Oprimir el interruptor de encendido 3. Seleccionar Modo de operación 3. Conectar los accesorios al paciente (NIBP, SPO2, T1, ECG) 4. Revisar los ajustes de las alarmas de los parámetros fisiológicos o parámetros de monitorización que se requiera por cada paciente		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:				
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.				
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica				
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo				
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.				
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.				
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas				
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.				