




PARTES DE VIDEOLARINGOSCOPIO

1. TECLA DE ENCENDIDO ON/OFF
2. TECLA MENU/ PLAY/ PAUSE/ENTER
3. TECLA ▲ IMAGEN O VIDEO ANTERIOR/ INCREMENTAR VALOR
4. TECLA ▼ IMAGEN O VIDEO SIGUIENTE / DISMINUYE VALOR
5. TECLA SNAP: PRESION CORTA CAMARA/PRESION LARGA VIDEO/RETORNO
6. CAMARA PARA FILMAR

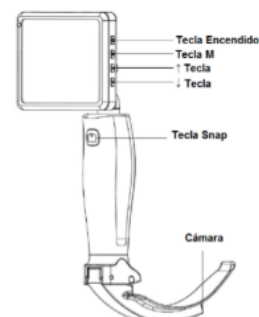

LIMPIEZA DE PANTALLA

1. Se realiza con toallas antimicrobianas.
2. No usar agua
3. No exponer a cantidades altas de fluidos

LAVADO DE VALVAS Y ESTERILIZACION

- Lavado o inmersión en solución antimicrobiana
- Esterilización a baja temperatura con plasma de gas de peróxido de hidrógeno

USO DEL EQUIPO:

1. Ensamble la hoja de laringo elegida de acuerdo al paciente.
2. Oprima on/off por 3.5 segundos.
3. Mostrará HugelMed unos segundos.
4. Si aparece la valva de video no esta conectada, verifique la conexión.