

GUIA MANEJO RAPIDO EQUIPO : BALANZA T-RAC

Los siguientes pasos los debe realizar el operador al momento de hacer uso de la Balanza T-RAC.



1. Verificar que todas las conexiones este bien: Conexión del transformador de voltaje a la pared y la conexión del transformador de voltaje a la Balanza
2. Encendido: Encender el transformador de voltaje. (Interruptor en la parte trasera) y encender la Balanza. (Interruptor de encendido en la parte trasera)
3. Pasos al momento de Iniciar a trabajar con la Balanza: Al encender la balanza, se escucha un BEEP que corresponde a la alarma auditiva y los indicadores luminosos que se encuentran en los extremos están parpadeando. La pantalla muestra el siguiente mensaje: en la cual el operador debe oprimir VALID

→ T – RAC Reset : Press VALID

Una vez presionamos VALID, aparece el siguiente mensaje en pantalla:

T - RAC TERUMO	Machine Centre	no 001 no 0001	Ver 2,3 FR P = 0000,0
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------

→ T – RAC in standby, Press VALID

El operador debe oprimir VALID para que la balanza realice el auto-chequeo antes de iniciar la flebotomía. Al terminar el auto-chequeo aparece el siguiente mensaje en la pantalla:


Volume choice and press VALID

Choise 475 mL	Date Time Battery M. Available	26/07/05 09:36:58 13,9 v 0000/50
----------------------	---	---

Si el operador necesita hacer algún cambio en el volumen de sangre a coleccionar, lo debe realizar en este momento. Para cambiar el volumen de colecta se oprimen las teclas: + -, que se encuentran sobre el teclado de la Balanza. Una vez seleccionado el volumen a coleccionar, colocar la bolsa sobre la bandeja y la tubuladura dentro del clamp. Presionar VALID. La balanza hace una tara de la bolsa y el clamp se cierra y aparece la pantalla siguiente:

> 0	25	50	75	100	S T A R
Choise mL 475	Donat mL 000	Flow ML/mn 000	Duration Mn:sec 000		

El operador realiza la venopuncion y oprime STAR para iniciar la colecta. Cuando ya se alcanzo el volumen de sangre programado, la balanza cierra el clamp para evitar que siga entrando sangre del donante a la bolsa y se activan las alarmas: Auditiva y Visual. En la pantalla aparece lo siguiente:

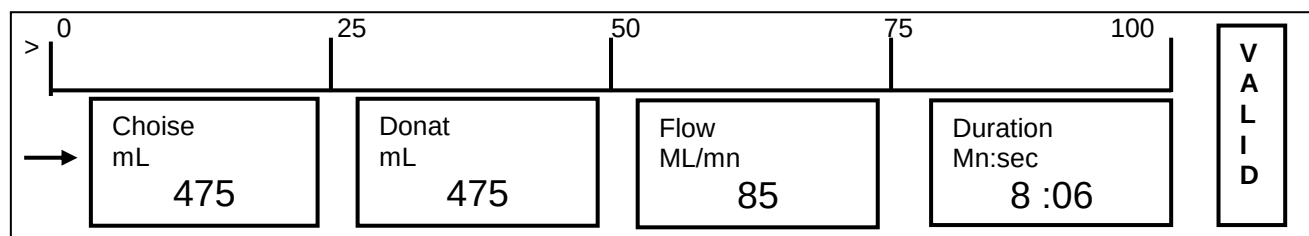

El operador presiona VALID y le en pantalla se observa el siguiente mensaje:

→ VALID Key for clamp release

Cuando aparece esta pantalla el plato de la balanza aun sigue mezclando al sangre con el Anticoagulante. El operador debe realizar el nudo a la bolsa para cerrar cualquier paso de sangre adicional o aire. En este momento puede tomar las muestras de sangre para el laboratorio utilizando el segmento piloto que permite utilizar los tubos al vacío.

Cuando ya ha realizado estas acciones presiona VALID. La balanza hace una última mezcla y el clamp se abre para liberar la tubuladura y retirar la bolsa de la balanza. Y aparece la pantalla con resumen del procedimiento:

End = Press VALID

Choise mL 475	Donat mL 475	Flow ML/mn 85	Duration Mn:sec 8 :06
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------

Esto nos indica:

Choise mL 475	Volumen que se selecciono para la flebotomía.
Donat mL 475	Volumen colectado durante la flebotomía.
Flow ML/mn 85	Flujo promedio en mL/min de la vena durante la flebotomía.
Duration Mn:sec 8 :06	Tiempo que duro la donación.

Presionamos VALID y la balanza queda lista para el siguiente procedimiento.