

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: PULSIOXIMETRO	CÓDIGO: NA
	MARCA: EDAN	VERSIÓN: 1
	MODELO: H100B-H100	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo biomédico utilizado en la pulsioximetría. Está técnica permite medir de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre roja de un paciente, sin necesidad de tomar una muestra de sangre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tener en cuenta que el pulsioxímetro viene con 4 baterías recargables con duración de 48 Horas
- Cargar las baterías directamente a la red eléctrica
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Modificar en caso de ser necesario tipo de paciente: Adulto-Neonato-Pediátrico

PARTES DEL EQUIPO

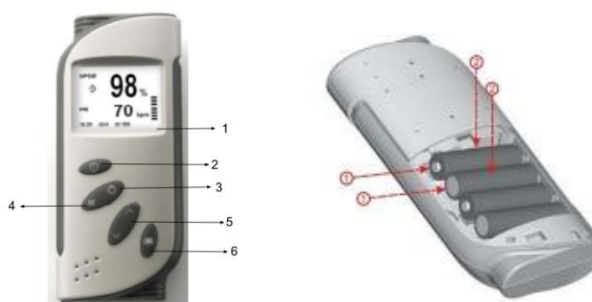

Partes del equipo delanteras:

1. Pantalla LCD
2. Botón de ON/OFF
3. Botón para modificar el brillo de la pantalla
4. Botón para silenciar o activar alarmas
5. Botón para seleccionar diferentes ítems de la pantalla, ya sea para bajar o subir de selección
6. Botón de Menú

Partes del equipo traseras:

1. El equipo en la parte trasera se compone de 4 pilas o una batería completa recargable para el funcionamiento del mismo.


CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación IIB de Alto riesgo

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que el equipo este cargado
2. Accione el botón de ON/OFF
3. Conecte el accesorio de SP02 del equipo
4. Modifique el tipo de paciente en caso de ser necesario
5. Inicie la monitorización

INTRODUCCIÓN AL PANEL DE LA PANTALLA

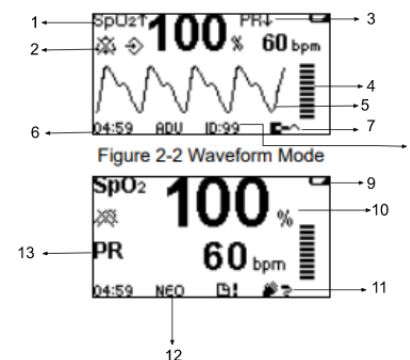

1. Referenciación del valor de Sp02
2. Icono de alarma ON/OFF
3. Icono del valor promedio que puede ser alto o bajo
4. Amplitud del pulso
5. Gráfica de onda de Sp02
6. Información de hora, para parametrizar los datos
7. Icono de la conexión del sensor de Sp02 esta ON

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: PULSIOXIMETRO	CÓDIGO: NA
	MARCA: EDAN	VERSIÓN: 1
	MODELO: H100B-H100	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2022

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.



ADVERTENCIAS DEL USO DEL EQUIPO



1. Si el pulsioxímetro presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento.
2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan.
3. Use solo los sensores permitidos por EDAN, cualquier otro tipo de accesorios puede provocar una monitorización errónea.
4. Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el equipo este apagado y debidamente desconectado.

MEMORIA DEL PULSIOXIMETRO



This ID's data will be covered. Continue ?

YES

NO

El pulsioxímetro puede soportar hasta 100 IDS de pacientes, cuando esta se cumple se activará un piloto que indica la memoria llena del equipo, esta se puede liberar eliminándose o realizando una transferencia de datos de un computador al equipo.

8. Información de la cantidad de pacientes que se han monitorizado.
9. Icono del estado de la batería
10. Icono de porcentaje de la medición de SpO2
11. Icono de la conexión del sensor de SpO2 esta OFF
12. Información del tipo de paciente que se va a monitorizar
13. Icono de frecuencia del pulso monitorizado

NIVELES DE ALARMA



ALARMA FISIOLÓGICA ALTA	Indica si la vida del paciente se encuentra en una situación de emergencia o gravedad.	Realiza flashes rápidos y sonidos de beep triples de alarma.
ALARMA FISIOLÓGICA MEDIA	Indica si los signos vitales del paciente se encuentran en valores anormales	Realiza flashes lentos y sonidos de beep de manera triple.
ALARMA TÉCNICA	Indica si el accesorio de SpO2 esta desconectado o si la batería del equipo es baja.	No emite sonidos de alarma, activa un indicador en la pantalla de la falla técnica.