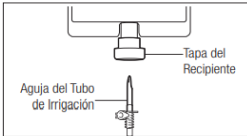
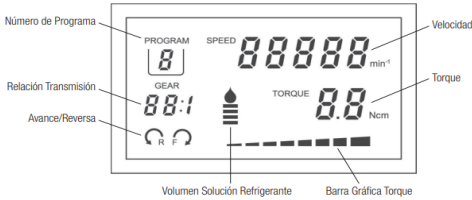


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				15	03	2023

Nombre del equipo:	Motor quirurgico	Modelo:	SURGIC AP	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	NSK			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO Y

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	PASOS INICIALES DE CONEXIÓN DEL EQUIPO
 Equipos biomédicos utilizados específicamente para cirugías orales y colocación de implantes. Este motor proporciona potencia y buen rendimiento para diferentes tipos de procedimientos teniendo rangos de 210W de potencia y 50 Ncm de torque.		1. Conexión del cable de micromotor: Asegúrese que la marca "triangular" quede hacia arriba y luego conéctelo a la entrada de la consola Pº4 .
		2. Instalación de la pieza de mano: Inserte la pieza de mano hasta que llegue al tope, luego gírela hasta oír un click.
		3. Instalación de pedal de control: Coloque el tornillo del conector del cable en la parte posterior del equipo Pº5 y conéctelo sin girar.
		4. Conexión de la bomba y tubo de irrigación: Alinee el orificio de la bomba de irrigación con el eje de transmisión de la unidad de control.
		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PARTES DE PANTALLA LCD
1. Fuente de alimentación: 120V 2. Frecuencia: 50-60 Hz 3. Salida máxima de potencia: 210 W 4. Torque máximo: 50 Ncm 5. Modos de operación: 8 Modos 6. Dimensiones: 207X275X101 mm 7. Velocidad del motor: 200-40.000 min-1	1. Teclas para elegir el modo de programa 2. Teclas para elegir la velocidad deseada 3. Teclas para elegir el torque deseado 4. Toma de conexión para accesorio del microtomor 5. Tecla para guardar memoria de programas 6. Tecla para avance y reversa según la pieza si se necesita que gire hacia atrás "R" o hacia adelante "F" 7. Tecla para elegir la irrigación deseada 8. Tecla para seleccionar el tipo de pieza a utilizar "PUNTA RECTA: 1:1" 9. Teclada para modo ingeniería de soporte.	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		RECOMENDACIONES GENERALES
La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	1. Soporte para solución 2. Caja de fusible 3. Interruptor de ON/OFF	1. No dejar caer o golpear la consola. 2. Conecte la consola siempre a tomas regulados. 3. Evite exceder el tiempo recomendable de uso continuo el cual no puede ser mayor a 15 minutos sin parar.
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA	4. Conector de cable AC 5. Conector del pedal 6. Eje de transmisión	
1. Lubrique la pieza de mano después de cada esterilización de la misma. 2. El cuerpo de la pieza y el motor siempre se tienen que limpiar entre cada paciente.	El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.		
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica		
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo		
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.		
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.		
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas		
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.		