



PULSIOXÍMETRO SIMPLY II - AS-303




1


Dispositivo pequeño dirigido al monitoreo puntal (no continuo) de saturación de oxígeno en sangre (en SpO2) y frecuencia de pulso.

2

VISTA FRONTAL

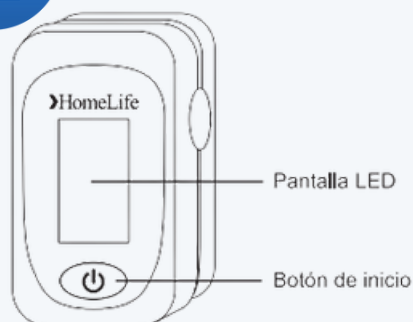


VISTA FRONTAL

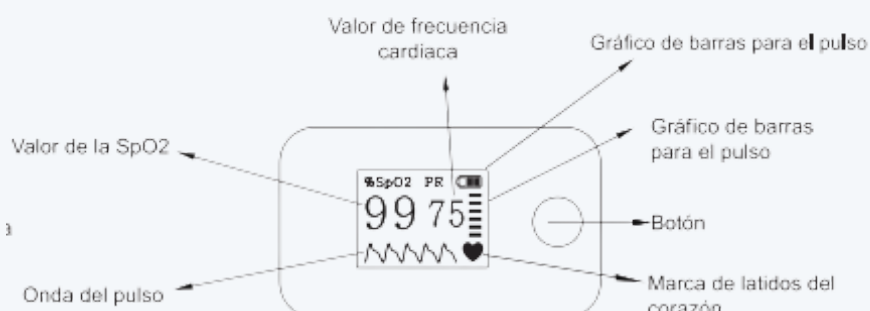

MODO DE USO


1. Presione el botón de encendido en el panel frontal del dispositivo
2. Presione el dispositivo desde el extremo para abrirlo e introduzca el dedo del paciente.
3. Espere de 3 - 6 segundos sin mover el dedo o el dispositivo para que pueda calcular los parámetros.
4. Lea los resultados en la pantalla del dispositivo.
5. Quitar el dedo del dispositivo y al cabo de 20 segundos el equipo se apagará automáticamente.

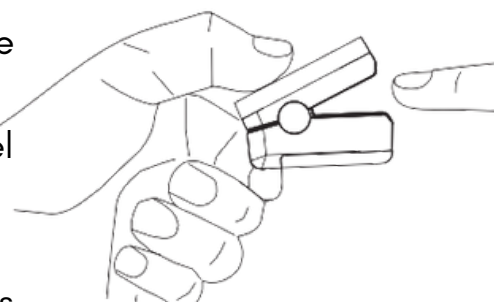

3

CAUSAS DE UNA MALA MEDICIÓN

1. Radiación de luz ambiental
2. Movimiento del cuerpo
3. Baja perfusión
4. Efectos de campos electromagnéticos (Ej celular)
5. Equipos eléctricos
6. Paciente con uñas pintadas
7. Presión arterial muy baja

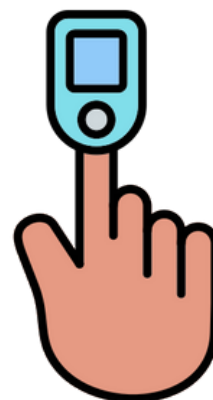

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

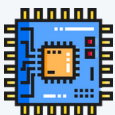

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos