

GUIA RÁPIDA DE USUARIO

El dispositivo de fototerapia de cuerpo completo 3 Series NeoLux, es un gabinete ultravioleta médico que está destinado para el tratamiento de psoriasis, vitíligo, y dermatitis atópica (eczema) en todos los tipos de piel (I – VI).


Especificaciones de operación

Temperatura ambiente:	15°C a 30°C (59°F a 86°F)
Humedad relativa:	10% a 95%, sin condensación
Clasificación de entrada de líquido:	IPX0 (Este equipo no tiene protección en contra de entrada de agua.)
Distancia de riesgo ocular:	3 Metros (9.84 Pies)
Luminosidad ambiental:	250 – 500 lux

Recomendaciones generales:

- El dispositivo nunca debe estar directamente expuesto a líquido que salpique o que fluya, o a agua.
- Para asegurar flujo de aire frío apropiado, el dispositivo debe ser colocado a un mínimo de 1 pulgada (2.5 cm) lejos de las paredes circundantes, de equipos, y de muebles.
- La sala en que el dispositivo sea colocado debe estar ventilada para permitir desplazamiento libre de aire para asegurar que el equipo y sus alrededores permanezcan fríos.
- El dispositivo contiene lámparas de vidrio. Evite fuerza excesiva al equipo para prevenir daño a las lámparas.

Operación del equipo:

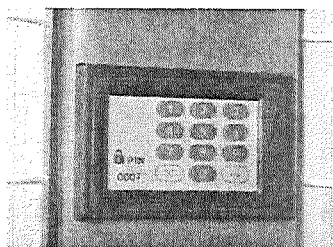

1. Toque la pantalla del logo. Esto abrirá la pantalla de bloqueo.
2. El código de clave preestablecido de fábrica es "0007".
3. Toque las flechas ▲/▼ para establecer la dosis deseada en millijoules (UVB) o Joules (UVA).
4. Toque la flecha Enter para ingresar a la pantalla de

Confirmación del Tratamiento.

5. Asegúrese de que el paciente tenga sus gafas puestas y esté colocado de acuerdo a las instrucciones.
6. Confirme la dosis y el tiempo estimado del tratamiento.
7. Si la dosis y el tiempo estimado de tratamiento son correctos, toque la flecha Enter para iniciar el tratamiento.
8. Si necesita hacer cambios a la dosis, toque la flecha de retorno para regresar al paso #2.

9. Después del inicio demorado, si está activado, el tratamiento comenzará y la pantalla mostrará el progreso.
10. Para repetir la misma dosis para otra exposición, toque el botón Repetir.
11. Nota: El Sistema emite un pitido para indicar el final del tratamiento y muestra la dosis administrada con el tiempo transcurrido.

Advertencia: Para proteger los ojos durante la operación, el operador, el paciente y cualquier persona a la vista del equipo debe usar gafas bloqueadoras UV o goggles ajustados diseñados para bloquear 100% de toda la luz UVA y UVB del área del ojo. El no hacerlo puede resultar en quemaduras severas o lesión a largo plazo a los ojos.

Botones de control del paciente

Para comodidad y conveniencia del paciente:

- El botón amarillo está indicado con el icono de Luz y se usa para iniciar y pausar/parar el tratamiento.
- El botón azul con un icono de ventilador se usa para encender y apagar el ventilador.



Limpieza entre tratamientos

Todas las superficies y accesorios que estén en contacto con el cliente deben ser limpiados entre tratamientos/usos de la máquina. Para mantener el dispositivo limpio entre cada tratamiento aplique 70% de alcohol isopropílico o 1 parte de blanqueador y 3 partes de solución de agua a un paño no abrasivo y limpie las superficies de contacto con el paciente para eliminar el polvo, la suciedad y los desechos. Las superficies de contacto con el paciente típicamente incluyen las manijas internas y externas y la plataforma, pero pueden incluir otras áreas del dispositivo.

Nota: No limpie superficies reflectoras con toallas de papel porque pueden rayar la superficie.