


Respirador de la serie SV

Esta Guía rápida se ha elaborado con el objetivo de describir las funciones básicas y el mantenimiento rutinario del respirador. Para obtener más información, consulte el Manual del operador.

Funcionamiento básico

1. Conecte el respirador y el humidificador a la fuente de alimentación de CA. Conecte el suministro de gas.
2. Ponga en marcha el humidificador y defina los parámetros correspondientes de acuerdo con las instrucciones de uso del humidificador (compruebe si el nivel de agua del humidificador cumple con los requisitos antes de ponerlo en funcionamiento).
3. Cuando el respirador se enciende, realiza una autocomprobación de forma automática.
4. Conecte los tubos de respiración y seleccione la opción para realizar (recomendado) u omitir la comprobación del sistema.
5. Cuando la comprobación del sistema finaliza, el respirador empieza a trabajar en el modo establecido. En el caso de pacientes nuevos, debe definir los parámetros relativos al IBW, al tipo de paciente (adulto o pediátrico) y al tipo de ventilación (invasiva o no invasiva).
6. Conecte el pulmón de prueba y compruebe su estado. Si el estado del pulmón de prueba es óptimo, puede desconectarlo y conectar el respirador al paciente (recomendado).
7. Conecte el paciente y los tubos de respiración, e inicie la ventilación. Monitorice al paciente de cerca durante un determinado periodo de tiempo y preste atención a las constantes vitales del paciente y al estado de ventilación del respirador.
8. Observe los parámetros y las alarmas durante la ventilación. En caso de que sea necesario, vuelva a configurar el modo de ventilación o los parámetros.
9. Después del uso, apague el respirador y el humidificador por orden. A continuación, desconecte el suministro de gas.

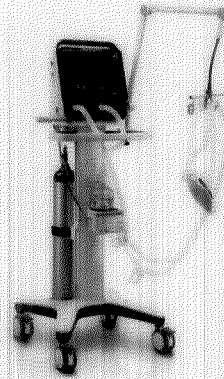

Mantenimiento rutinario

Realice las siguientes tareas de mantenimiento antes de cada uso o después de utilizar el respirador de forma continua durante dos semanas:

- Realice una comprobación del sistema. Compruebe la resistencia del sistema de respiración y si existen fugas.

Realice las siguientes tareas de mantenimiento varias veces al día o según sea necesario:

- Compruebe si se ha acumulado agua en los tubos de respiración y en los colectores de agua. Vacíe el agua que se haya acumulado.
- Inspeccione las piezas para ver si están dañadas. Cámbielas según sea necesario.

Realice las siguientes tareas de mantenimiento con cada paciente o según sea necesario:

- Realice una puesta a cero de la presión y el flujo. Realice una comprobación del sistema. Realice una calibración del sensor de flujo. Sustituya las piezas por piezas desinfectadas o piezas desechables nuevas.

(FIN)

Mantenimiento rutinario

(Continuación)

Realice las siguientes tareas de mantenimiento a diario o según sea necesario:

- Limpie las superficies externas.
- Calibre el sensor de O₂.
- Cuando exista la posibilidad de que el gas exhalado por el paciente contamine el conjunto de la válvula de seguridad de inspiración, es necesario cambiar la válvula de seguridad de inspiración y la membrana de la válvula de seguridad de inspiración por otras desinfectadas.
- Sustituya la válvula de espiración si está dañada.
- Calibre el módulo de CO₂ cuando el valor de CO₂ medido varíe de forma considerable.
- Calibre la pantalla táctil si no funciona correctamente.

Realice las siguientes tareas de mantenimiento mensualmente o según sea necesario:

- Compruebe si se ha acumulado polvo el filtro de polvo. Límpielo o sustitúyalo, según sea necesario.

Realice las siguientes tareas de limpieza y desinfección para cada paciente:

- Limpie la superficie externa del respirador (incluida la carcasa, el cable de alimentación y los tubos de suministro de gas), el carro y el brazo de apoyo. Límpielos o expóngalos a radiación ultravioleta para desinfectarlos.

Realice las siguientes tareas de limpieza y desinfección para cada paciente o cada semana:

- Sumerja el conjunto de la válvula de espiración (excepto la membrana), la membrana de la válvula de espiración y el tubo del paciente (incluido el colector de agua, la pieza en Y y el adaptador) en detergente para limpiarlos. Sumérjalos o esterilícelos en autoclave para desinfectarlos.
- Para limpiar y desinfectar el sensor de CO₂ de flujo directo, el sensor de SpO₂, el nebulizador y el humidificador, consulte las instrucciones suministradas por los fabricantes.

Realice las siguientes tareas de limpieza y desinfección según sea necesario:

- Sumerja el conjunto de la válvula de seguridad de inspiración en detergente para limpiarlo. Sumérjalo o esterilícelo en autoclave para desinfectarlo.

Realice las siguientes tareas de limpieza y desinfección cada 4 semanas o según sea necesario:

- Sumerja el filtro y la pantalla antipolvo del ventilador en detergente para limpiarlos y expóngalos a radiación ultravioleta para desinfectarlos.
- Sumerja el filtro HEPA y el filtro de polvo en detergente para limpiarlos y expóngalos a radiación ultravioleta para desinfectarlos.

mindray



046-006336-00 (2.0)