


INSTRUCTIVO RÁPIDO DE MANEJO

Refrigerador Farmacéutico, Haier HYC-610

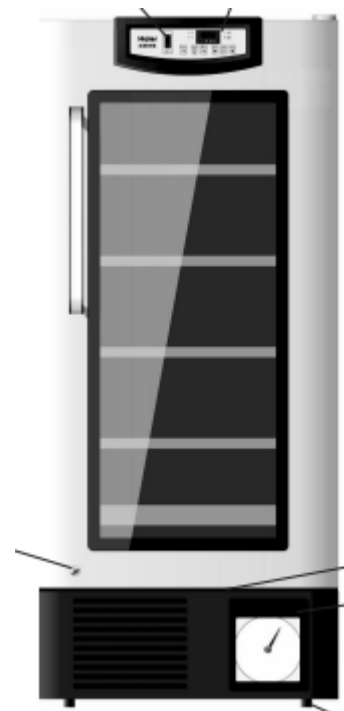

A continuación se darán las indicaciones respectivas para el manejo adecuado y el control de un Refrigerador Farmaceutico Haier HYC-610:


1. Verifique que el cable de poder esté conectado a una toma corriente bifásica (2 líneas + tierra) o de 220 Voltios AC.



2. No emplear el equipo hasta después de 30 minutos de encendido si ha sido movilizado previamente.

3. Cuando la unidad inicializa por primera vez, la alarma sonora puede sonar, esto es normal, presione el botón de alarma para apagarla.

4. La alarma se activara mientras la temperatura de la botella superior de temperatura alcanza los rangos entre 2°C a 8°C.

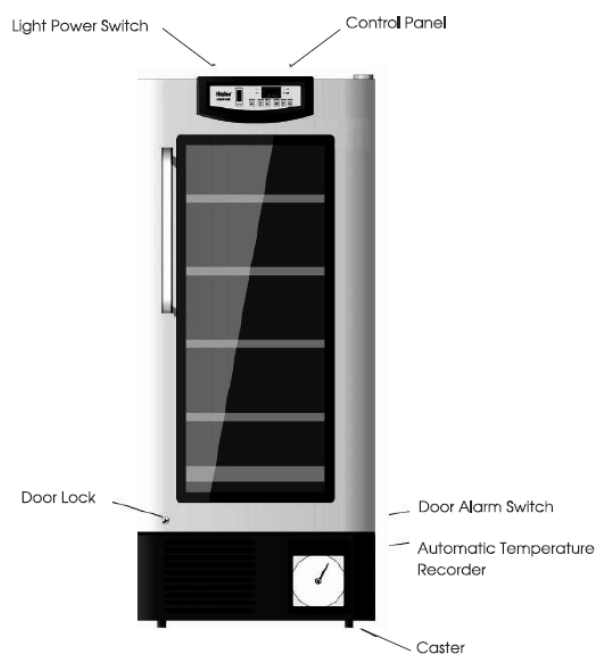

5. Las dos botellas sensor deben tener una solución de glicerina al 10% de concentración. Estas están ubicadas al fondo de las bandejas en la parte posterior de la cabina.

6. Normalmente tarda unas cuantas horas para llegar al setpoint de temperatura deseado, una vez los valores de temperatura estabilicen, revise la temperatura de la botella sensor para corroborarlo.

7. Procure no ingresar demasiadas unidades dentro del sistema y más si tienen una temperatura elevada.

8. La temperatura de preset de este equipo es de 5° con una variación aproximada de 1 °C

9. Para ver la temperatura en los diferentes puntos y el comportamiento del equipo vea la siguiente tabla:

Table 1, Temperature Indication ●Light on ○Light off

	Operation	Push Button	Display	Definition of display
1	Plug in the unit, power is on		Average Temperature in Sensor Bottle ●up ●low	Average Temperature
2	Push temperature display button		Upper sensor bottle temperature ●up ○low	Upper sensor bottle temperature
3	Push temperature display button		Lower sensor bottle temperature ○up ●low	Lower Sensor bottle temperature
4	Push temperature display button		Average Temperature in Sensor Bottle ●up ●low	Average Temperature
5	Repeat Step 2			