

MEDIANA


- M20/M30



www.huv.gov.co

MEDIANA


- M20/M30

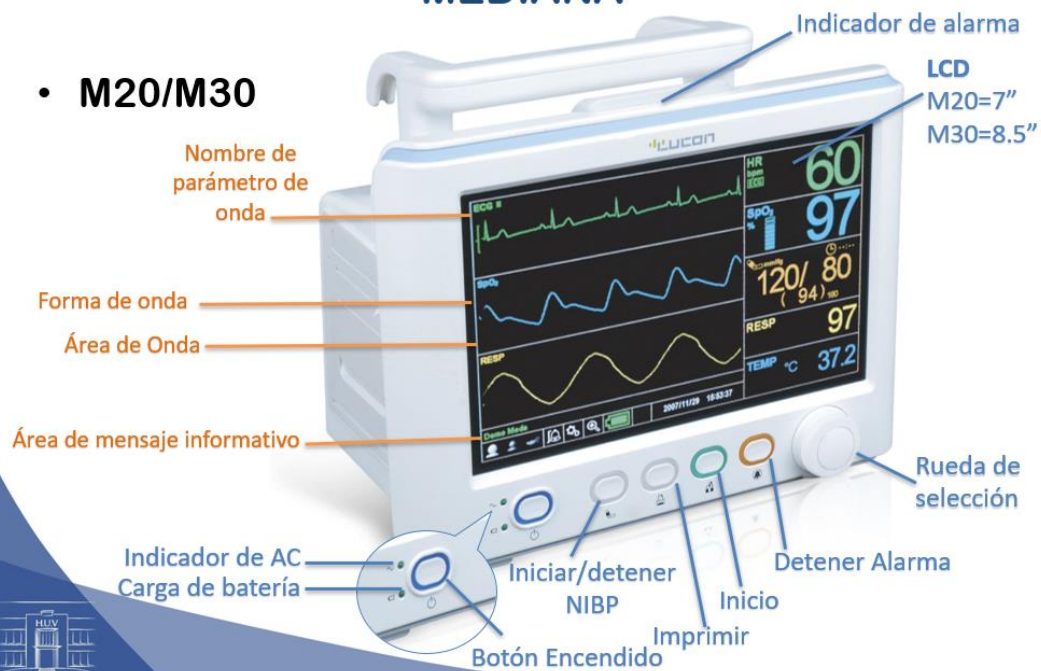

www.huv.gov.co

MEDIANA

• M20/M30

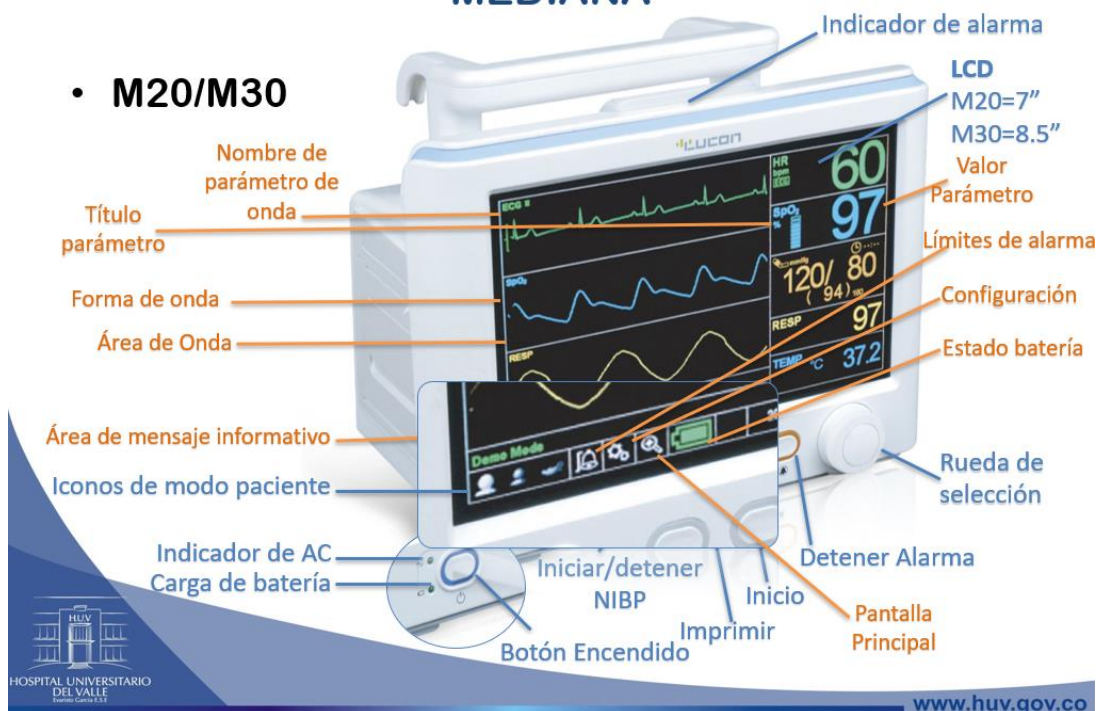

MEDIANA

M20/M30



PARÁMETROS

M20: Electrocardiograma ECG, frecuencia cardíaca HR, presión no invasiva NIBP, saturación de oxígeno SpO2, frecuencia de pulso PR, respiración RR y temperatura TEMP1

M30: Lo mismo + módulo opcional de capnografía ETCO2

Puede seleccionar el tipo de paciente, **Adultos, pediátricos, neonatos** [Menu sistema], [Inform. Del paciente],

ALARMAS

Tipos de alarma: Visual, audible, técnica, fisiológica, mensajes informativos

Prioridad: Alta (rojo), media (amarillo), baja (amarillo sin titilar)

Límites de alarma: [cono [alarma/límites], [Límite de alarmas]


LIMPIEZA

- Solución jabonosa suave
- Alcohol isopropílico (Solución en agua al 70%)
- Solución salina al 1% para sensores
- Retirar utilizando paño suave
- Secar en un lugar fresco y ventilado
- Para Desinfección: Etanol (hasta un 70%)
- Glutaraldehído (Hasta un 3,6%)



MEDIANA

M20/M30

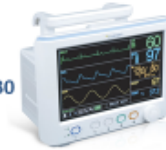

- No retuerza ni doble los cables del sensor de saturación, ECG o manguera de presión
- No utilice el monitor ni el sensor de SpO2 durante los procedimientos de resonancia magnética
- No utilice el sensor de SpO2 en una extremidad que tenga el brazalete para medir la PANI, ni sobre un dedo con una uña pintada
- El monitor solo puede usarse con un paciente a la vez
- No utilice teléfonos celulares cerca
- No derrame líquidos sobre el monitor, podría presentarse descarga eléctrica
- Si duda de la precisión de cualquier valor mostrado en el monitor, determine los signos vitales con medios alternativos
- No confíe exclusivamente en la alarma sonora. Evite ajustar el volumen a un tono bajo. Realice control personal al paciente
- Antes de usar el equipo, verifique que no haya cables dañados.
- Desvíe todos los cables lejos de la garganta del paciente
- No utilice el equipo con anestésicos inflamables

