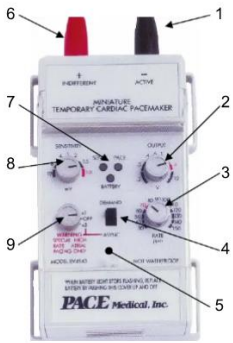


	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MARCAPASOS EXTERNO	CÓDIGO: NA
	MARCA: APC MEDICAL	VERSIÓN: 1
	MODELO: EV4543	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2023

USO DEL EQUIPO  Equipo biomédico encargado de estimular el corazón a través de una vía externa transcutánea o percutánea. Está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos-parche que se aplican directamente sobre la pared torácica y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Modo de estimulación por demanda y asincrónico. • Frecuencia de estimulación de 30-150 ppm CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Clasificación IIB de alto riesgo.	PARTES DEL EQUIPO  1. Conexión para electrodo negativo negro 2. Perilla para ajuste de voltaje 3. Perilla para ajuste de frecuencias de pulso 4. Botón para elegir modo de operación: Demanda/Asincrónico 5. Tapa de plástico 6. Conexión para electrodo positivo rojo 7. Indicadores de marcapasos, sensibilidad y batería 8. Perilla para ajuste de sensibilidad de la onda 9. Perilla de ON/OFF LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	MODOS DE OPERACIÓN MODO A DEMANDA: La estimulación a demanda, se realiza detectando exclusivamente la actividad intrínseca del corazón en la onda P y R. 1. Cambie el modo del equipo, desde el botón del ítem 4 2. Determine el valor de ajuste de la onda 3. Ajuste el valor de la sensibilidad del equipo a la mitad o al tercio del umbral de sensibilidad que permite el equipo 4. Determine el umbral de captura cardiaca MODO ASINCRÓNICO: La estimulación asincrónica se produce por medio de la estimulación ventricular programada, independiente de cualquier evento cardiaco. 1. Cambie el modo del equipo, desde el botón del ítem 4. 2. Determine el umbral de captura cardiaca 3. Ajuste el valor de la amplitud de la onda con valores grandes. 4. Ajuste el valor de sensibilidad. SUPERVISIÓN DE LA BATERIA El equipo cuenta con batería alcalina de 9V, al agotarse es necesario hacer el cambio con la misma referencia de una batería en funcionamiento.
--	--	--