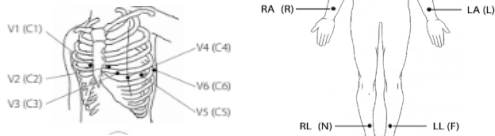
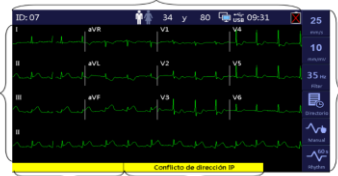


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001				
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:				
			DÍA 15 MES 03 AÑO 2023				
Nombre del equipo: Electrocardiografo		Modelo: Beneheart R12		Riesgo del equipo: IIA			
Marca: Mindray				Clasificación del equipo: Diagnostico			
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO			
				1. Verifique el estado de la bandeja de papel termico. En caso de ser necesario, instale el nuevo papel colocando la hoja de arriba en la guía de la impresora. 2. Encienda el equipo 3. Pulse ID e ingrese la información del paciente 4. Prepare la zona en donde se colocaran los ECG			
Equipo biomédico que registra las señales electricas del corazón para detectar diferentes afecciones cardiacas, determinar la fuerza, rapidez y el ritmo del paciente al momento de la evaluación.							
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				5. Ajuste la velocidad de onda, el tamaño de onda y la frecuencia del filtro de artefactos de tipo muscular.			
1. Condiciones de temperatura: 0-40 °C		2. Botón de ON/OFF		6. Seleccione la tecla ECG para iniciar la toma			
2. Condiciones de humedad: 15-95 %		3. Botón para iniciar o detener toma de ECG		7. Pulse la tecla  ulse en  italla para imprimir			
3. Voltaje de funcionamiento: 100-240 V		4. Pantalla de visualización de ECG		8. Pulse guardar para la toma de cada paciente			
4. Frecuencia: 50-60 Hz		5. Botón para acceder al menu principal		INSTALACIÓN DE PAPEL TERMICO			
5. Batería de litio: 4500 mAh		6. Indicadores de pantalla					
6. Peso: 4.8 Kg		7. Conector para USB		GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE			
7. Tiempo de funcionamiento sin batería: Entre 1-3 Horas		8. Conector de cable para ECG		1. Pulse la tecla directorio para acceder a los pacientes			
8. Tiempo de carga completa: Entre 6-7 Horas		9. Botón para cambiar las derivadas del ECG.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
9. Dimensiones: 305 mm x 365 mm x 128 mm				Para realizar la limpieza y desinfección del equipo, realice la con el desinfectante aprobado por la institución o en caso de contingencia alcohol al 70%. Recuerde limpiar tanto el equipo como el cable ECG.			
10. Pantalla LCD: 8", 800 x 480 píxeles							
RECOMENDACIONES GENERALES							
1. Verifique que el equipo se encuentre conectado siempre		1. Área de información personal del paciente					
2. Limpie bien las áreas donde irán los electrodos en la piel y aplique la crema conductora sobre la cara de contacto de los electrodos.		2. Área de muestra de ondas y derivadas					
3. Asegúrese que se haya cargado el equipo con el papel de impresión térmico adecuado para este equipo.		3. Alarmas fisiologicas					
		4. Alarmas tecnicas					
		5. Área de acceso rapido.					
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							