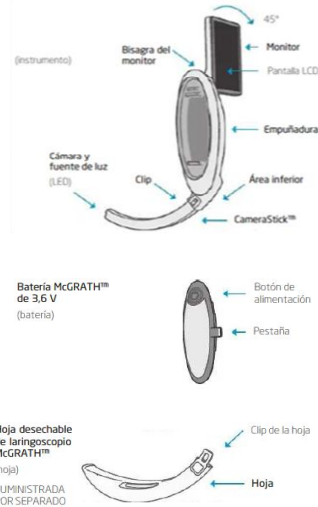


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				15	03	2023
Nombre del equipo:	Videolaringoscopio	Modelo:	MAC		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	McGrath			Clasificación del equipo:	APOYO DIAGNOSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
 El videolaringoscopio MACGRATH MAC es una herramienta utilizada para facilitar la intubación de la tráquea, al ser rígido, el laringoscopio sujeta y adapta la anatomía permitiendo una clara visión de la laringe y la entrada a la tráquea por la necesidad de tener una vía respiratoria segura que es fundamental en procedimientos quirúrgicos y situación de emergencia.				La limpieza del instrumento y de la batería se puede realizar siguiendo el lineamiento dispuesto por la institución. Utilizando los elementos que corresponden. Al realizar el proceso al instrumento, retire la batería y limpie la superficie de todo el dispositivo y teniendo en cuenta el clip, para la limpieza de la batería realizarla sobre la superficie y pestaña.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				ADVERTENCIAS		
Tamaño: 180mm x 68mm x 110mm				1. No se pueden limpiar ni esterilizar las hojas para su reutilización, debido a que estas están hechas para un solo uso.		
Peso: 0,200 Kg				2. El instrumento solo debe utilizarse con las hojas desechables del laringoscopio McGrath™		
Alimentación: batería de litio de 3,6V. *Normalmente proporciona				3. No utilice el instrumento si los elementos físicos no encajan correctamente o sufren daños físicos.		
Protección: IPX7				4. Asegurese que el dispositivo esté completamente seco antes de guardarlo		
Fuente de luz: LED				5. verifique siempre que el led esté encendido y la pantalla muestre imagen		
Pantalla: Pantalla LCD a color de 2,5 pulgadas				6. No se deben utilizarse equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia a menos de 30 cm del instrumento		
Cámara: CMOS				7. No utilizarlo en entorno de resonancia magnética		
CISPR: CISPR11 grupo 1 clase B				8. Antes de cada uso, verifique la superficie exterior de la hoja para asegurarse de que no hay superficies rugosas, bordes afilados o perturbaciones no intencionadas que puedan causar daños.		
Vida útil: 5 años o 2400 ciclos de limpieza y desinfección de bajo nivel				ALARMA Y POSIBLES ERRORES		
Materiales: Termoplásticos de uso médico duradero con núcleo de aleación estructural reforzada.				1. Si no parece imagen en la pantalla o daños visibles en el botón de alimentación: Cambie de batería.		
PRECAUCIONES GENERALES				2. interrupción de video imprevista: Pruebe encender de nuevo el instrumento, si no funciona sustituya batería.		
1. No use ningún otro tipo de laringoscopio con este instrumento médico.		1. Monitor		3.El instrumento no enciende: Extraiga y vuelva a colocar la batería, pruebe encendiendo de nuevo		
2. No use ningún otro tipo de batería con este instrumento		2. Empuñadura				
		3. Clip				
		4. CameraStick™				
		5. Cámara y fuente de luz				
		6. Batería McGrath™				
		7. Botón de alimentación				
		8. Pestaña				
		9. Clip de la hoja				
		10. Hoja desechable de laringoscopio McGrath™				
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:	FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO	
			15	03	2023		
Nombre del equipo:		Modelo:		Riesgo del equipo:			
Marca:				Clasificación del equipo:			
FORMATO ABIERTO PARA LA REALIZACIÓN DE GUÍAS							
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							