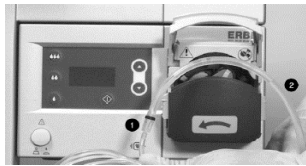
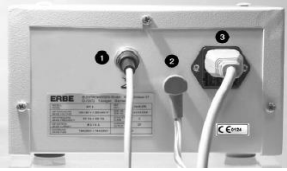


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			
Nombre del equipo:	Bomba de irrigación	Modelo:	EIP 2		Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	ERBE				Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Es un dispositivo médico utilizado como una bomba de tubo flexible para la eliminación de impurezas en el área de exploración, permitiendo una mejor exploración y también permitiendo una mejor irrigación en los procedimientos.						
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Voltaje de alimentación: 100-240 V 2. Dimensiones: 205 x 125 x 170 mm 3. Peso: 3Kg 4. Temperatura de trabajo: +10°C hasta +40°C		1. Interruptor de red 2. Indicador de advertencia 3. Modo de 30 % de la potencia de irrigación ó aprox. 150 ml/min 4. Modo de 50 % de la potencia de irrigación ó aprox. 250 ml/min 5. Modo de 80 % de la potencia de irrigación ó aprox. 400 ml/min 6. Indicador de valor de la potencia 7. Teclas de ajuste de arriba/ abajo 8. Tecla de activación de irrigación 9. Símbolo CF de protección 10. Tecla de indicación de la dirección en la que fluye el líquido de irrigación 11. Tapa del cabezal de la bomba		1. Aliste el juego de tubos flexibles/ líneas de irrigación 2. Perfore la abertura prevista de la botella de lavado 3. Deposite la botella de irrigación en un lugar apropiado 4. Abra la tapa del cabezal de la bomba. 5. Coloque el tubo peristáltico blando de forma centrada sobre los rodillos de la bomba. La flecha en la tapa del cabezal del bomba indica la dirección de flujo 6. Active la bomba a fin de llenar el tubo flexible de líquido de irrigación 7. Conecte la conexión Luer-Lock del juego de tubos n° 20325-001 a la conexión de lavado de un endoscopio 8. Seleccione la potencia de irrigación deseada 9. Active la irrigación usando el interruptor de pedal o la tecla de activación.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		ERRORES Y POSIBLES SOLUCIONES		PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS RAPIDAS		
1. Error Time Out 2. La bomba no se puede activar 3. Errores E 1, E 2, E 3, E 4 ó E 5		Finalice la activación, ya que se sobrepasa los 20 S. Cierre la tapa de la bomba. Error en el interior de equipo por diferentes circunstancias.		 1. Conexión para el interruptor de pedal 2. Conexión equipotencial 3. Conexión para cable AC		
1. Seleccione la potencia de irrigación con las teclas Arriba / Abajo 2. Pulse la tecla de acceso rápido hasta que aparezca un punto en la indicación de potencia						
potencia de irrigación en la tecla 1 < potencia de irrigación en la tecla 44 potencia de irrigación en la tecla 44 < potencia de irrigación en la tecla 444						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						