




Guía Rápida Ventilador Mecánico AEONMED VG70

Componentes del equipo

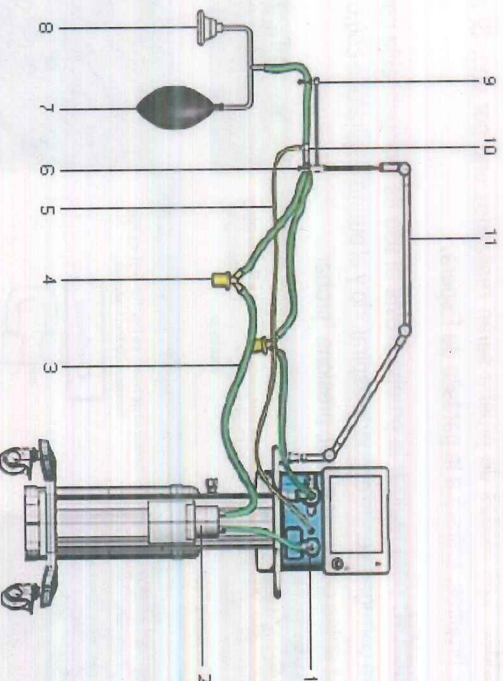


- | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|---|----------------------|
| 1 | Unidad de Control Principal | 2 | Humidificador | 3 | Circuito de Paciente |
| 4 | Colector de Agua | 5 | Tubo de Nebulizador | 6 | Pieza Y |
| 7 | Pulmón de Prueba | 8 | Mascarilla | 9 | Conector |
| 10 | Conector de Nebulizador | 11 | Brazo posicionador de circuito de paciente | | |

Panel frontal y trasero del equipo.

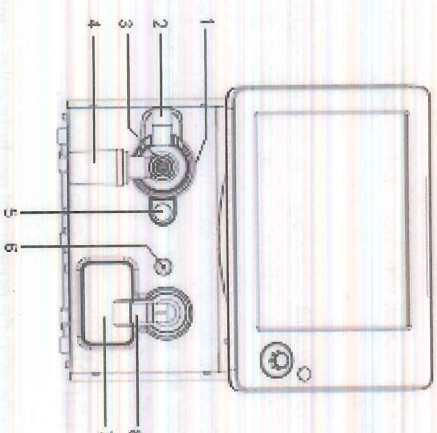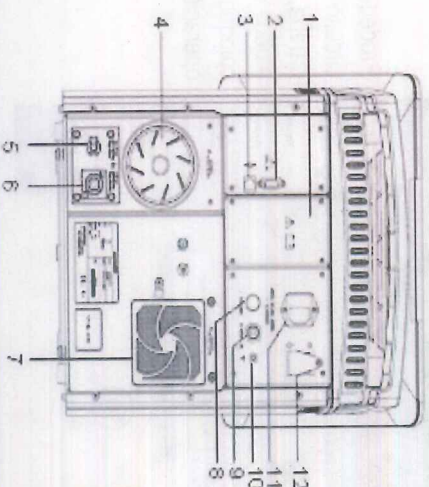

1	Cubierta de Batería	2	Conector de Módulo deCO2	3	Conector para Llamar a Enfermera
4	Entrada de aire	5	Entrada de Oxígeno de flujo bajo.	6	Entrada de Oxígeno Hiperbárico
7	Ventilador de enfriado	8	Fusible de corriente DC	9	Puerto de entrada de corriente DC
10	Terminal Equipotential	11	Enchufe de suministro de energía	12	Interruptor de Suministro de Energ 1a
13	Módulo espiratorio	14	Puerto de escape	15	Puerto Espiratorio
16	Taza del colector de agua	17	Pestillo del módulo espiratorio	18	Puerto de salida del nebulizador
19	Cubierta del sensor de oxígeno	20	Puerto Inspiratorio	21	

Pantalla del equipo

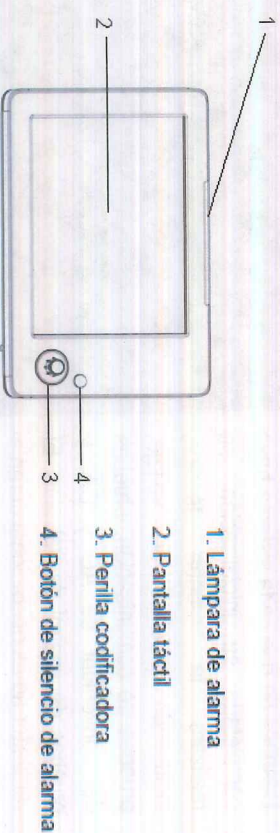

Operación del equipo.

ADVERTENCIA: Nunca utilice el ventilador en servicio hasta que la instalación del paciente esté completa.


La seguridad clínica ha sido una consideración de suma importancia en el diseño de la máquina, pero el operador deberá ser muy cauteloso al operarla.

PRECAUCIÓN: En caso de que algún valor medido sea sospechoso, el operador deberá primero revisar los signos vitales del paciente usando otros medios, y después revisar el ventilador.

Puesta en marcha del sistema.

Conecte el cable de suministro de energía al enchufe de suministro de energía de la pared, y el indicador de suministro de energía de C.A. se prenderá de color verde.

Para encender el ventilador, accione el interruptor de energía del ventilador. La máquina se encenderá e iniciará su funcionamiento.

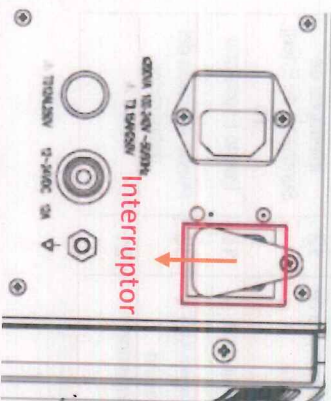

Prueba técnica.

Después de que cada sistema haya completado su inicialización, se realizará la prueba técnica, incluyendo pruebas de voltaje, pruebas de comunicación, pruebas del convertidor de AD y DA, y pruebas de control de válvulas. El ventilador no es operacional durante este período.




Prueba previa al uso.


Después de que la unidad haya terminado la prueba técnica, entrará a la rutina de prueba previa al uso.

Los modos de prueba incluyen: Prueba de Suministro de Gas, Prueba de Fuga, Prueba del Sensor de Flujo, Prueba del Sensor de Presión y Prueba de la Válvula de Seguridad. Los modos de prueba serán realizados uno por uno. Si se pasan todas las pruebas, entrará a la pantalla de Espera.

PRECAUCIÓN: para realizar la prueba previa al uso es indispensable conectar la manguera corrugada entre el puerto espiratorio y el puerto inspiratorio como lo indica la interfaz antes de iniciar el test, presione "probar".

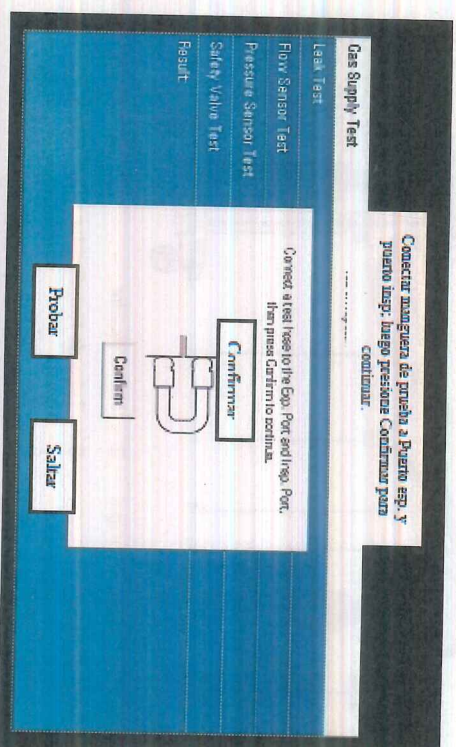

Luego de superar satisfactoriamente la comprobación de estado del equipo (test), el equipo reflejará la interfaz de espera donde se puede seleccionar el modo de trabajo y el tipo de paciente.

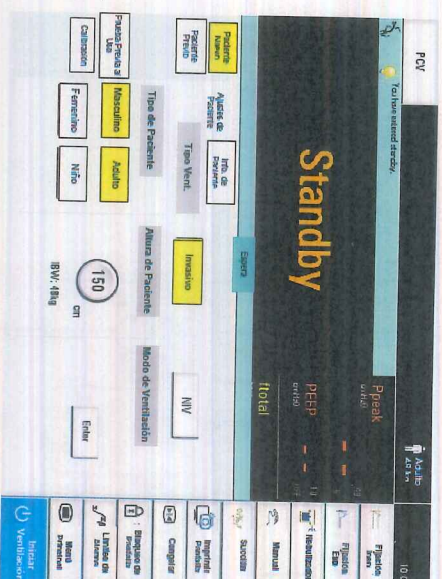

Proceda a instalar un circuito pulmón de prueba, seleccione el modo de trabajo y coloque el equipo en operación.

Simbología del equipo

se pueden usar símbolos. No todos estos símbolos pueden necesariamente aparecer en el equipo

	Encendido (Energía)		Clase de Protección Tipo B
	Apagado (Energía)		Clase de Protección Tipo BF
	Seguir instrucciones de operación		Advertencia y Precaución
	Tierra de Protección		Voltaje Peligroso
	Conexión EQUIPOTENTIAL		Alarma
	Bloquear		Fabricante

	Fijación Inspiratoria		Número de Serie
	Nebulización		Fijación Espiratoria
	Aumento Inteligente de oxígeno		Manual Inspiration
	En espera		Congelamiento de Forma de Onda
	Corriente alterna		Batería Interna

	En espera		Congelamiento de Forma de Onda
	Corriente alterna		Batería Interna
	Dispositivo USB		Referir a documentación
	Mensaje Rápido		Ya en línea
	Disparo por Flujo		Disparo por Presión
	Adulto		Disparo Manual
	Modos No Invasivos		Niño
	Menú Principal		Modos Invasivos
	Neonato		Tecla de Silenciado de Alarma
	No reusar		Eliminación de Desechos

aeonmed
BEIJING AEONMED CO., LTD.

Oficina (Headquarters):
DIR: 11B2, Fengtai Science Park, (100070) Beijing, China
TEL: +86-10-8368 1616 FAX: +86-10-6371 8989
Http://www.aeonmed.com E-mail: marketing@aeonmed.com

La información contenida en este libro es correcta a la fecha de publicación. Una de las políticas de Beijing Aeonmed Co., Ltd. es la mejora continua de sus productos. Debido a esta política Beijing Aeonmed Co., Ltd. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio, que pueda afectar la información contenida en este libro en cualquier momento.

ART70-001