


GUÍA RÁPIDA LECTOR DE TARJETAS 'BANJO' ID Microtyping System - BIORAD




INICIALIZACIÓN

ON/OFF

El interruptor se encuentra en la parte frontal derecha del equipo

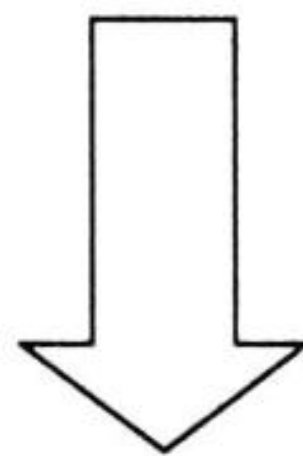

Al hacer doble click en el icono de MAESTRO SOFTWARE Maestro.exe aparece la llave en la que están expuestos todos los módulos del sistema
ID Microtyping System - BIORAD

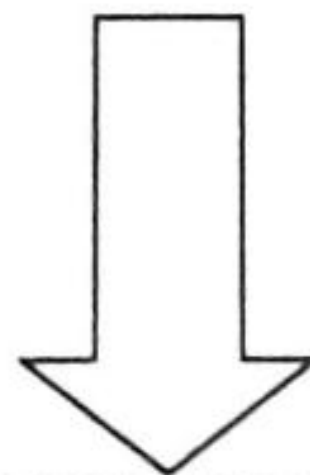


Hacemos un click en el icono del modulo BANJO y esperamos a que el sistema pregunte la contraseña personal, así la tapa del lector se abre y esta listo para trabajar

REALIZAR LECTURAS EN EL BANJO

Una vez el sistema esta inicializado podemos introducir la tarjeta con el código de barras hacia el equipo.

Recuerde, el sistema automatizado tiene interpretación solo por código de barras

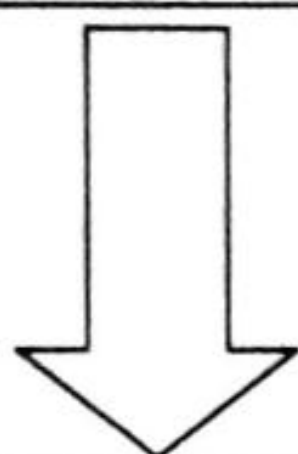


EN EL SISTEMA MAESTRO PODEMOS REALIZAR TRES TIPOS DE LECTURA

MANUAL


AUTOMATICA

COSTUMIZED (PERSONALIZADA)

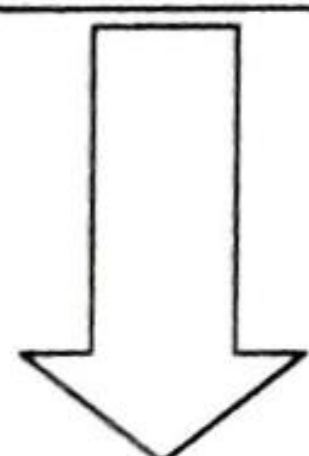


MANUAL

APARECEN TODAS LAS
PRUEBAS DEL SISTEMA
DIAMED ID MICROTYPING

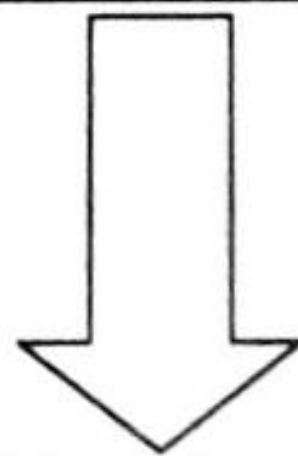

AUTOMATICA

SI Y SOLO SI LAS PRUEBAS DE LA
TARJETA FUERON MONTADAS
POR EL EQUIPO AUTOMATIZADO
'SWING'

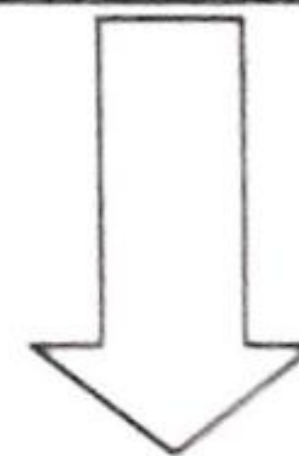

COSTUMIZED

APARECEN LOS PERFILES
DE DONANTES Y
PACIENTES
PERSONALIZADOS.

TIPOS DE LECTURAS

MANUAL

SELECCIONE LA PRUEBA
QUE BUSCA Y PRESIONE
EL ICONO READ O F9

AUTOMATICA

UBIQUE LA TARJETA Y
PRESIONE READ O F9

COSTUMIZED

SELECCIONE EL PERFIL,
DONANTE O PACIENTE Y
PRESIONE READ O F9

**LA TAPA DEL LECTOR SE CIERRA POR SI SOLA AL REALIZAR LA
LECTURA**

**INTRODUZCA EL
CODIGO DEL
PACIENTE O
DONANTE Y
VALIDE**

**VALIDE EL
RESULTADO DE LA
PRUEBA**

**INTRODUZCA EL
CODIGO DEL
PACIENTE O
DONANTE Y VALIDE**

SI DESEA AGREGAR INFORMACION ADICIONAL PRESIONE INFORMATION, REDACTE Y CONFIRME
DESPUES PRESIONE OK

PUEDE SEGUIR LEYENDO PRESIONANDO READ O F9 Y REALIZANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO,
EN CASO CONTRARIO PRESIONE SAVE PARA GUARDAR LA INFORMACION SI QUIERE IMPRIMIR EL
RESULTADO SELECCIONE EL PERFIL DE IMPRESIÓN