

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE SERVICIO CARDIOLOGÍA  ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ALTA CALIDAD  Universidad AUTÓNOMA de Occidente Res. No. 16740, 2017-2021. Vigilada MinEducación.			GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Cuna de calor radiante		CÓDIGO: NA		
MARCA: ATOM		VERSIÓN: 1		
MODELO: 3200-N		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022		

USO DEL EQUIPO



Equipo rodable controlado electrónicamente, que se utiliza en la recepción en sala de parto y soporte del recién nacido en sala de cuidado intensivo neonatal para mantener temperatura corporal del neonato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Modo de precalentamiento automático al encender el equipo Cuna de calor radiante controlada mediante microprocesador.

PARTES DEL EQUIPO



Partes

1. Lámpara de emisión de calor
2. Monitoreo y control
3. Mesa para bebe
4. Pedal de posicionamiento de la cuna

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Asegúrese de que el equipo este conectado a la red eléctrica
2. El calentador radiante debe limpiarse y esterilizarse inicialmente antes del primer uso
3. Encienda el equipo
4. Cuando el equipo enciende se activa el precalentamiento automático al encender el equipo Cuna de calor radiante controlada mediante microprocesador.
5. Tenga en cuenta que puede activar el modo manual y modo servocontrolado rango de 34°C a 38 Resolución de temperatura de 0,1°C
6. Ajuste la altura con el pie de funcionamiento eléctrico ubicado en la parte inferior
7. Asegúrese de que él bebe tenga la protección necesaria para el calor radiante
8. Ubique los parámetros en pantalla: Temperatura de paciente en grados centígrados. Indicador de potencia y programe la intensidad y duración de la emisión de calor
9. Ejecute la programación

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO

EQUIPO: Cuna de calor radiante

CÓDIGO: NA

MARCA: ATOM

VERSIÓN: 1

MODELO: 3200-N


FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

- Modo manual y modo servocontrolado rango de 34°C a 38 Resolución de temperatura de 0,1°C

- Conectar el equipo a un punto de red eléctrica de 120V y que tenga conexión a tierra

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

En este tipo de aparato médico la transferencia de calor se lleva a cabo principalmente por radiación térmica; es decir, la fuente de energía calorífica se encuentra separada del receptor de calor y éste (el calor) viaja por el aire en forma de ondas electromagnéticas.

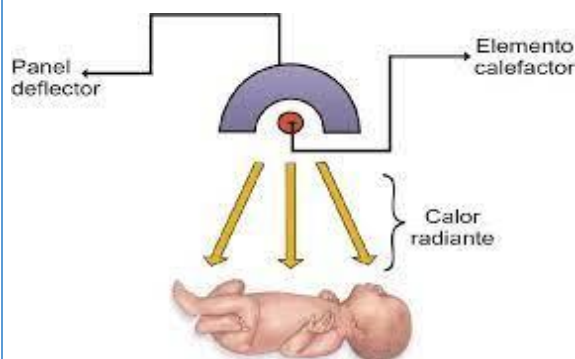

PARTES DEL PANEL FRONTAL



1. Teclas de control
2. Indicador de tiempo de emisión y pantalla
3. Botón de encendido y apagado

ALARMAS DEL EQUIPO

Alarmas visuales y auditivas:

1. Temperatura del paciente alta y baja.
2. Falla del sistema eléctrico.
3. Falla del sensor o sonda de calentamiento del paciente
4. Opción de silenciador temporal de alarmas.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

NO DEJE el calentador en presencia de gases anestésicos inflamables u otros materiales inflamables, tales como algunos líquidos de limpieza.

La cuna de calor radiante debe limpiarse y esterilizarse inicialmente antes del primer uso, cuando termina la operación a un bebé o después de una semana si se observa que hay suciedad en el dispositivo.

No limpie la superficie del módulo calentador hasta que la cabeza se enfríe totalmente.

No use Autoclave de vapor. Usar la esterilización fría

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

CLASIFICACION DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo Moderado