

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE SERVICIO CARDIOLOGÍA  ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ALTA CALIDAD Res. No. 16740, 2017-2021.  Universidad AUTÓNOMA de Occidente Vigilada MinEduación.			GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Calentador de sangre y fluidos		CÓDIGO: NA		
MARCA: 3M		VERSIÓN: 1		
MODELO: Ranger 245		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022		

USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
 Dispositivo diseñado para el calentamiento de fluidos de irrigación intravascular en aplicaciones como: calentamiento de sangre, productos derivados de la sangre y líquidos ESPECIFICACIONES TECNICAS - Mantiene la temperatura de la sangre a una temperatura segura entre 41 grado - 43 grados + 3 grados centígrados. - Conectar el equipo a un punto de red eléctrica de 120V y que tenga conexión a tierra - El equipo tarda aproximadamente 2 minutos en alcanzar los 41°C	 Partes 1. Abertura de la unidad de calentamiento 2. Botón de encendido Consumibles 3. Set de calentamiento desechable	1. Ubique el equipo en un pie de suero y ajústelo 2. Verifique que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica 3. Remueva el set de calentamiento desechable de su envoltura 4. Introduzca el set desechable en la abertura de la unidad de calentamiento 5. Cierre la abertura de la línea de entrada 6. Prepare y conecte una sonda de suministro al contenedor de la solución y asegúrese de remover el aire de la línea 7. Conecte la toma de tubo mas corta al set de administración 8. Conecte la toma de tubo mas larga del set de calentamiento a una extensión que posteriormente ira al paciente 9. Asegúrese de que todas las abrazaderas estén abiertas y posteriormente empiece con el proceso de cebar la línea de suministro 10. Luego de retirar el aire de la línea, proceda a conectar la misma al paciente 11. Encienda el equipo y en aproximadamente 2 minutos la unidad esta lista para operar

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Calentador de sangre y fluidos		CÓDIGO: NA	
MARCA: 3M		VERSIÓN: 1	
MODELO: Ranger 245		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022	


- No sumerja la unidad de calentamiento en soluciones de limpieza o de esterilización. La unidad no es a prueba de líquidos.

- No inserte instrumentos metálicos dentro de la unidad de calentamiento.

-No permita que los derrames o las salpicaduras se sequen dentro de la unidad, ya que esto podría dificultar su limpieza.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo cuenta con una línea de resistencias que proveerán calor al fluido aumentando su temperatura durante el recorrido

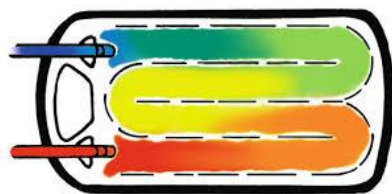

PARTES DEL PANEL FRONTAL:

1. Display de temperatura
2. Indicador de alarma

ALARMAS DEL EQUIPO

TIPO DE ALARMA	QUÉ BUSCAR	DESCRIPCIÓN/ CAUSA	ACCIÓN
Alarma de sobrecalentamiento: 43 °C	La luz indicadora de alarma se ilumina, la alarma suena y la pantalla alfanumérica muestra en forma alternada una temperatura de 43 °C o más y la palabra "HI".	La temperatura del calentador se elevó a 43 °C a causa de condiciones temporales.*	Observe la pantalla alfanumérica. Si la temperatura no desciende a 41 °C (puede tomar algunos minutos), discontinue el uso de la unidad. Llame al Servicio de asistencia al cliente de 3M Patient Warming.
Alarma de temperatura muy baja: 33 °C	La luz indicadora de alarma se ilumina, la alarma suena y la pantalla alfanumérica muestra en forma alternada una temperatura de 33 °C o menos y la palabra "LO".	La temperatura del calentador ha caído a 33 °C.	Las alarmas se detendrán cuando la temperatura suba por encima de 33 °C. Continúe usando la unidad. Si la temperatura no sube por encima de 33 °C, desenchufe la unidad y llame al Servicio de asistencia al cliente de 3M Patient Warming.

CLASIFICACION DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo moderada

PASOS PARA RETIRAR EL SET DESECHABLE

1. Cierre la abrazadera de entrada cercana al casete y abra todas las abrazaderas que están lejos del casete.
2. Desconecte la unidad de calentamiento de la fuente de fluido si corresponde.
3. Deje que el líquido fluya al paciente (esto puede tardar de 2 a 3 segundos). Cierre una abrazadera distal.
4. Extraiga el casete de la unidad de calentamiento y deséchelo de acuerdo con el protocolo de la institución.
5. Vuelva a conectar el tubo del portasueros intravenoso del paciente a la fuente de fluidos para continuar la infusión sin calentamiento.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.