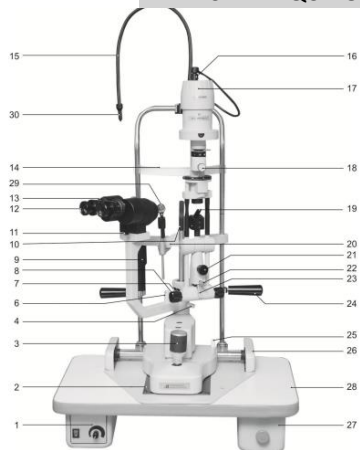


	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: LAMPARA DE HENDIDURA	CÓDIGO: NA
	MARCA: TOPCON/ HAAG	VERSIÓN: 1
	MODELO: SLIT LAMP	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	PASOS DE OPERACIÓN																										
 Dispositivo médico que se utiliza en forma de biomicroscopio el cual se utiliza en oftalmología y optometría para realizar exploración de las estructuras más cercanas de la porción anterior del ojo. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  • Temperatura de funcionamiento entre 0° a 50°C • Vistas oculares de 10X o 15X • Aumento ocular de 10x, 16X, 24X • Angula de hendidura de 0° a 180° • Filtros de absorción de calor, verde y azul cobalto. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIA de riesgo moderado.	 <table><tr><td>1. Interruptor de ON/OFF</td><td>14. Conector</td></tr><tr><td>2. Corredera manual de base</td><td>15. Tapa caja de lámpara</td></tr><tr><td>3. Joystick</td><td>16. Perilla cambio hendidura</td></tr><tr><td>4. Tornillo ajuste microscopio</td><td>17. Espejo</td></tr><tr><td>5. Barra de posicionamiento</td><td>18. Mentonera</td></tr><tr><td>6. Escala lectura angular</td><td>19. Perilla de centrado</td></tr><tr><td>7. Ajuste de ancho hendidura</td><td>20. Pasos 5° a 20°</td></tr><tr><td>8. Ajuste de altura hendidura</td><td>21. Angulo de inclinación</td></tr><tr><td>9. Ajuste de foco</td><td>22. Comando bastidor</td></tr><tr><td>10. Accesorio cambio objetivo</td><td>23. Tornillo fijación horizontal</td></tr><tr><td>11. Ocular intercambiable</td><td>24. Soporte guía horizontal</td></tr><tr><td>12. Apoya cabeza</td><td>25. Cajón de accesorios</td></tr><tr><td>13. Tubo flexible del LED</td><td>26. Base</td></tr></table>	1. Interruptor de ON/OFF	14. Conector	2. Corredera manual de base	15. Tapa caja de lámpara	3. Joystick	16. Perilla cambio hendidura	4. Tornillo ajuste microscopio	17. Espejo	5. Barra de posicionamiento	18. Mentonera	6. Escala lectura angular	19. Perilla de centrado	7. Ajuste de ancho hendidura	20. Pasos 5° a 20°	8. Ajuste de altura hendidura	21. Angulo de inclinación	9. Ajuste de foco	22. Comando bastidor	10. Accesorio cambio objetivo	23. Tornillo fijación horizontal	11. Ocular intercambiable	24. Soporte guía horizontal	12. Apoya cabeza	25. Cajón de accesorios	13. Tubo flexible del LED	26. Base	1. Ajuste la altura de la mentonera 2. Ajuste el foco conforme la refracción necesaria 3. Ajusta la distancia interpupilar con la palanca 4. Aumente la iluminación según sea necesario 5. Utilizando el joystick ajuste la lámpara hasta que el haz de luz este a nivel de los ojos 6. Desplace la lámpara moviendo la corredera transversal hasta lograr el enfoque deseado. 7. Calibre el ancho de la hendidura con el ajuste correspondiente 8. Ajuste el Angulo necesario 9. Aumente las vistas oculares al objetivo deseado 10. Para observación por retro-iluminación ó iluminación proximal, afloje la perilla de centrado, de modo que la imagen de la hendidura pueda ser movida del campo central de observación 11. Ajuste y cambie los filtros a utilizar Indicadores de filtros  1. Abierto 2. Verde 3. Azul 4. Absorción de calor 5. Abierto LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.
1. Interruptor de ON/OFF	14. Conector																											
2. Corredera manual de base	15. Tapa caja de lámpara																											
3. Joystick	16. Perilla cambio hendidura																											
4. Tornillo ajuste microscopio	17. Espejo																											
5. Barra de posicionamiento	18. Mentonera																											
6. Escala lectura angular	19. Perilla de centrado																											
7. Ajuste de ancho hendidura	20. Pasos 5° a 20°																											
8. Ajuste de altura hendidura	21. Angulo de inclinación																											
9. Ajuste de foco	22. Comando bastidor																											
10. Accesorio cambio objetivo	23. Tornillo fijación horizontal																											
11. Ocular intercambiable	24. Soporte guía horizontal																											
12. Apoya cabeza	25. Cajón de accesorios																											
13. Tubo flexible del LED	26. Base																											