

 Res. No. 16740, 2017-2021. Viglada MinEduación.			GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Ecógrafo		CÓDIGO: NA		
MARCA: General Electric		VERSIÓN: 1		
MODELO: Voluson e6		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022		

USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
 El Voluson™ E6 BT16 es un sistema de exploración en tiempo real profesional, innovador y más versátil en tiempo real. Abre nuevas posibilidades ecográficas con la técnica de exploración 3D/4D VOLUME. La amplia gama de sondas lo hace adecuado para muchas aplicaciones clínicas. ESPECIFICACIONES TECNICAS - Conectar el equipo a un punto de red eléctrica de 120V y que tenga conexión a tierra - Asegúrese de que todos los pacientes reciben una identificación de paciente (ID) única. Si el ID no es única, los datos pueden sobrescribirse o mezclarse. - La calidad de la imagen utilizada para el diagnóstico es fundamental: Cambiar la	 Partes - Pantalla - Puertos USB - Altavoces - Unidad de DVD - Soporte de la sonda - Interfaz de usuario	- Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del sistema. - Conecte el cable de alimentación principal a una fuente de alimentación de grado hospitalario. Receptáculo con el voltaje nominal adecuado. - Encienda el interruptor principal en la parte trasera del sistema. - Para encender el sistema, presione el botón Standby ubicado en la izquierda del panel táctil. - El sistema ahora debería pasar por su proceso de arranque sin intervención adicional del usuario (aproximadamente 2 minutos). - Una vez finalizada la inicialización, se muestra la pantalla del modo 2D predeterminado. se muestra con la sonda seleccionada. - Ingresa los datos del paciente - Asegúrese de que el ID usado sea del paciente para evitar pérdida de datos - Escoja el modo de operación haciendo uso de la interfaz de usuario - Utilice gel conductor sobre la punta de contacto del electrodo a utilizar - Realice el estudio - Guarde la información - Limpie los electrodos



Res. No. 16740, 2017-2021.

Vigilada MinEduación.

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO

EQUIPO: Ecógrafo

CÓDIGO: NA

MARCA: General Electric

VERSIÓN: 1


MODELO: Voluson e6

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

configuración de la pantalla puede afectar la calidad de la imagen y comprometer la calidad diagnóstica. El usuario es responsable de utilizar la configuración de visualización adecuada para lograr calidad de imagen adecuada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Genera pulsos de corriente eléctrica que envía al transductor. Sus cristales son estimulados por los pulsos eléctricos, produciendo ultrasonidos. Los ultrasonidos reflejados, ecos, estimulan nuevamente a los cristales y se convierten en señal eléctrica.

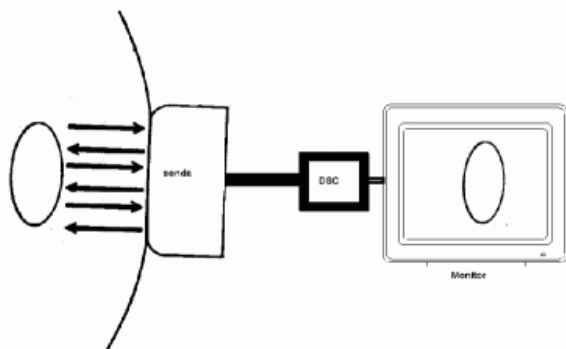

CLASIFICACION DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo moderada

7. Guía del cable de la sonda
8. Estante para los periféricos
9. Tomas de sonda
10. Reposapiés
11. Ruedas
 - a. Delanteras: Giratorias, con bloqueo de giro y de freno
 - b. Traseras: Giratoria y con bloqueo de freno para una rueda trasera
12. Soporte de la sonda
13. Panel táctil

INTERFAZ DE USUARIO



1. Panel táctil
2. Soporte de la sonda
3. Controles del panel táctil
4. Botones de modo
5. Trackball
6. Asa frontal
7. Botones de movimiento y botones de ajuste
8. Teclado alfanumérico

PASOS PARA APAGAR EL EQUIPO

1. Presione el botón Standby en la interfaz de usuario y seleccione apagar en el cuadro de diálogo.
2. Después de que el sistema esté completamente apagado, puede apagar el circuito disyuntor ubicado en el panel posterior de la consola.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Antes de limpiar la consola, apáguela y desconéctela de la red eléctrica de CA.

Asegúrese que las partes eléctricas estén protegidas de líquidos.

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol máximo al 70%.

Los contactos y conectores eléctricos no deben limpiarse.

No utilice alcohol de alta graduación (más del 70 %) para limpiar el sistema.

Si usa un aerosol, aplíquelo en un paño o pañuelo y luego limpie el