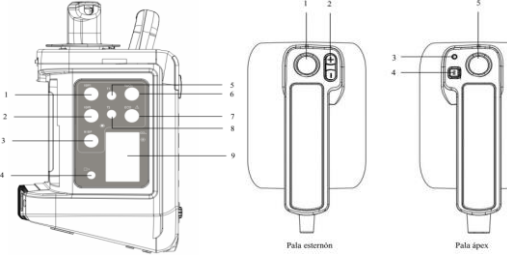


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		FOR-GLO-MAB-012				
			CODIGO:	001	PAGINA	01	DE
FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO
					15	03	2023
Nombre del equipo:	Desfibrilador	Modelo:	Beneheart D6	Riesgo del equipo:	IIB		
Marca:	Mindray			Clasificación del equipo:	Tratamiento de la vida		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO			
							
Dispositivo medico utilizado para el tratamiento y monitorización de la fibrilación ventricular y la taticardia ventricular en pacientes que se encuentran sin pulso o sin ritmo cardiaco.		1. Indicador visual y sonoro de la alarma 2. Indicador de equipo conectado a la red AC 3. Indicador de carga de batería 4. Indicador de falla tecnica del equipo 5. Mando giratorio para seleccionar Modo 6. Botones para seleccionar energia deseada 7. Botón para cargar palas 8. Botón para descargar energia 9. Mando giratorio de navegación 10. Micronfono para modo DEA 11. Altavoz 12. Botón para iniciar/detener NIBP 13. Compuerta para papel 14. Pala externa del equipo 15. Botón para marcar evento 16. Botón para resumen de eventos 17. Botón para seleccionar derivadas 18. Botón para silenciar alarmas 19. Botón para acceder a menu principal		1. Conector para el sensor PI, C1 2. Conector para el sensor P2, C2 3. Conector para PNI 4. Salida de gas del equipo 5. Conector para la sonda de temperatura, C1 6. Conector para el sensor de SP02 7. Conector para el sensor de ECG 8. Conector para la sonda de temperatura, C2 9. Conector para el modulo de CO2 PARTES DE LAS PALAS 1. Botón de descarga 2. Botón para selección de energia 3. Indicador de descarga 4. Botón para carga de energia 5. Botón de descarga del equipo LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Para realizar la limpieza y desinfección del equipo, realice la con el desinfectante aprobado por la institución o en caso de contingencia alcohol al 70%. Recuerde limpiar tanto el equipo como los accesorios de monitorización y las palas del equipo.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Dimensiones: 295 mm (an) × 218 mm (pr) × 279 mm 2. Peso: 6.6 Kg 3. Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C 4. Rango de humedad: 10-95% 5. Pantalla LCD 8" 800 × 600 píxeles 6. Voltaje de funcionamiento: 100-240 V 7. Frecuencia: 50-60 Hz 8. Batería de litio: 14.8 V 9. Funcionamiento solo con batería: 2 Horas 10. Modos: Manual, DEA, marcapasos, cardioversión y monitorización.							
RECOMENDACIONES GENERALES 1. Asegurese de que el equipo permanezca conectado 2. Para el tratamiento de pacientes con marcapasos implantables, coloque los electrodos de desfibrilación o las palas lejos del generador interno del marcapasos 3. Realice el chequeo diario del equipo según protocolo.							
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001			
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			
Nombre del equipo:	Desfibrilador	Modelo:	D6	Riesgo del equipo:	IIB	
Marca:	Mindray			Clasificación del equipo:	Tratamiento de la vida	
PARTES DEL EQUIPO		MODOS DEL EQUIPO		ESTIMULACIÓN NO INVASIVA DEL PACIENTE		
		MODO DEA: 1. Aplique los electrodos de desfibrilación al paciente 2. Enchufe el cable de los electrodos al puerto del equipo 3. Gire el mando de selección a modo DEA 4. Siga las instrucciones de voz y de pantalla 5. Descargue en el paciente en caso de ser necesario 6. En caso de que no se detecte ningún ritmo susceptible de descarga, el equipo mostrará un mensaje "Descarga no recomend". En este caso, poner el equipo en modo monitorización.		MODO A DEMANDA: 1. Gire el mando de selección a modo Marcapasos 2. Seleccione una derivación con una onda R detectable. 3. Verifique que se muestran marcadores de onda R blancos encima de las ondas R. 4. Seleccione la frecuencia del marcapasos. Si es necesario, seleccione la salida del marcapasos inicial. 5. Pulse la tecla de software [Inic estim] para iniciar la estimulación. 6. Ajuste la salida del marcapasos y verifique la presencia de pulso periférico.		
1. Área de información básica del paciente 2. Área de fecha y hora 3. Símbolos de estado de alarma 4. Área de alarmas fisiológicas 5. Área de alarmas técnicas 6. Indicador de estado de la batería				MODO FIJO: 1. Gire el mando de selección de modo Marcap. 2. Mueva el cursor a la tecla de acceso Modo Marcap y seleccione [Modo fijo] 3. Seleccione las derivadas y la frecuencia deseada.		
7. Área de ondas de toma del ECG 8. Área de parametros de medición 9. Área de parametros auxiliares de medición 10. Área de tiempo de funcionamiento continuo 11. Área de indicadores 12. Área de software de recomendaciones 13. Área de información de desfibrilación manual		MODO DESFIBRILACIÓN MANUAL: 1. Enchufe el cable de terapia al puerto del equipo 2. Aplique los electrodos o palas correspondientes 3. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual. 4. Seleccione la energía deseada 5. Cargue el desfibrilador, ya sea del botón del panel o de las palas 6. Descargue la energía en el paciente.		MONITORIZACIÓN GENERAL DEL PACIENTE 1. Gire el mando del Desfibrilador a modo "Monitor" 2. Coloque los cables ECG en el paciente para monitorizar ECG y Resp, y conecte al equipo 3. Coloque el sensor de SP02 para monitorizar SP02 y FP 4. Coloque el brazalet al paciente e identifique la forma de medición de PNI a usar 5. Coloque el sensor de temperatura en caso de ser necesario 6. Inicie la monitorización del paciente 7. Ajuste sensibilidades o alarmas en caso de ser necesario		
PRUEBA DE CHEQUEO DIARIO 1. Pulse el botón del menu principal 2. Seleccione la tecla de la pantalla "Prueba de usuario" 3. Seleccione "Iniciar" 4. Realice la prueba de energía para verificar la función de carga/desactivación de 360 J, realice la prueba de controles y siga los mensajes que aparecen en pantalla 5. Seleccione el botón de "Registrar" para imprimir el registro de los resultados de las pruebas de chequeo.		MODO CADRIOVERSIÓN AVANZADA: 1. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual. 2. Pulse la tecla "Activar sincronización" 3. Seleccione la derivada mas adecuada para la visualización del complejo QRS 4. Verifique los marcadores blancos sobre la onda R 5. Seleccione el nivel de energía si es necesario 6. Descargue la energía en el paciente.		ACCESOS RÁPIDOS DEL EQUIPO 1. En el modo monitor, seleccione "Congelar onda" en caso de ser necesario una visualización específica e imprimirla 2. En el modo Monitor, Desfib. manual o Marcap, pulse el botón [Evento] en el panel frontal para acceder al menú y seleccionar los diferentes tipos de eventos a marcar.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						