


ECÓGRAFO HS 70 A - HS 40



PARTE FRONTAL


1. Monitor
2. Brazo monitor
3. Unidad de DVD
4. Altavoz
5. Panel de control
6. Titular de la sonda
7. Teclado
8. Elevador
9. Puerto USB
10. Puerto de sonda
11. CW puerto de sonda
12. Filtro de aire
13. Freno
14. Ruedas
15. Panel táctil
16. Calentador de gel

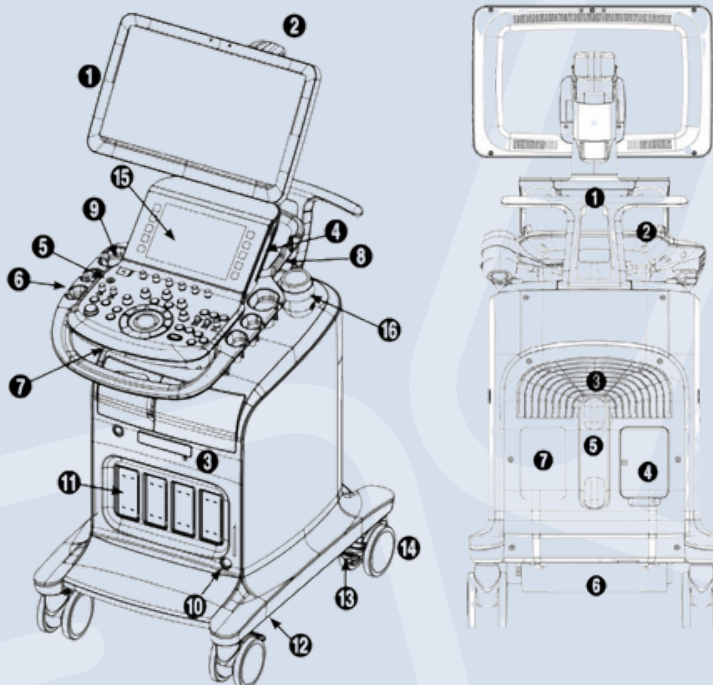

PARTE TRASERA


1. Mango
2. Compartimentos de almacenamiento
3. Ventilación
4. Panel trasero
5. Portacables
6. Pieza de conexión de alimentación
7. Etiqueta de identificación

1 Panel de control

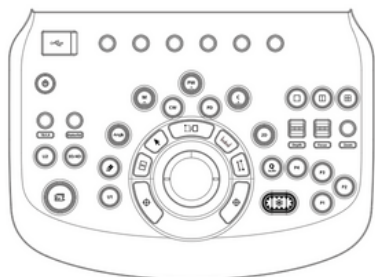

Consta de un teclado, menús programables, botones, diales, botones giratorios, un control deslizante y una bola de seguimiento. El botón giratorio se puede utilizar como dial y como botón.


2 Panel táctil

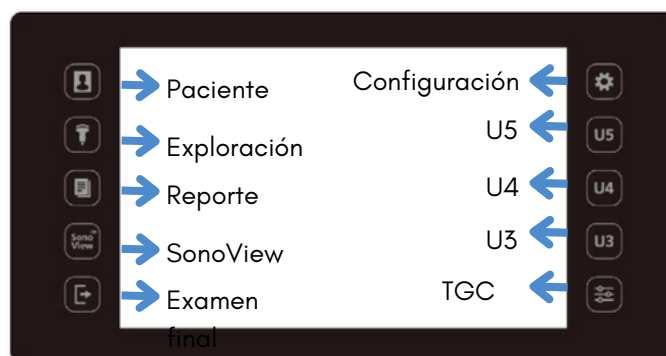

Cuenta con herramientas de control ubicadas a ambos lados de la pantalla.

3 Panel trasero

1. Puerto de activación (entrada/salida): no se utiliza.
2. Puerto de micrófono (entrada): conecta un micrófono.
3. Puerto VHS (salida): envía una imagen compuesta al monitor.
4. Puerto de audio (Salida): Da salida a la señal de audio.
5. Puerto S-VHS (salida): envía una imagen S-VHS al monitor.
6. Puerto DVI (Salida): Salida de señal digital y analógica al monitor.
7. Puerto USB: se utiliza para conectarse a periféricos USB dispositivos.
8. Puerto de red: se utiliza para conectarse a una red.

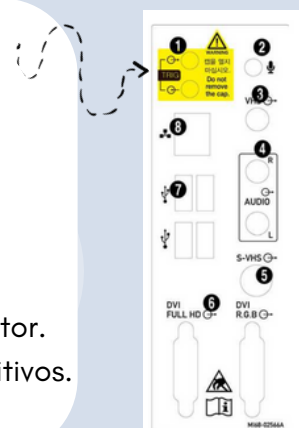

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

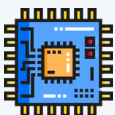

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.



ADVERTENCIA

Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos