

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA " E.S.E	CÓDIGO			
		VERSIÓN		PÁGINA	DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	




ELECTROCARDIÓGRAFO

MARCA: FUKUDA
MODELO: CARDISUNY C120

Recomendaciones antes de usar

- Asegúrese que no falte ningún elemento del equipo ni que estén dañados.
- Asegúrese de que no haya humedad presente en el equipo al momento de utilizarlo.
- Si el equipo se encuentra muy sucio con polvo encima, límpielo antes de usarlo.
- Asegúrese que el equipo este correctamente conectado al tomacorriente de pared.
- Asegúrese de que los puntos donde colocara los electrodos no están cubiertos por cabello o ropa.
- Limpie la superficie de la piel con una gasa seca.
- Posicione los electrodos en el paciente.

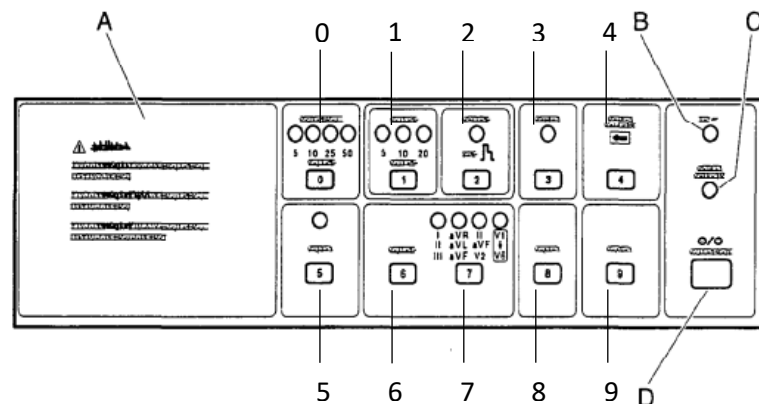


No.	Nombre	No.	Nombre
A	Instrucciones	3	Filter: Enciende y apaga los filtros de ruido y de línea base
B	LED indicador de conexión AC	4	Page Advance: Avanza el papel al inicio de la siguiente pagina
C	LED indicador de batería baja	5	Auto: inicia el registro automático de ECG
D	Botón encendido/espera (ON/STANDBY)	6	Manual: inicia un registro manual de ECG
0	Chart speed, cambia la velocidad del grafico entre 5→10→25→50→5 mm/segundo	7	Cambia el grupo de latiguillos utilizados para generar un ECG manual de la siguiente forma: I II III→aVR aVL aVF→II aVF V2→V1-V6→I II III
1	ECG Size: Cambia la sensibilidad de los electrodos	8	Stop: Para cualquier función del electrocardiógrafo
2	V Leads: Reduce la sensibilidad de los electrodos del pecho al 50% de su valor seteado	9	Copy: Imprime una copia de el ultimo ECG automático

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

Colocación de electrodos:


Coloque los electrodos siguiendo las figuras a continuación:

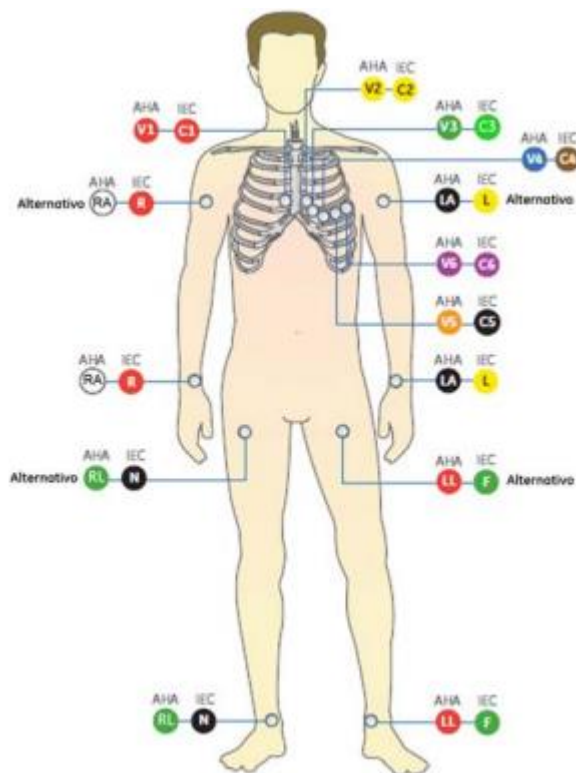

Correcto



Incorrecto

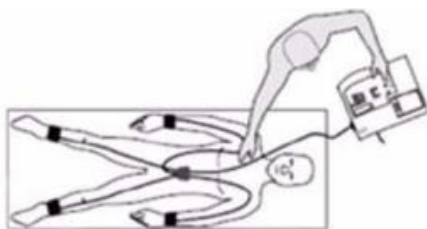

Correcto

Registro automático de ECG:

- Presione la tecla [On/Standby] y espere mientras el electrocardiógrafo lleva a cabo una pequeña secuencia de inicio.
- Prepare al paciente y coloque los electrodos.
- Presione la tecla [Auto] en el panel frontal. La luz encima de la tecla empezara a parpadear mientras el electrocardiógrafo está adquiriendo el ECG. Cuando se ha completado el registro, esta luz se apagará.
- Si la luz encima de la tecla [Auto] se ilumina de forma alternada con la luz sobre la tecla [Manual], quiere decir que se desconectaron los latiguillos.

Registro manual de ECG:

- Presione la tecla [On/Standby] y espere mientras el electrocardiógrafo lleva a cabo una pequeña secuencia de inicio.
- Prepare al paciente y coloque los electrodos.
- Presione [7] hasta que la luz encima del grupo de latiguillos deseados se ilumine.
- Configure la sensibilidad de [Chart Speed], [ECG Size] y [V Leads] según lo necesite.
- Presione la tecla [Manual] en el panel frontal.
- Inspeccione el ECG a medida que se imprime. Si alguna parte se representa con una línea punteada significa que se desconectó algún latiguillo. Presione [Stop] y ajuste los electrodos correspondientes. Después de hacer las correcciones pertinentes, presione [Manual] para reiniciar el registro.


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Electrocardiógrafo	- Desconecte el equipo y asegúrese de que el electrocardiógrafo este en el modo “Standby” (Todas las luces apagadas). - Pase un trapo suave por la superficie del equipo humedecido con jabón suave y agua o alcohol isopropílico. Evite aplicar líquidos limpiadores a él conector del cable.
Electrodos y cables	- Use un trapo suave humedecido en la sustancia limpiadora. - Seque el exceso de humedad de los accesorios.

Cabezal de impresión (solo si ve una disminución en la calidad de la impresión):

- Desde el frente del electrocardiógrafo, abra el compartimento del papel. El cabezal de impresión está a la derecha debajo de la cuchilla de papel y detrás de un cepillo como se muestra en la siguiente figura.
- Limpie el cabezal de impresión con un hisopo de espuma humedecido en alcohol isopropílico al 90%. Frote hasta eliminar todos los residuos visibles.
- Seque el cabezal de impresión con un paño limpio que no suelte pelusa.
- Si necesita limpiar el lente del sensor de papel:
 - Este se encuentra a la derecha debajo del cabezal de impresión.
 - Sacuda ligeramente el polvo del sensor con un hisopo de espuma seco. No use alcohol.

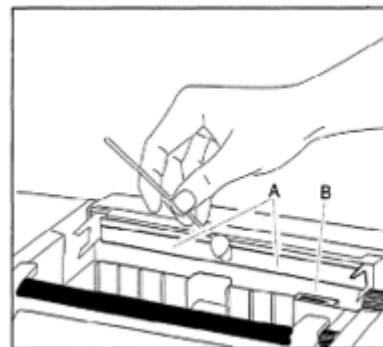

A. Cabezal de impresión.
B. Sensor de papel.

RECOMENDACIONES:

- Limpie y desinfecte las superficies externas al menos una vez al mes.
- Retire los cables y latiguillos del equipo antes de limpiarlos. No tire de los hilos largos de los extremos de los conectores.

ADVERTENCIAS:

- No use ningún solvente fuerte o material abrasivo.
- No derrame ningún líquido sobre la superficie del electrocardiógrafo.
- No limpie el cable del paciente con alcohol.
- No usar autoclave o limpiadores ultrasónicos.
- No sumerja el cable del paciente en ningún líquido.
- No use materiales abrasivos.
- Evite mojar los conectores.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Falla	Posible causa	Solución
Interferencia de la línea de poder AC	Electrodos secos, con polvo o haciendo un mal contacto. Un equipo mal conectado a tierra cerca del paciente. El cable del paciente está muy cerca al cable de alimentación	Coloque nuevamente los electrodos, limpie la piel o use unos nuevos electrodos. Posicione los cables de electrodos lejos de cualquier otro equipo electrónico. Desconecte el electrocardiógrafo y úselo solo con la batería.
Movimiento en la línea base	Movimiento del paciente. Movimiento de los electrodos. Contacto pobre del electrodo con la piel o interferencia respiratoria.	Tranquilice y relaje al paciente. Asegúrese de que los cables no están halando los electrodos. Reposicione los electrodos y Asegúrese de que la luz de “Filtro” este encendida. Aleje los cables de las áreas con mucho movimiento por la respiración.
Temblor o artefacto muscular	Pobre posicionamiento de los electrodos, pobre contacto con la piel o el paciente está demasiado frio o tenso.	Limpie los puntos de los electrodos y posícionelos de nuevo. Asegure de que los electrodos de las articulaciones están en áreas planas sin musculo. Caliente al paciente si es necesario e intente que se relaje.
Forma de onda intermitente o temblorosa	Pobre contacto de los electrodos, electrodos secos o cables defectuosos.	Limpie el sitio, reposicione los electrodos o reemplace el cable defectuoso si es necesario.
Baja calidad de impresión	Cabezal de impresión sucio.	Limpie el cabezal de impresión y asegúrese de estar usando el papel correcto.
El registro no inicia	El electrocardiógrafo no está encendido. El cable del paciente no está conectado. Se acabo el papel	Asegúrese que el equipo este correctamente conectado a la corriente eléctrica y tiene más de un LED encendido. Revise las conexiones de los cables del paciente. Recargue el papel y revise que este correctamente posicionado.