



	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

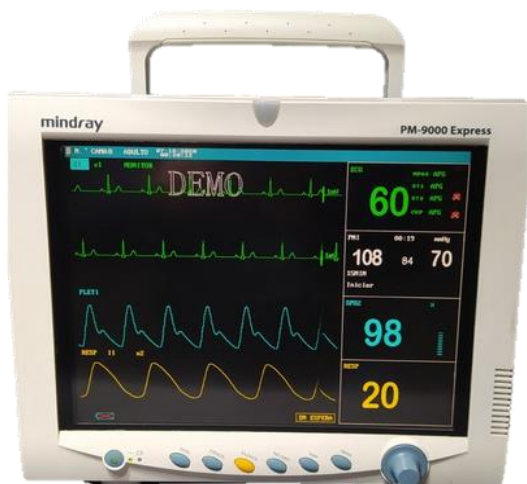

MONITOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: MINDRAY
MODELO: BENEVIEW T5

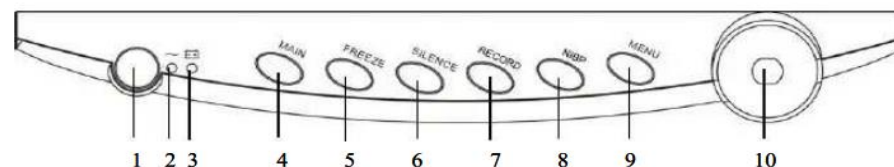


Recomendaciones antes de usar



- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Interruptor de alimentación	6	Pausar o borrar las alarmas y silenciar el monitor
2	Indicador de alimentación de CA	7	Comenzar y detener el registro-
3	Indicador de batería	8	Iniciar o detener la medición de NIBP.
4	Entrar y salir del menú principal	9	Ver el Menú del sistema
5	FREEZE (Congelar y descongelar las ondas)	10	Mando de control.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

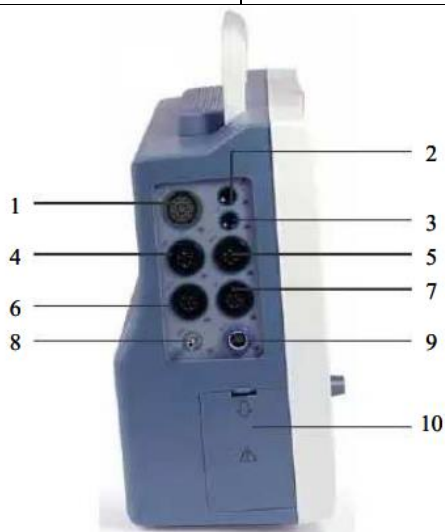

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Conector de sensor CO2	6	Conector de cable de ECG
2	Conector de la sonda de temperatura 1	7	Conector del cable de CO
3	Conector de la sonda de temperatura 2	8	Conector de tubo flexible del manguito de PNI
4	Conector de transductor de PI 1	9	Conector del sensor de SpO2
5	Conector de transductor de PI 2	10	Tapa de la batería

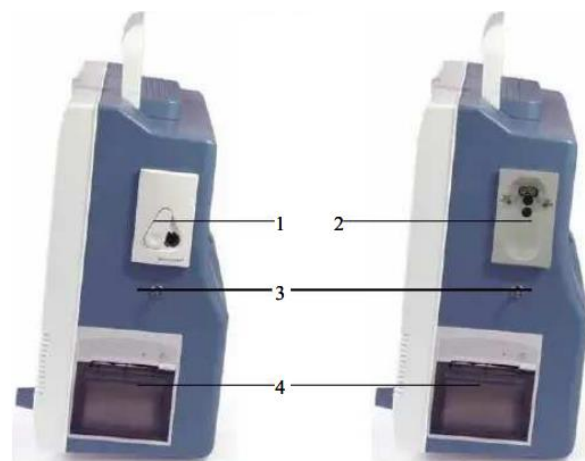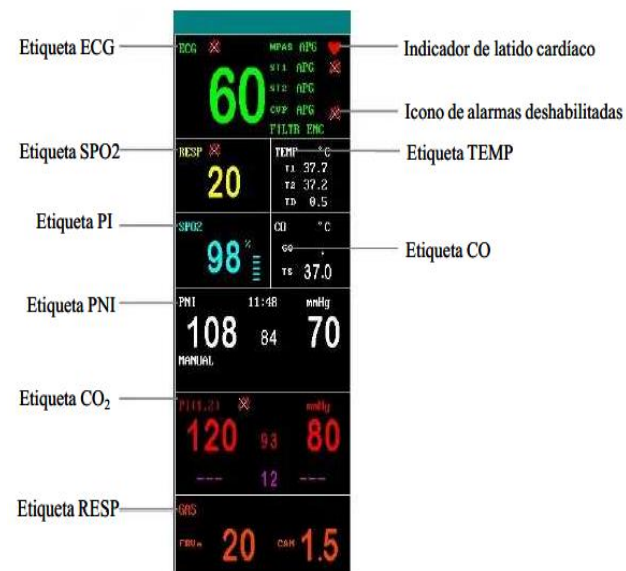

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Conector de sensor CO2	3	Salida de gas
2	Conector de la gotera	4	Registrador

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

Monitorización ECG/RESP:

- En la parte superior de la pantalla estándar aparecen una o dos ondas ECG cuando la opción TIPO DERIV se define como 3 DERIV o 5 DERIV respectivamente en el menú AJUSTAR ECG. Cuando se selecciona 12 DERIV en el menú AJUSTAR ECG, el área de ondas muestra 12 ondas de ECG y una onda de ritmo.
- Prepare la piel del paciente adecuadamente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor esté encendido y preparado para monitorizar.
- Seleccione la etiqueta ECG de las ventanas de parámetros, seleccione TIPO DERIV y configure acorde a la configuración de electrodos usada (3 DERIV, 5 DERIV y 12 DERIV).
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos seleccione AJUSTAR OTROS en el menú anterior y en la opción MARCAPASO seleccione ENC, esto hará que aparezca un símbolo " | " sobre la onda ECG que representa que la señal de marcapaso está siendo detectada, si no lo hace, el sistema contará el pulso del marcapasos como el complejo QRS, cuando monitoree un paciente sin marcapasos, asegúrese de que esta opción esté desactivada.
- Los parámetros relativos a ECG aparecen a la derecha de la onda ECG.
- La respiración se mide al evaluar el cambio de impedancia que se produce entre los electrodos RA y LA de la derivación I de ECG, o entre los electrodos RA y LL de la derivación II de ECG.

Monitorización de SpO2:

- Asegúrese de que el monitor se encuentra encendido.
- Coloque el sensor correspondiente (dactilar o recién nacidos) en el paciente en el sitio adecuado.
- Enchufe el conector del cable de prolongación del sensor en el conector SpO2 del monitor.

Monitorización de PNI (NIBP):

- Compruebe el área de información del paciente que aparece en pantalla, si el tipo de paciente es incorrecto, seleccione el tipo adecuado en el menú PROGR PACIENTE.
- Enchufe el tubo flexible de aire en el conector del manguito de PNI del monitor.
- Coloque el manguito de tamaño adecuado en la parte superior del brazo o de la pierna del paciente. Asegúrese que el indicador de arteria del brazalete coincide con la arteria del paciente.
- Una el manguito al tubo flexible de aire.
- Pulse la tecla NIBP en el panel de control para iniciar la medición de PNI.
- Para detener la medición de PNI pulse nuevamente la tecla NIBP del panel de control.

Monitorización de TEMP:

- Si usa sondas térmicas desechables, conecte el cable de la sonda al conector de sondas térmicas del panel lateral del monitor y la sonda térmica al cable.
- Si utiliza sondas térmicas reutilizables conéctelas directamente al conector.
- Coloque correctamente la sonda térmica al paciente.
- Encienda el monitor

SÍMBOLOS	
	Encendido/apagado
	Estado de la batería
	Corriente alterna

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Limpieza
Monitor	● Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver contaminantes. ● Al terminar limpie el monitor con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último, seque el monitor en un lugar fresco y ventilado.
Cables ECG	● Limpiar el conjunto de cables con un paño humedecido con la solución de limpieza ● Luego, limpiar el conjunto con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último, limpie los cables con un paño seco y deje secar al aire
Manguito de presión arterial no invasiva	● No se recomienda limpiar el manguito en seco, lávelo mejor a mano o a máquina. ● Extraiga la cámara elástica de látex antes de proceder, lave a mano el brazal con la solución de limpieza. ● Luego limpie el brazal con paños nuevos humedecidos con agua de grifo; por último, límpielo con un paño seco y deje el brazal seque por completo.
Sensor de SpO2	● Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza. ● Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón. ● Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo. ● Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.
Sensor de temperatura.	● Limpie la zona de contacto con el paciente con paños suaves humedecidos con la solución de limpieza. ● Retire la solución con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo ● Limpie con un paño seco la humedad residual y deje secar al aire libre

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo	Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta.	Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Descargas eléctricas en el paciente	Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias