

Descripción del Instrumento

Vista frontal



1. Pantalla LCD Táctil
2. Aguja de muestreo
3. Compartimiento de Reactivos
4. Impresora
5. Puerto USB

Vista frontal – puerta abierta



1. Ensamblado del carro
2. Aguja de muestreo
3. Cámara WBC/Hb
4. Cámara RBC/PQT

Vista posterior



1. Etiqueta de identificación
2. Etiqueta de conexiones
3. Conexión cable de poder
4. Conexión diluyente y desechos

Especificaciones Físicas y técnicas

Procesamiento: 60 muestras por hora
 Temperatura: 16°C – 30°C Humedad: Inferior al 85% sin condensación
 Muestra mínima requerida 50 µl
 Volumen de muestra utilizada por el equipo: 10 µl
 Requerimientos Eléctricos: 100 V, 240 V (+/- 10%) 50/60Hz.
 Identificación de alarmas para Leucocitos, eritrocitos y plaquetas.
 Memoria para 1000 resultados.

PARAMETROS

1	LEU	Leucocitos
2	LIN %	Porcentaje de linfocitos
3	LIN #	Número absoluto de linfocitos
4	MON %	Porcentaje de monocitos
5	MON #	Número absoluto de monocitos
6	GRA %	Porcentaje de granulocitos
7	GRA #	Número absoluto de granulocitos
8	ERI	Eritrocitos
9	HB	Hemoglobina
10	HTC	Hematocrito
11	VCM	Volumen corpuscular medio
12	HCM	Hemoglobina corpuscular media
13	CHCM	Concentración de hemoglobina corpuscular media
14	IDE	Indice de distribución Eritocitaria
15	PLA	Plaquetas
16	VPM	Volumen plaquetario medio
17	IDP	Indice de distribución plaquetaria
18	PCT	Plaquetocrito
19-20-21	Histogramas para Leucocitos, Eritrocitos, Plaquetas.	

Métodos y Tecnología

- Impedancia: LEU, ERI y PLA.
- Fotometría: HB, Longitud de Onda 550nm
- Impedancia + Acción específica del Lyse: 3 Diferenciales.
- Calculados: VCM, HCM, CHCM, IDE, PCT, IDP.
- Relación de Dilución: “1/15000 ERI/PLA” – “1/250 LEU – HB”

TABLA DE LINEALIDAD

Parametro	Linealidad
LEU	0-100.103/mm ³
RBC	0-8.106/mm ³
HGB	0-26 gr/dl
HTO	0-80 %
PLQ	0 – 2.2 10 /mm

LEU	0 – 3	103/mm ³
ERI	0 – 02	106/mm ³
HB	0 – 3	g/dl
PLT	0 – 10	103/mm ³

REACTIVOS

- **Minidil:** Solución isotónica tamponada utilizada para el recuento de células sanguíneas y para la medición de hematocrito.
- **Minilyse:** Solución lisante de eritrocitos para el recuento de glóbulos blancos y la determinación de hemoglobina.
- **Miniclean:** Solución enzimática con acción proteolítica para la limpieza de los contadores.

Ciclo de Encendido.

- **Startup:** es el procedimiento que permite sacar el miniclean que el equipo ha dejado desde el día anterior en el sistema y realiza un conteo de fondo.
- Encienda el equipo por el interruptor de encendido en la parte posterior del equipo.
- Ingrese al sistema con usuario y clave facultativo
- Si el ciclo de encendido no inicia automáticamente presione la tecla Status
- Luego presione la tecla Start
- Encienda la impresora
- Espere resultado. (si el recuento es superior a los límites permitidos el equipo hará otro ciclo automáticamente. Si el segundo encendido no está entre los valores esperados, el equipo envía un mensaje de error de encendido.
- Compruebe que los recuentos secundarios no sobrepasan los siguientes límites en cada parámetro

PANTALLA MENU IDENTIFICACION DE MUESTRAS




ICONOS

1. Botón Status (verde)
2. Menú de muestra (carpeta)
3. Control de Calidad (gráfica LJ)
4. Archivo (Cajón)
5. Configuración (Círculos)
6. Ayuda (Interrogación)
7. Teclado
8. Validar
9. Retornar
10. Salir (puerta)

Calibración.

Para calibrar el dispositivo diríjase al menú Control de Calidad.

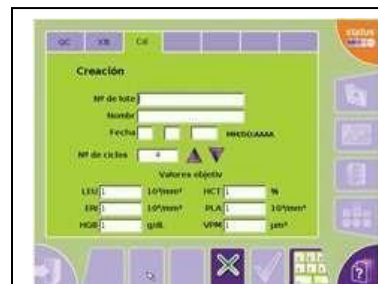

- En el menú de control de calidad seleccione la pestaña "Cal".
- Pulse el botón creación decalibración.

- Ingrese los datos solicitados en la pantalla Creación, los cuales encontrara en el empaque del calibrador.
- Pulse el botón validar (se inicia un ciclo de cebado automático)
- Una vez acabado el ciclo de cebado, aparecerá el siguiente mensaje: **"Puede colocar la muestra e iniciar el análisis 1/X del procedimiento de calibración"** (donde "X" denota el número total de ciclos de calibración).
- Corra el calibrador las veces que se haya configurado
- Al final del ciclo, se mostrará un cuadro de diálogo que presentará los resultados del procesamiento de la muestra de calibración. Pulse el botón **"Aceptar"** para validar los resultados o **"Cancel"** para rechazarlos.

CONTROL DE CALIDAD

- Para programar el control de calidad en el dispositivo dirijase al menú Control de Calidad.



- Escoja el icono de editar control (c),
- Edite los campos informativos del control (a)
- Seleccione una de las pestañas disponibles (b)
- Seleccione una de las poblaciones (LEU, ERI, PLA)
- Ingrese los valores dianas
 - Validar

PROCESAR CONTROL

- Para procesar el control de calidad, seleccione la pantalla datos demuestra

- En el ID muestra ingrese el número de lote del control tal cual lo ingreso al momento de crearlo.
- Valide
- Pase el control y valide.

Si necesita ingresar un Nuevo lote de control porque ya se terminó el que está usando, debe ir al menú control y seleccionar el nivel de control a modificar, eliminarlo desde el botón (e) ya que de otro modo no podrá editar los valores Diana ya registrados.

PROCESAR UNA MUESTRA

- Para procesar una muestra ingrese a la pantalla de procesamiento de muestra
- Ingrese los datos del paciente
- Seleccione validar
- Pase la muestra
- Los resultados se imprimen automáticamente.



ALARMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LOS RESULTADOS

*: Indica que el conteo ha sido realizado tres veces y por consiguiente hay diferencias en los resultados.

\$. Indica que ese parámetro en especial ha sido contado tres veces.

D: Indica que el parámetro excede la linealidad, la muestra requiere dilución. H: Indica que el valor del parámetro es superior al límite de normalidad patológico L: Indica que el valor del parámetro es inferior al límite de normalidad patológico

Alarmas De Plaquetas:

Mientras más bajo sea el valor de la alarma, más elevada será la sensibilidad de aparición de la misma. Los valores medios ajustados en fábrica son:

SCL: Indica la presencia de pequeñas células en las zonas de los 2 y 3 fl, se debe efectuar un nuevo conteo.

SCH: presencia de esquistocitos y agregados plaquetarios.

MIC: Presencia de microcitos.

Alarmas De Leucocitos:

Los valores medios ajustados en fábrica son:

L1: Anomalías relacionadas con linfocitos, puede indicar presencia de agregados plaquetarios o eritroblastos.

M2: Permite detectar linfoblastos, mielocitos, linfocitos atípicos o basofilia.

G1: Indica eosinofilia, mielocitos y polinucleosis neutrófila.

G2: Anomalía en las membranas de los granulocitos o sangre muy vieja, se presenta desviación a la izquierda en el histograma de leucocitos.

G3: Células con tamaño mayor a 400 fl, como metamielocitos.

Alarmas De Hemoglobina:

! : Indica que hay diferencia entre la medida del blanco anterior y la actual, sobrepasa los límites de precisión.

APAGADO



- ✓ Seleccione el botón salir (puerta)
- ✓ En la pantalla de salir seleccione el botón de apagado y aceptar
- ✓ Una vez que el ciclo finalice, apague el instrumento en el interruptor.

El modo de apagado introduce ABX Miniclean en las cámaras para realizar la limpieza enzimática de las proteínas acumuladas en las aberturas y las cámaras de recuento. Este ciclo de apagado es un paso de gran importancia dentro del mantenimiento diario.

Ciclos de Limpieza y cebado



Acceda al icono configuración

Seleccione el ícono de Servicio de Cliente



Elija el que requiera ejecutar.



Para Almacenar los archivos de configuración que aparecen en el Botón Status

A veces es necesario almacenar en la memoria interna del equipo alguno archivos de configuración que por ser temporales generan una saturación de la memoria generando alarma en Status (alarma color Naranja), de no corregirse se torna en un Status Rojo que bloquea la operación del dispositivo.

1. Para realizar, seleccione ícono configuración seguido de la pestaña Ars Co.
2. Seleccione cada uno de los cinco botones de opción siguientes: "Config.", "Analizador", "Regs.", "CC" o "Análisis" para archivar.
3. Pulse el botón "Restablecer" en la ficha "Ars co" si el usuario no desea crear un archivo en ese momento

