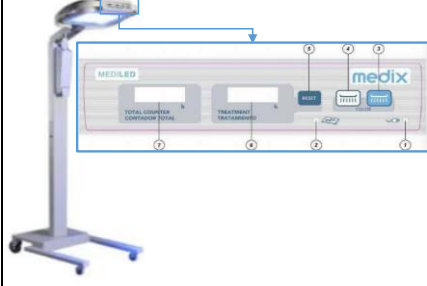


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			
Nombre del equipo:	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	Modelo:	MEDILED	Riesgo del equipo:	Clase II	
Marca:	MEDIX		Clasificación del equipo:	Tratamiento		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Equipo de fototerapia de LEDs, de alta potencia y luz fría, diseñado para el tratamiento de la ictericia neonatal. Combina LEDs azules y blancos, con interruptores separados, que permite verificar el color verdadero de la				- Conectar el equipo a la red enciende el indicador verde (1), indicando que está listo para su uso. - Presionar el botón azul (3) para iniciar la aplicación, activando LEDs azules y blancos. - Los LEDs azules parpadean mientras los contadores registran el tiempo de uso de la lámpara de fototerapia. - Los LEDs blancos se combinan con los azules para reducir posibles efectos secundarios. Si se mantiene prendida la lámpara con LEDs azules y blancos, se obtiene mayor irradiancia que si se usan sólo los LEDs azules. - Para menor intensidad, apagar los LEDs blancos. En caso de utilizar ambos LEDs si se desea apagar la lámpara, presionar el botón azul. Para inspección de piel, usar botón blanco para encender/apagar los LEDs.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Voltaje: 100 - 240 V~ - Frecuencia: 50 - 60Hz - Potencia: 90VA - Equipo no adecuado para usarse en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico. - Altura regulable: 113 cm (min) - 155 cm (max) - Peso: 20Kg - Área efectiva de iluminación: 40x21 cm (a 40 cm) - Índice de intensidad: <0.4 ($Intensidad_{min} / Intensidad_{max}$).		- Indicador standby: Se enciende una vez que el equipo se encuentra conectado a la red de alimentación y listo para ser usado. - Indicador de fallas: Para detectar que falla accionó el indicador, observe la cantidad de veces que titila dicho indicador. - Botón de encendido y apagado de los LEDs azules y blancos. - Botón de encendido y apagado de los LEDs blancos. - Botón de reset del contador de tratamiento. - Contador de tratamiento. - Contador total.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
				ALARMAS En el panel de comando, hay un indicador amarillo (2) que se enciende en caso de una falla. Parpadea cada 10 segundos indicando el tipo de falla: - Tecla defectuosa. - Sensor de temperatura defectuoso. - Ventilador izquierdo defectuoso. - Ventilador derecho defectuoso. - Ambos ventiladores defectuosos. - Ambos ventiladores y sensor de temperatura defectuosos. - Temperatura interna fuera de rango (5-60 °C). - Transistores de potencia defectuosos. En las últimas tres condiciones, se emite una alarma		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						