


GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO			
	EQUIPO: Electrocardiografo		CÓDIGO: NA
	MARCA: Mindray		VERSIÓN: 1
	MODELO: r3		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

USO DEL EQUIPO

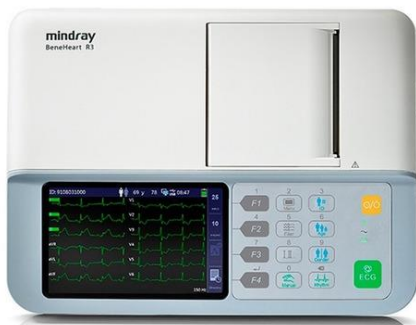


es un electrocardiógrafo portátil y ligero para el diagnóstico mediante el ECG de reposo y utiliza el algoritmo de Glasgow, líder mundial en la interpretación de los algoritmos de ECG de reposo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Conectar el equipo a un punto de red eléctrica de 120V y que tenga conexión a tierra, de no ser así preferiblemente úselo con batería.


- No toque a los pacientes durante la desfibrilación. Podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

PARTES DEL EQUIPO

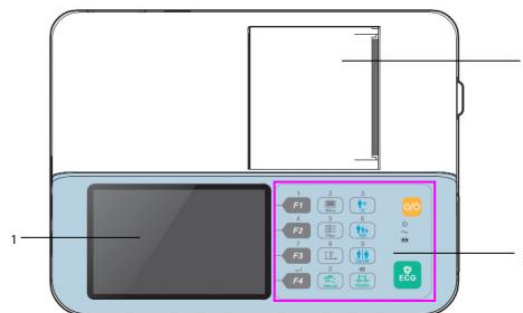

Partes

1. Pantalla de visualización: muestra ondas y texto.
2. Registrador: imprime informes.
3. Panel de control

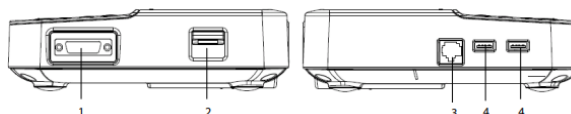

Partes

1. Conector del cable del paciente
2. Seguro de la puerta del registrador
3. Conector de red
4. Conector USB



PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Asegúrese que el equipo se encuentre conectado
2. Asegúrese de que haya papel térmico para imprimir de no ser así cargue un rollo
3. Enchufe el cable del paciente al conector situado en el lado derecho del equipo. Asegúrese de que la flecha del conector del cable está hacia arriba.
4. Apriete los tornillos para sujetar con firmeza el cable del paciente al equipo.
5. Pulse el interruptor de encendido y apagado.
6. Explique al paciente el procedimiento. Explíquelo que cuanto más coopere mejor será el registro de diagnóstico obtenido.
7. Tumbé al paciente en una cama con los brazos descansando a los lados y las piernas extendidas sin que estén en contacto.
8. Destape el tórax y los lugares donde se vayan a colocar los electrodos en las extremidades.
9. Afeite el vello de las zonas donde vayan colocados los electrodos.
10. Limpie la grasa de estas zonas y frote la superficie cutánea con una gasa seca para eliminar las células muertas.
11. Seque la piel por completo.

   Res. No. 16740, 2017-2021. Vigilada MinEduación.		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Electrocardiografo		CÓDIGO: NA	
MARCA: Mindray		VERSIÓN: 1	
MODELO: r3		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022	

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Su funcionamiento consiste en el registro de la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos que son puestos en las extremidades superiores e inferiores del paciente. El resultado de dicho análisis es un documento que registra los datos llamados electrocardiograma (ECG).

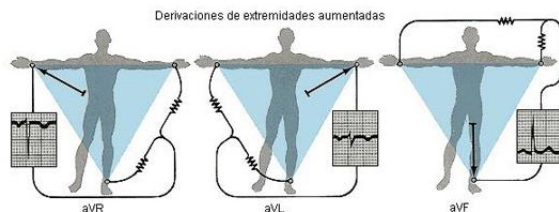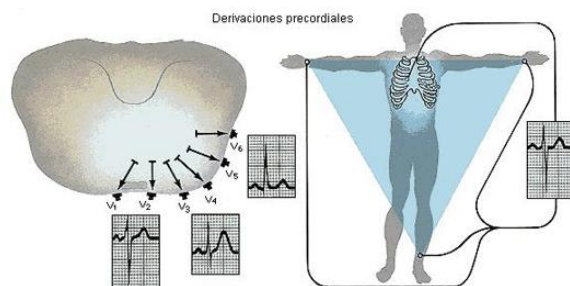

MENSAJES DEL EQUIPO

Mensaje	Causa
Memoria de datos no disponible*	La memoria de datos no está disponible o no se puede detectar.
Error memoria de datos*	No se puede leer o escribir en la memoria de datos.
Error reloj TR*	No se puede leer el registro del reloj de tiempo real.
Error batería *	Se detecta un fallo mientras la batería se carga.
Deriv. extrem. desc.	1. Se ha desconectado la derivación RL o se han desconectado varias derivaciones de extremidades. 2. El cable del paciente está desconectado del paciente.
Deriv. XX desc. (XX hace referencia a LA/L, LL/F, V1-V6/C1-C6)	La derivación indicada está desconectada.

CLASIFICACION DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo moderado

- Ubique los electrodos en sus respectivas posiciones
- Introduzca la información del paciente presionando la tecla ID
- Pulse las teclas [ECG], [Manual] o [Rhythm] para iniciar la adquisición y el registro del ECG.
- Imprima otra copia del informe de medición automática o del informe de medición de ritmo más recientes, según sea necesario
- Confirme que ha finalizado la medición y el registro del paciente.
- Desconecte los electrodos del paciente.
- A continuación, mantenga pulsado el interruptor de encendido y apagado durante aproximadamente 0,5 segundos para apagar el equipo.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Asegúrese que el equipo este apagado

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.