

	GUÍA RAPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: BLT	VERSIÓN: 1
	MODELO: M7000	FECHA DE ELABORACIÓN: 1/09/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo que detecta, procesa y muestra los parámetros fisiológicos de un paciente conectado a éste, en este caso. Este monitor multiparametros entrega señal de ECG de 5 derivaciones, Respiración, Sensor de Spo2, temperatura y NIBP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener conectado el equipo a la red eléctrica
- Verificar que cada botón tenga encendido los indicadores
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo

PARTES DEL EQUIPO

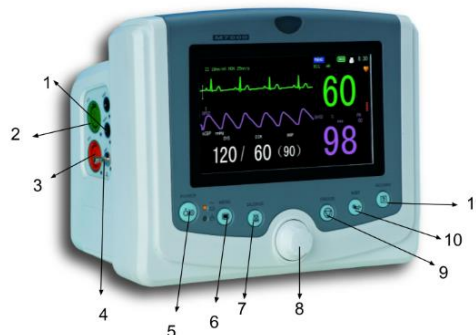

1. Conexión para accesorio de temperatura
2. Conexión para accesorio de ECG
3. Conexión para accesorio de SP02
4. Conexión para manguera de NIBP
5. Botón de Encendido/Apagado
6. Botón para configurar el menú
7. Botón para silenciar alarmas
8. Perilla para configuraciones del monitor
9. Botón para congelar la imagen
10. Botón para NIBP
11. Botón para imprimir



CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación IIB de alto riesgo.


MODOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR



MODO ECG:

1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello.
2. Ubique los electrodos en el paciente.
3. Conecte el cable paciente a los electrodos y al monitor
4. Encienda el monitor y verifique la correcta monitorización.
5. Si es necesario, modifique desde el monitor la derivación del ECG, ya sea: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-. Seleccione:

[Menú] [Parámetros de ECG] [Otros] y seleccione la derivada correspondiente y aceptar configuración.

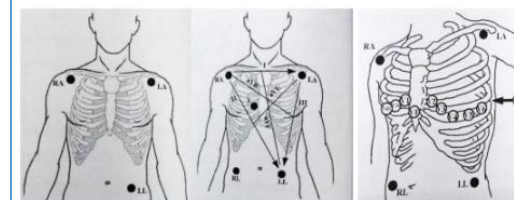

3 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior izquierdo

5 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior izquierdo
RL: Abdomen inferior derecho

Electrodo V

El electrodo V puede posicionarse en cualquiera de las partes mostradas en la figura de arriba.

	GUÍA RAPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: BLT	VERSIÓN: 1
	MODELO: M7000	FECHA DE ELABORACIÓN: 1/09/2022

 MODO SP02: 1. Seleccione el sensor de oximetría adecuado para la entrada del monitor 2. Ubique el sensor en el dedo del paciente 3. Conecte el accesorio al monitor y verifique la correcta monitorización del paciente  MODO TEMPERATURA: 1. El monitor viene con un accesorio en forma de moneda de acero inoxidable el cual se coloca sobre la superficie del cuerpo. 2. El monitor cuenta con una entrada de temperatura, conectar debidamente el cable al monitor. 3. Ubicar el sensor firmemente en el cuerpo del paciente. 4. Revisar desde el menú la configuración de las alarmas sobre temperatura para adaptarlas al paciente. 5. En tal caso de que la temperatura se encuentre en grados F° desde el menú se puede modificar la unidad de medida.  MODO NIBP: El monitor cuenta con diferentes modos para la toma de presión, con el modo manual y con el modo automático de seguimiento:	MODO MANUAL: 1. Encendemos el monitor. 2. Conectamos la válvula de aire con el manguito de presión arterial 3. Confirmamos que el brazalete se encuentra completamente desinflado y conectamos al monitor 4. Presionamos el botón de NIBP y esperamos que inicie la toma de medida. MODO AUTOMÁTICO: Se configura directamente desde el menú, y lo iniciamos cuando necesitamos señales de monitoreo continuo, este puede configurar para que tome medidas de presión cada cierto tiempo establecido y estas tomas se guardan en el historial del monitor. 1 2 NIBP 17:18 Manual 6 3 120/80 (93) 4 5 1. Hora de medida 2. Modo medida 3. Límites de alarma 4. Presión sistólica/Presión diastólica 5. Presión promedio 6. Unidad de medida  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table><tr><td>El monitor no enciende</td><td>Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor</td></tr><tr><td>Uno o varios de los botones del monitor no sirven</td><td>Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico</td></tr><tr><td>La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos</td><td>Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.</td></tr><tr><td>La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos</td><td>Verifique que el LED del sensor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.</td></tr></table>	El monitor no enciende 	Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor	Uno o varios de los botones del monitor no sirven 	Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico	La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.	La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique que el LED del sensor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.
El monitor no enciende 	Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor									
Uno o varios de los botones del monitor no sirven 	Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico									
La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.									
La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique que el LED del sensor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.									