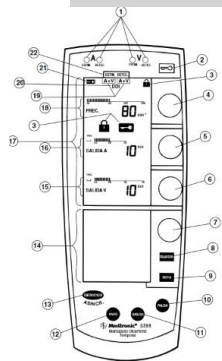


	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MARCAPASOS EXTERNO	CÓDIGO: NA
	MARCA: MEDTRONIC	VERSIÓN: 1
	MODELO: 5388	FECHA DE ELABORACIÓN: 11/04/2023

USO DEL EQUIPO   Equipo biomédico encargado de estimular el corazón a través de una vía externa transcutánea o percutánea. Está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos que se aplican y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  - Batería alcalina de 9 V - Funcionamiento en un rango normal de 17º a 33ºC - Vida útil de la batería entre 9 y 17 días - Modo de estimulación por demanda y asincrónico. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIB de alto riesgo.	PARTES DEL EQUIPO  1. Led de estimulación 2. Tecla de bloqueo del equipo 3. Indicador de bloqueo 4. Perilla de frecuencia 5. Perilla de salida auricular 6. Perilla de salida ventricular 7. Botón de menú 8. Botón para parámetros 9. Botón de menú 10. Botón para pausa 11. Botón para marcha 12. Botón para parar 13. Botón de estimulación asincrónica 14. Pantalla inferior 15. Gráficos de salida ventricular 16. Graficas de salida auricular 17. Pantalla superior 18. Gráfico frecuencia 19. Indicador configuración 20. Indicador de modo operación 21. Indicador de batería 22. Etiqueta configuración.	MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO MODO ASINCRÓNICO:  1. Pulse el botón para estimulación asincrónica 2. Verifique o en tal caso ajuste el valor de la frecuencia en 80 min 3. Ajuste los valores de salida A y V en 20 mA 4. Ajuste los valores de estimulación asincrónica auricular y ventricular MODO A DEMANDA Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO: 1. Pulse el botón para marcha 2. Active los indicadores de la salida A y salida V 3. Ajuste los valores de salida A y V 4. Ajuste los valores de estimulación a demanda auricular y ventricular 5. Verifique los valores nominales de encendido de: Frecuencia, Salida A-V, Sensibilidad A-V y Frecuencia máxima, en caso de ser necesario, ajuste los valores de parámetros. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.
--	---	---