



VALLEYLAB™ FT10 SERIES ENERGY PLATFORM GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

PARTE DELANTERA

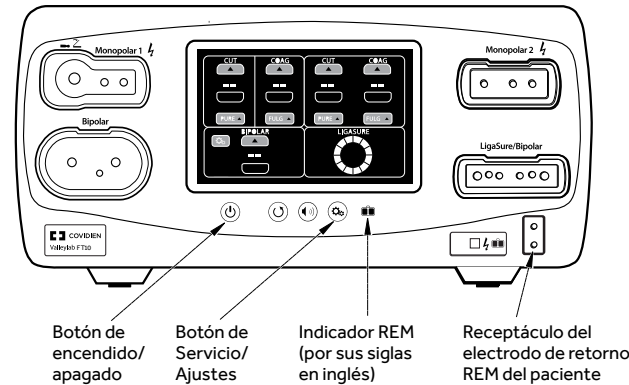

ATRÁS

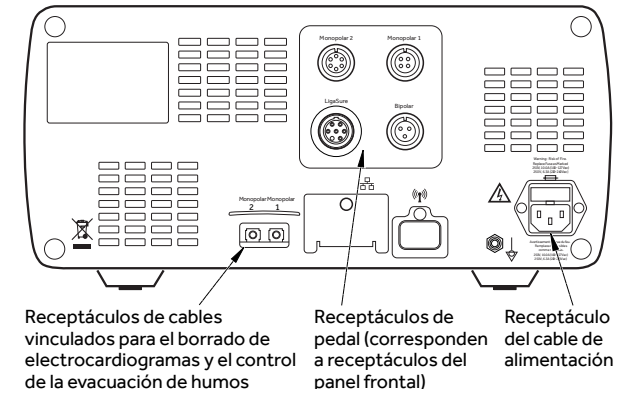

VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL



Negro y gris – El sistema está encendido y no hay ningún instrumento adjunto. Los ajustes pueden predeterminarse antes de adjuntar un instrumento y configurarse para los próximos procedimientos.



Color en los controles – Color añadido a cada cuadrante cuando se introduce el instrumento. Se ha introducido la selección de modo y salida.

CONFIGURACIÓN MONOPOLAR



Error REM PAD – Adjunte el electrodo de retorno necesario de un paciente con REM (control del electrodo de retorno) al generador y al paciente. El error se ha eliminado.



Modos CUT (corte) y COAG (coagulación) – Seleccione los menús emergentes al final del cuadrante para ver/seleccionar las opciones del modo. Las opciones CUT son PURE (puro) o BLEND (mezcla); las opciones COAG son SOFT (suave), FULGURATE (fulguración) y SPRAY (espray).



CUT y COAG – Los dos modos monopoles disponibles. Seleccione las flechas arriba o abajo para aumentar o disminuir los ajustes de potencia.



Ajuste de potencia CUT puro – Aumentado a 10 W usando la flecha arriba.

CONFIGURACIÓN BIPOLAR




Potencia BIPOLAR – Seleccione las flechas arriba o abajo para aumentar o disminuir los ajustes de potencia.



Opciones LOW (baja), MEDIUM (media) y HIGH (alta) – Seleccione los menús emergentes al final del cuadrante para ver/seleccionar las opciones de modo. El usuario ha establecido BIPOLAR ALTO a 45 W.

RANGOS BIPOLARES

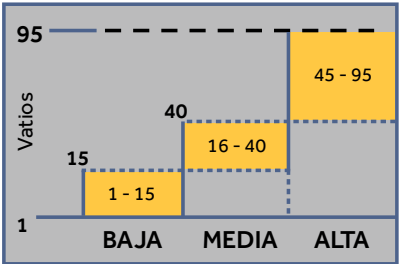

Modo Etiqueta	Campo de potencia-ajuste	Instrumentación optimizada
LOW (baja)	1 - 15 vatios	- Instrumentos de superficie pequeña - Pinzas micro punta (0,4 - 2,2 mm)
MEDIUM (media)	16 - 40 vatios	- Instrumentos de superficie mediana - Pinzas micro punta (1,0 - 2,2 mm) - Pinzas de pala pequeña - Tijeras bipolares
HIGH (alta)	45 - 95 vatios (incremento 5 W)	- Instrumentos de superficie grande - Pinzas de pala amplia



Ajuste de potencia predeterminado – Esta pantalla indica que el modo BIPOLAR HIGH se ha seleccionado. Cuando se aumenta el nivel del modo de potencia, la potencia cambia por defecto al nivel de ajuste más bajo. Cuando se disminuye el modo de potencia (de HIGH a LOW), la potencia cambia por defecto al nivel de ajuste máximo.

IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones

© 2017 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. ™ Las marcas de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa Medtronic. 17-weu-ft10-quick-reference-guide-es-2003262




AUTO BIPOLAR – La energía bipolar se suministra cuando el electrodo entra en contacto con el tejido y se interrumpe cuando el contacto finaliza. Seleccione el icono del engranaje para ajustar las opciones AUTO BIPOLAR.



Encienda AUTO BIPOLAR – Seleccione SÍ en el interruptor AUTO ENCENDIDO/APAGADO para permitir el suministro de energía AUTO BIPOLAR.



Tiempo de retraso – Ajuste el tiempo de retraso entre el contacto con el tejido y la activación de energía. Use las flechas arriba y abajo para seleccionar el tiempo de retraso.

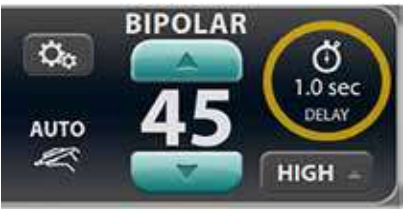

Configuración – El tiempo de retraso autobipolar se indica en el lado derecho de la pantalla Bipolar.

AJUSTE LIGASURE™



Ningún dispositivo LigaSure™ adjunto – Una rueda gris LigaSure™ indica que un dispositivo no está enchufado.



Dispositivo adjunto LigaSure™ – Cuando un dispositivo se conecta a la plataforma de energía y se reconoce, la rueda cambia su color a morado. La activación se indica con un tono constante y la rueda gira en el sentido de las agujas del reloj. Dos tonos indican que se ha sellado completamente.