

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CENTRO CARDIOVASCULAR	 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES UAM	 Instituto Acreditado DE ALTA CALIDAD	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
			MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
			MODELO: ULTRAVIEW SL	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo que detecta, procesa y muestra los parámetros fisiológicos de un paciente conectado a éste, en este caso. Este monitor multiparámetros entrega señal de ECG de 5 y 3 derivaciones, Respiración, Sensor de Spo2, 2 Canales de temperatura, 2 Canales NIBP, 2 Canales de IBP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Mantener conectado el equipo a la red eléctrica
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Tener en cuenta los canales que estén activados para evitar confusiones en la temperatura y presión.

PARTES DEL EQUIPO

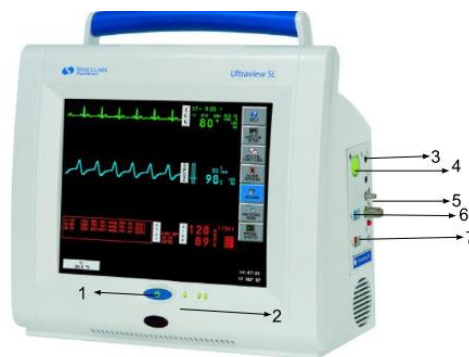

1. Botón de encendido/ apagado
2. Indicador de conexión a corriente eléctrica, e indicador de estado de batería
3. Conexión para accesorio de Temperatura 1 y Temperatura 2
4. Conexión para accesorio de ECG
5. Conexión para accesorio de NIBP
6. Conexión para accesorio de SP02
7. Conexión para accesorio de IBP

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de Alto riesgo.


MODOS DEL MONITOR

MODO ECG:



1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello.
2. Ubique los electrodos en el paciente.
3. Conecte el cable paciente a los electrodos y al monitor
4. Encienda el monitor y verifique la correcta monitorización.
5. Si es necesario, modifique desde el monitor la derivación del ECG:

[Menú] [Parámetros de ECG] [Otros] y seleccione la derivada correspondiente y aceptar configuración.

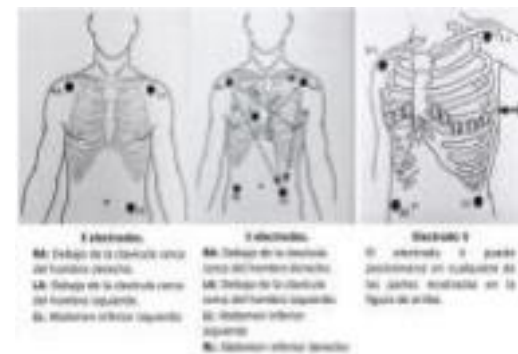

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
	MODELO: ULTRAVIEW SL	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

MODO SP02:



1. Seleccione el sensor de oximetría adecuado para la entrada del monitor
2. Ubique el sensor en el dedo del paciente
3. Conecte el accesorio al monitor y verifique la correcta monitorización del paciente.

MODO TEMPERATURA:



1. El monitor viene con un accesorio en forma de moneda de acero inoxidable el cual se coloca sobre la superficie del cuerpo.
2. El monitor cuenta con dos entradas de temperatura, conectar debidamente el cable al monitor en la entrada deseada y configurar las entradas desde el menú del monitor.
3. Ubicar el sensor firmemente en el cuerpo del paciente.
4. Revisar desde el menú la configuración de las alarmas sobre temperatura para adaptarlas al paciente.
5. En tal caso de que la temperatura se encuentre en grados F° desde el menú se puede modificar la unidad de medida.

MODO NIBP:



El monitor cuenta con diferentes modos para la toma de presión, con el modo manual, con el modo automático de seguimiento, y modo IBP:

MODO MANUAL:

1. Encendemos el monitor.
2. Conectamos la válvula de aire con el manguito de presión arterial
3. Confirmamos que el brazalete se encuentra completamente desinflado y conectamos al monitor
4. Presionamos el botón de NIBP y esperamos que inicie la toma de medida.

MODO AUTOMÁTICO: Se configura directamente desde el menú, y lo iniciamos cuando necesitamos señales de monitoreo continuo, este puede configurar para que tome medidas de presión cada cierto tiempo establecido y esta toma se guardan en el historial del monitor.



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Hora de medida | 5. Presión promedio |
| 2. Modo medida | 6. Unidad de medida |
| 3. Límites de alarma | |
| 4. Presión sistólica/Presión diastólica | |

MODO IBP:



1. Seleccionar en el monitor la opción de IBP
2. Preparar el envase con el transductor para la debida conexión.
3. Montar adecuadamente el transductor aplicando suero fisiológico y retirando debidamente el aire del sistema
4. Después de realizar la punción de la línea arterial, conectar al paciente con el cable de IBP suministrado.
5. Poner en cero el sistema de la línea arterial
6. Ajustar en cero el sistema accediendo por el menú
7. Verificar la curva inicial de monitoreo

CÓDIGO DE COLORES DE ALARMAS

	Alarma fisiológica detectada de peligro de alto nivel, revisar conexión de accesorios o signos vitales del paciente.
	Alarma técnica de alto nivel, revisar baterías y posibles fallas de monitorización.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación IIB de Alto riesgo.



	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
	MODELO: ULTRAVIEW SL	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

PASOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR 1. Verifique que el monitor esté conectado a la red eléctrica. 2. Encienda el monitor. 3. Realice la conexión de los accesorios a utilizar para el monitoreo. 4. Decida que variables quiere monitorear. 5. Chequee que el cable paciente y sensores son correctos, y verifique si el monitor inicia a monitorizar correctamente. ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO  1. Si el monitor presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento. 2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan. 3. Si sospecha que el monitor no funciona correctamente, no lo utilice para ningún tipo de procedimiento o monitorización de un paciente. 4. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una fuente de alimentación con toma tierra de protección.	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table><tr><td>El monitor no enciende </td><td>Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor.</td></tr><tr><td>Uno o varios de los botones del monitor no sirven </td><td>Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico.</td></tr><tr><td>La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos</td><td>Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.</td></tr><tr><td>La toma del IBP no me entrega ningún valor ni se ve la gráfica en el monitor </td><td>Intentar cambiar cable del IBP y ajustar a cero nuevamente, en caso de no funcionar. Comuníquese con mantenimiento.</td></tr><tr><td>La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos </td><td>Verifique que el LED del señor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.</td></tr></table>	El monitor no enciende 	Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor.	Uno o varios de los botones del monitor no sirven 	Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico.	La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos	Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.	La toma del IBP no me entrega ningún valor ni se ve la gráfica en el monitor 	Intentar cambiar cable del IBP y ajustar a cero nuevamente, en caso de no funcionar. Comuníquese con mantenimiento.	La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique que el LED del señor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.	MODULO DEMO En el modo de demostración, el monitor puede demostrar sus funciones principales cuando el paciente o el paciente simulador no están conectados. El modo Demo está protegido por contraseña. Para ingresar al modo de demostración:  1. Seleccione [Menú principal][Mantenimiento >>]. 2. Seleccione [Demostración >>]. Ingrese la contraseña requerida y luego seleccione [Ok]. Para salir del modo de demostración, seleccione [Menú principal][Mantenimiento >>][Salir de demostración]. MODULO ESPERA En el modo de espera, puede detener temporalmente la monitorización del paciente sin apagar el monitor. Para ingresar al modo de espera, seleccione la tecla rápida.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.
El monitor no enciende 	Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor.											
Uno o varios de los botones del monitor no sirven 	Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico.											
La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos	Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.											
La toma del IBP no me entrega ningún valor ni se ve la gráfica en el monitor 	Intentar cambiar cable del IBP y ajustar a cero nuevamente, en caso de no funcionar. Comuníquese con mantenimiento.											
La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos 	Verifique que el LED del señor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.											