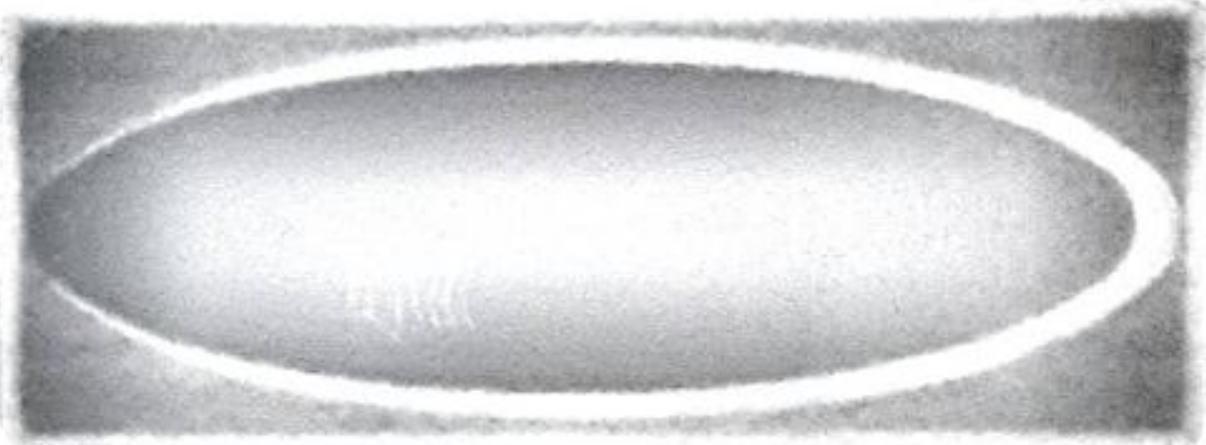


Ref. Guía Rápida de Utilización Agitador de Plaquetas Helmer i.Series PF48i

1. Presione el botón de encendido (ON/OFF) que está ubicado en la parte frontal de la máquina.	
2. Presione el botón de encendido de la alarma ubicado también en la parte frontal de la máquina.	
3. Visualmente detecte que la maquina inicia el proceso de agitación lateral.	4. Asegúrese que las bandejas entran y salen de la máquina, sin ningún obstáculo.
5. Ubique las bolsas de plaquetas, teniendo en cuenta la adecuada distribución de la misma, que no se presente inestabilidad durante el movimiento	6. Para apagar el equipo presione el botón de apagado (ON/OFF). Para apagar la alarma haga el mismo procedimiento con el botón de apagado de la alarma.
7. Verifique durante la jornada de trabajo la adecuada oscilación del equipo.	