


Lampara cielitica L6

Guía Rápida:

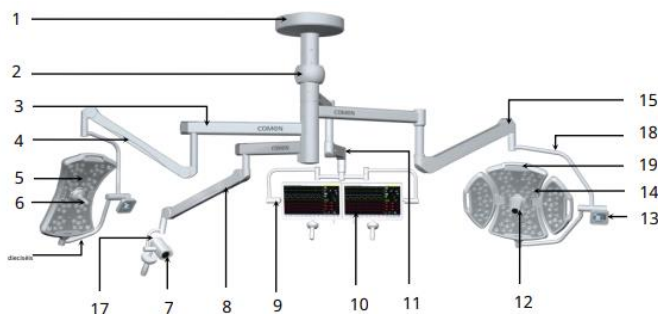

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Guardapolvo	11	Brazo de resorte espacial
2	Cubierta del cubo	12	Cámara de control central
3	Componente de brazo cruzado	13	Panel de control de pantalla táctil
4	Brazo de resorte AC2000	14	Panel de luz madre
5	Panel de luz hijo	15	Brazo de resorte AC3000
6	Mango estéril	16	Codo ligero hijo
7	Cámara externa	17	Codo de cámara
8	Brazo de resorte AC2000	18	Codo de luz madre
9	Soporte de pantalla	19	resolver
10	Pantalla dual		

Panel de control

Como se Muestra en la figura, la lámpara quirúrgica LED solo está equipada con una pantalla táctil:



1. Configuración de parámetros ópticos: Iluminación, tamaño del punto y temperatura de color. Consulte el contenido de la Sección 3.2 en el "Capítulo 3 Instrucciones de funcionamiento básico" para obtener más información sobre este menú.

2. Configuración de la cámara: Escalado de imágenes, congelación de imágenes y rotación de imágenes. Consulte el contenido de la Sección 3.3 en el "Capítulo 3 Instrucciones de funcionamiento básico" para obtener detalles de este menú.

3. Configuración del sistema: Información del producto, configuración predeterminada y silencio. Consulte el contenido de la Sección 3.4 en el "Capítulo 3 Instrucciones de funcionamiento básico" para obtener más información sobre este menú.

4. Botón virtual: Bloqueo de pantalla, modo endoscópico, interruptor de sensor de sombra e interruptor de espera. Consulte el contenido de la Sección 3.5 en el "Capítulo 3 Instrucciones de funcionamiento básico" para obtener más información sobre este menú.

Uso básico

Arranque de equipos

1. Abra el interruptor de alimentación de la pared, el sistema se enciende y luego ingresa a la interfaz LOGO de nuestra empresa.
2. El sistema que carga los datos tarda unos 2 segundos.
3. Ingrese a la pantalla de inicio y el usuario puede operar en este momento.

Configuración de parámetros ópticos

Seleccione la "Configuración de parámetros ópticos" en la interfaz. El icono "Se ilumina a" "Se ilumina a" "Se ilumina a".

1. Iluminación central Ajustamiento: "Se ilumina a" "Se ilumina a" "Se ilumina a" el sistema proporciona Ajuste de brillo de nivel 1 ~ 5. "Se ilumina a" "Representa la primera marcha. La primera marcha representa el nivel 1. Haga clic en el icono de la izquierda "Se ilumina a" Y la iluminación se reduce. El color acromático indica que la iluminación de este engranaje no ha sido seleccionada, y el nivel 1 es el nivel mínimo.

2. Temperatura de color2 Ajustamiento: "K-" "el sistema proporciona nivel Ajuste 1 ~ 5. El primer engranaje representa el nivel 1. Haga clic en el icono de la izquierda "K-", y la la temperatura de color se reduce. Haga clic en el icono de la derecha "aumenta. K-", Y la temperatura de color

3. Tamaño del punto Ajuste: la selección del icono "Representa pequeña mancha redonda, haga clic en el icono para cambiar a "Representa una gran mancha redonda; la visualización del icono "Representa un punto elíptico horizontal; haga clic en el icono y muestra el icono "Representa un Xpunto elíptico vertical. L6 tiene una gran mancha redonda, una un pequeño punto redondo, un punto elíptico horizontal y un punto elíptico vertical se pueden ajustar en cuatro grados.

