


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	




DESFIBRILADOR

MARCA: SCHILLER
MODELO: DEFIGARD 5000

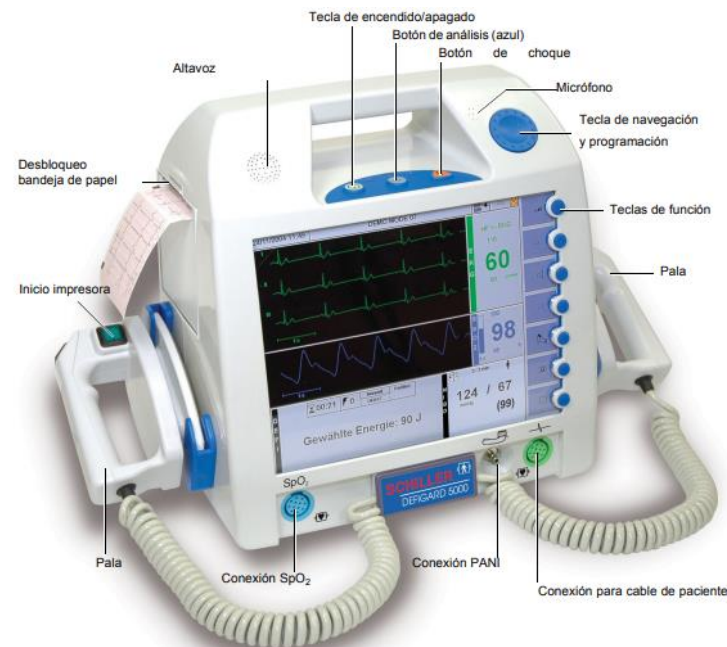


Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el equipo muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.
- El equipo lleva a cabo una autoverificación cuando se enciende, esta autoverificación detecta si el equipo tiene algún fallo y lo reporta con un mensaje de error.

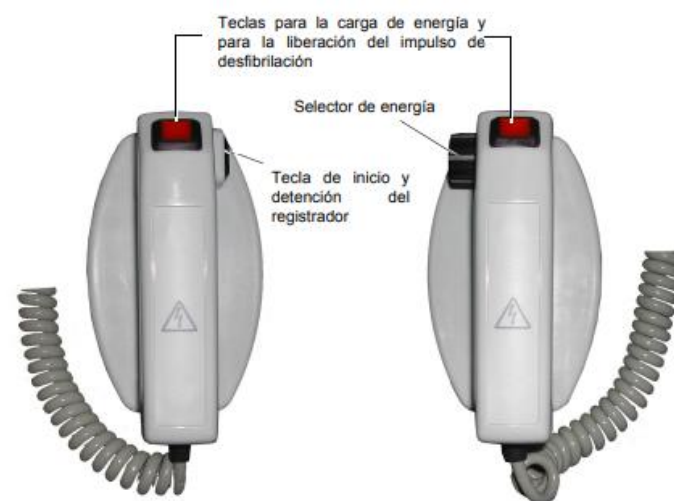

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

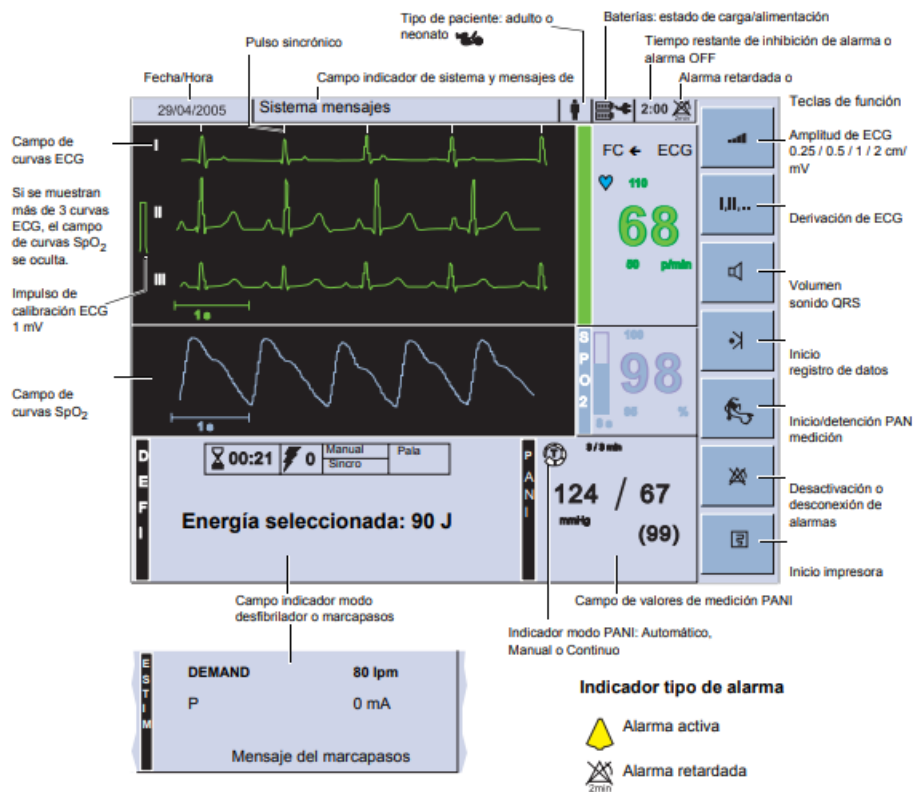


INFORMACIÓN

- La señal ECG se puede obtener a través de los electrodos de desfibrilación o a través de sus respectivos electrodos.
- En el menú ECG seleccione la fuente de la señal de acuerdo con lo que este usando para detectarlo.
- Conecte los electrodos respectivos sobre la piel del paciente. Podrá observar la señal ECG en los canales 1 y 2 del monitor.

Desfibrilación:

- Extraiga las palas y colóquelas sobre el paciente como se indica en la imagen.
- Determine la energía necesaria e inicie el proceso de carga oprimiendo una de las teclas rojas de las palas.
- Cuando aparezca el mensaje “DESFIBRILACION LISTO” presione firmemente contra el tórax y oprima simultáneamente las dos teclas con las palas.
- De ser necesario, repita la desfibrilación.

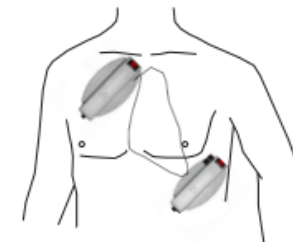

Nota: Si necesita usar el modo **Sincronizado** seleccione el indicador “Desfi” y posteriormente oprima la tecla “Sinc”.

Para el **modo DESA** (Semi automático), siga las instrucciones en pantalla, oprima la tecla  y descargue cuando se indique.

Modo marcapasos.

- Posicione los electrodos de marcapasos.
- Seleccione indicador “Desfi” con el botón de navegación y oprima la tecla de función “Estim” para visualizar la función de marcapasos.
- Con la tecla “Modo” seleccione la opción deseada: Fix o Demand.
- Ajuste la frecuencia de los impulsos y con la tecla “Corriente” active y ajuste la intensidad del impulso.

SÍMBOLOS



	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Carcasa	● Limpie la superficie del aparato con un paño humedecido en solución limpiadora o desinfectante. ● Elimine todos los electrodos desechables. Evite que el líquido penetre en el aparato.
Palas	● Frote las palas y su conexión con una gasa impregnada de agua jabonosa o solución desinfectante. ● Seque las palas, asegúrese de que estén secas antes de su reutilización.
Cable ECG	● Limpie la superficie del cable con un paño suave rociado con agua o agua con jabón neutro ● Friegue el cable con un paño suave rociado con desinfectante. ● Quite el desinfectante remante con un paño suave rociado con agua. ● Coloque el cable en un lugar refrigerado y a la sombra para que se airee.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor/desfibrilador y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.
- Inspeccione el monitor/desfibrilador y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Quemaduras	Aumento de la resistencia por electrodos en mal estado o sin gel	Asegúrese de seguir el proceso establecido, reporte el evento ocurrido con el paciente para su tratamiento.
Inadecuado suministro de la descarga al paciente.	Mal estado o deterioro del equipo y sus componentes.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Selección inadecuada de la energía necesaria.	Asegúrese de seguir el proceso establecido para la selección de energía, rectifique los valores de energía y repita la descarga si es necesario.
El equipo no está listo para su uso al momento requerido	Mal manejo del equipo y proceso, desconexión del fluido eléctrico y fallas en la batería o deterioro del equipo.	Asegúrese de seguir los procesos establecidos para el uso y mantenimiento del equipo. Ubique el desfibrilador de remplazo más cercano para aplicarlo en el paciente.
No se puede suministrar el choque	La batería está muy baja, hay un fallo en electrodos, modificación del ritmo cardiaco o una avería en el equipo.	Reemplace la batería, coloque nuevamente los electrodos, realice un nuevo análisis o reemplace el aparato por el más cercano.