

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				18	09	2024

Nombre del equipo:	Bicicleta	Modelo:	CR800	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SPIRIT			Clasificación del equipo:	REHABILITACIÓN

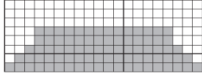
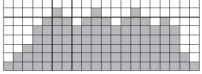
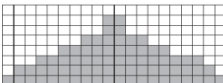
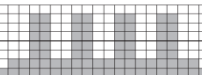
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	ENCENDIDO RAPIDO
 La bicicleta semi-reclinada CR800 tiene un diseño escalonado y el asiento de fácil ajuste facilitan que los pacientes se suban a la bicicleta y encuentren rápidamente la posición de asiento más cómoda. La consola intuitiva ofrece múltiples opciones de programas y hasta 40 niveles de resistencia para mantener a sus clientes interesados y	 - Ventilador - Pantalla LED BLUE MATRIX - Programas: Interval, custom, fit test, hr, watts - Programas: Manual, hill, fat burn, cardio, strenght - Tecla display - Porcentaje de frecuencia cardiaca - Interruptor ventilador ON/OFF - Teclas de control: START-STOP - Compartimiento para accesorios (Celular, llaves). - Teclas de control: UP, ENTER, DOWN - Ventana de mensajes de 20 caracteres.	Las máquinas elípticas comerciales tienen un generador integrado para su alimentación eléctrica y no necesitan ser conectadas a una toma de corriente alterna. Para encender la elíptica, simplemente comience a pedalear, la consola se encenderá automáticamente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Largo (cm):144 Ancho (cm): 75 Alto (cm): 128 Peso neto (kg): 65 Sistema de Resistencia: Inducción Peso Volante Inercia (kg): 13,6 Pedales: Amortiguados Asiento: Posición y respaldo regulables de 12 posiciones Fuente de Poder: Autogenerado Medición Pulso en Manillas: Sí Medición Pulso inalámbrico: Sí, incluye correa pectoral con transmisor de pulso Ventilador: 1 Pantalla: LED de 3 ventanas Interactivo: Selección Programa, personalización edad, peso, tiempo y nivel	 - Manijas - Consola - Manijas con sensor - Rueda de inercia - Soporte - Espaldar	INICIO RAPIDO Esta es la forma más rápida de iniciar un entrenamiento. Después de que se enciende la consola sólo pulse la tecla de inicio (ENTER) para comenzar. Esto iniciará el modo de inicio rápido. En Inicio rápido el tiempo comienza a contar desde cero, todos los datos de entrenamiento se comenzarán a acumular y la carga de trabajo se puede ajustar manualmente presionando los botones arriba y abajo (UP – DOWN). PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA -Cada uno de los programas se puede personalizar con la información personal y cambiar para adaptarse a las necesidades de cada persona. Parte de la información solicitada es necesaria para asegurar una lectura correcta. -Se le pedirá la edad y peso. -Al ingresar la edad asegura que el gráfico de barras de frecuencia cardíaca muestre el número correcto. -La edad es necesaria durante el programa de control del ritmo cardíaco, para asegurar los ajustes correctos respecto a la edad ingresada. De lo contrario el trabajo podría ser demasiado alto o bajo para la persona, la introducción del peso ayuda en el cálculo de una lectura más correcta de calorías.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				17	09	2024

Nombre del equipo:	Bicicleta	Modelo:	CR800	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SPIRIT		Clasificación del equipo:		REHABILITACIÓN

PROGRAMA MANUAL El Programa MANUAL funciona de forma manual. Esto significa que puede controlar la carga de trabajo por sí mismo y no el equipo. 1. Presione MANUAL y luego ENTER. 2. Introduzca su edad usando las teclas arriba/abajo y presione ENTER. 3. Ingrese su peso ajustando el número y presione ENTER. 4. Ajuste el tiempo y presione ENTER. 5. Para comenzar el entrenamiento, presione START; puede modificar la configuración con ENTER. Use STOP para retroceder. 6. El programa inicia en nivel Uno. Para aumentar la carga, presione UP; para disminuir, DOWN. 7. Durante el programa, consulte la VENTANA y cambie perfiles con la tecla DISPLAY. 8. Al finalizar, presione START para repetir, STOP/RESET para salir, o guarde su programa personalizado con CUSTOM.	PROGRAMA FAT BURN Maximiza la quema de grasa, un nivel de esfuerzo menor pero continuo es lo mejor, a juicio de los expertos. 	PROGRAMA FIT TEST El examen de aptitud evaluará su nivel de condición física y dará una puntuación al final de la prueba.
	PROGRAMA CARDIO Este programa presenta una progresión rápida hasta máximo nivel de resistencia. Cuenta con ligeras fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo para que su ritmo cardíaco se eleve y se recupere varias veces antes de comenzar un rápido enfriamiento. 	PROGRAMA HEART RATE (HR) Para determinar el rango de beneficio en el cual usted desea entrenar, debe primero determinar su pulso máximo: $PULSO MÁXIMO (MHR) = 220 - edad$ dable Mucha gente mantiene sus pulsaciones en el rango del beneficio deseado.
PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS La elíptica tiene programas diferentes que han sido diseñados para una variedad de objetivos de entrenamiento.	PROGRAMA STRENGTH Está diseñado para aumentar su fortaleza muscular de la parte inferior de su cuerpo. 	PROGRAMA WATTS Proporciona un modo de potencia constante que ajusta automáticamente el nivel de resistencia en los pedales cada vez que cambie la velocidad a la que pueda seguir trabajando a un nivel de potencia constante.
PROGRAMA HILL Este programa utiliza una progresión en forma de triángulo, comenzando en aproximadamente el 10% del máximo esfuerzo. Aumenta gradualmente hasta alcanzar el máximo esfuerzo durante el 10% del tiempo total de entrenamiento, y luego disminuye nuevamente de forma gradual hasta el 10% del máximo esfuerzo. 	PROGRAMA INTERVAL Es un ejercicio que lo someterá a un alto nivel de 	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN El proceso de limpieza y desinfección se debe de realizar con el producto institucional aprobado. En caso, de no contar con la disponibilidad del producto realizar la desinfección con alcohol al 70% con paños no esteriles.
	PROGRAMA CUSTOM El programa ajustable permite crear y guardar un programa personalizado. Usted puede construir su propio programa y registrar su nombre.	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES Si se escucha un sonido, chasquido o sensación áspera, es muy probable que sea por una de las tres razones siguientes: 1.El hardware no estaba suficientemente apretado durante el montaje. 2.La acumulación de suciedad en los rieles traseros y ruedas de poliuretano son también una fuente de ruido. 3. Falta lubricación en los rieles. NOTA: Si persisten los sonidos o ruidos, compruebe que la unidad está correctamente nivelada.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. **Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. **Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
3. **Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
4. **Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. **Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. **Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. **Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.