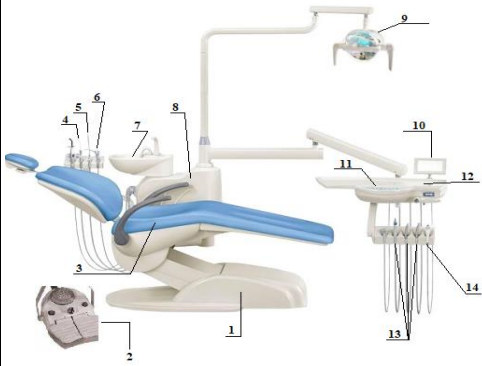
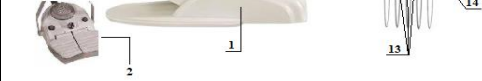


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				15	03	2023
Nombre del equipo:	UNIDAD ODONTOLÓGICA	Modelo:	TS6830		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	MEDIX		Clasificación del equipo:		Diagnóstico y tratamiento	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Equipo compuesto por un conjunto completo de dispositivos dentales relacionados y componentes mecánicos. Empleado en el proceso de diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o				- Asegúrese de conectar el suministro de agua, aire y electricidad. - Configure la posición del asiento del paciente utilizando la placa del teclado. - Suministre agua para el lavado de boca. - Enjuague la escupidera. - Presione la tecla "BLOW" para secar el tubo de la pieza de mano. - Utilice el pedal izquierdo (W) para activar el suministro de agua de la pieza de mano. - Use el pedal derecho (A) para activar la fuente de aire de la pieza de mano. - Ajuste el flujo de aire y agua de la pieza de mano, por medio del pedal y perilla en el sistema de control. - siguiendo las instrucciones proporcionadas. - Controle el visor de películas, encendiendo o apagando la luz según sea necesario, a través de las teclas en la bandeja del instrumento Nota: Utilice el agua caliente a temperatura		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
- Voltaje (Vcd) : 220 - 240 V. - Frecuencia (Hz): 50 Hz. - Rango de temperatura de operación: 16 - 24°C. - Rango de humedad relativa de operación: 40 - 60 HR. - Presión de agua: 3 Bar - presión de aire: 5,5 Bar - El piso en el que se fijará la unidad dental debe ser horizontal y plano; el ángulo de desviación del cuerpo después de instalar y fijar la unidad dental no puede ser superior a 0,5 °. - Carga máxima (paciente): 135 Kg. - Carga máxima del reposacabezas: 30 kg. - Potencia: 900W		- Caja base (tipo incorporado) - interruptor de pie - Sillón de paciente dental. - Triple pistola de agua caliente. - Bomba de saliva fuerte - Bomba de saliva débil - Dispositivo de suministro de lavado de boca - caja lateral - Lámpara de boca - visor de cine - Sistema de control. - Bandeja de instrumentos - pieza de mano dental - Triple pistola de agua fría		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
				ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
				- No limpie la unidad odontológica con material abrasivo. - En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la unidad odontológica con otro trapo seco. - No vierta líquidos directamente sobre el equipo. - Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						