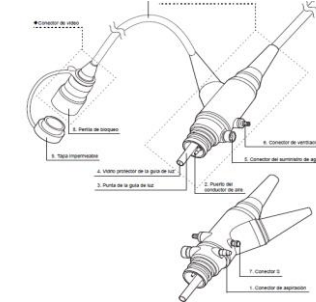
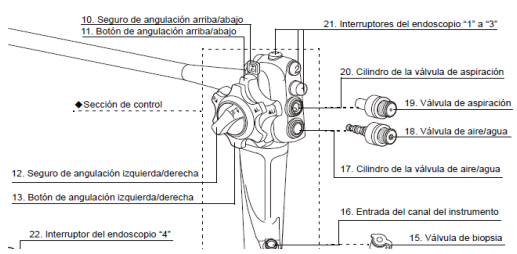
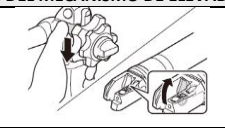
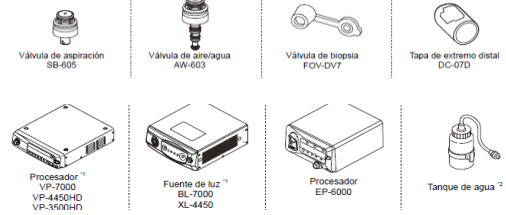
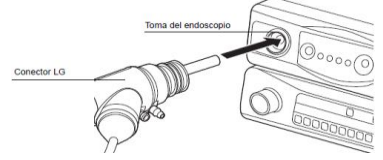
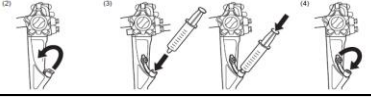


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 15 MES 03 AÑO 2023	
Nombre del equipo:	Videoduodenoscopia	Modelo:	ED-580XT	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	FUJIFILM			Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO	
 Dispositivo médico de diagnostico destinado a la observación y el tratamiento del esófago, el estómago y el duodeno en centros sanitarios bajo el control de un médico.					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		1. Conector del aspirador 2. Puerto del conducto de aire 3. Punta de la guía de luz 4. Vidrio protector de la guía de luz 5. Conexión para el suministro de agua 6. Conexión para ventilación 7. Conexión auxiliar S 8. Perilla de bloqueo 9. Tapa impermeable		10. Seguro de angulación arriba/ abajo 11. Botón de angulación arriba/ abajo 12. Seguro de angulación izquierda/ derecha 13. Botón de angulación izquierda/ derecha 14. Palanca del elevador de válvula de biopsia 15. Válvula de biopsia 16. Entrada del canal del instrumento 17. Conexión de válvula de aire/ agua 18. Válvula de aire/ agua 19. Válvula de aspiración 20. Conexión de válvula de aspiración 21. Interruptor de endoscopia de 1 a 3 22. Interruptor de endoscopio Nº4	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		PRECAUCIONES GENERALES		INSPECCIÓN DEL MECANISMO DE ELEVADOR DE BIOPSIA	
1. Lavado preliminar del colonoscopio con jabon enzimático. 2. Desmontaje del endoscopio de la unidad. 3. Realizar el procedimiento de desinfección /o esterilización. 4. Realizar la pre limpieza del equipo. 5. Realizar las pruebas de fuga correspondientes. 6. Realizar limpieza mecanica del equipo. 7. Realizar desinfección de alto nivel del equipo. 8. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.		1. Asegurese de que no se adhiera la humedad o sustancias extrañas al conector del endoscopio con la fuente de luz. 2. Asegúrese de comprobar la válvula de biopsia antes de usarla 3. Si hay pérdida de agua en la válvula de biopsia o la válvula de aspiración durante la inspección de la función de aspiración, sustitúyala por una nueva que ya se haya reprocesado.		 Nota: Baje la palanca del elevador de válvula para levantar el elevador.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012		
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO
15					03	2023	

Nombre del equipo:	Videoduodenoscopia	Modelo:	ED-580XT	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	FUJIFILM			Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO

PARTES DEL EXTREMO DISTAL DEL ENDOSCOPIO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
		1. Realice la inspección del extremo distal, realizando pruebas de funcionamiento y verificación de la punta: Revisando que no presente rasguños, grietas ni anomalías.	10. Encienda el carro, el procesador, la fuente de luz y el monitor.
		2. Gire los seguros de angulación para realizar diferentes pruebas de funcionamiento.	11. Realice pruebas básicas para visualizar que la imagen se este entregando de manera correcta en el monitor.
		3. Realice la inspección del mecanismo del elevador de válvula de biopsia y coloque la válvula	12. Coloque al paciente de forma adecuada siguiendo los protocolos de la institución.
1. Sección de imágenes		4. Coloque la válvula de aspiración en la conexión del equipo, alinee las dos crestas metálicas de la válvula de aspiración con los dos orificios de conexión y empuje la válvula con firmeza.	13. Dirija el extremo distal del endoscopio hacia el lugar de la biopsia y realice el procedimiento requerido.
2. Boquilla de aire/ agua		5. Conecte la válvula de aire/agua en la conexión del equipo y empuje la válvula con firmeza.	14. Realice las tomas necesarias para el estudio.
3. Salida del canal del instrumento		6. Cubra el extremo distal con la tapa hasta que la ranura de instalación del extremo distal quede totalmente oculto.	15. Endurezca la parte curva del endoscopio hasta que quede casi recta accionando las perillas de control de Angulo.
4. Lente objetivo		7. Inserte el conector LG del endoscopio en la toma de la fuente de luz del endoscopio con la etiqueta. donde el nombre de modelo este orientado hacia arriba	16. Extraiga lentamente el equipo, después de terminar el estudio.
5. Guía de luz			INYECCIÓN DE LÍQUIDOS EN LA ENTRADA DEL CANAL DEL INSTRUMENTO
6. Elevador de válvula de biopsia			1. Llene una jeringa con agua o líquido.
PASOS A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR EL VIDEODUODENOSCOPIO			2. Abra la tapa de la válvula de biopsia
1. Prepare los equipos y accesorios del mismo.			3. Conecte la jeringa en posición recta a la válvula de biopsia e
			4. Retire la jeringa de la válvula de biopsia y cierre la tapa de esta válvula
ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO			
1. Válvula de irrigación aire/agua AW-603		8. Alinee el índice del conector de video y el de la toma del conector del sistema del procesador	EXTRACCIÓN SEGURA DEL EQUIPO
2. Válvula de succión SB-605		9. Coloque el tanque de agua en la posición especificada.	1. Antes de la extracción, pulse la válvula de aspiración a fin de aspirar y sacar el aire insuflado
3. Válvula de tapón de canal de trabajo GS1-128			2. Levante la palanca del elevador de válvula de biopsia
4. Adpatador CAP punta distal			3. accione los seguros de angulación arriba/abajo e izquierda/derecha hasta el tope.
5. Kit de lavado			4. Retire lentamente el endoscopio sin dejar de visualizar el proceso.
6. Válvula de lavado de seguridad			
7. Cepillos cortos y largos de limpieza			

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.