


GUIA RAPIDA EQUIPO DE ORGANOS

Identificación de partes:

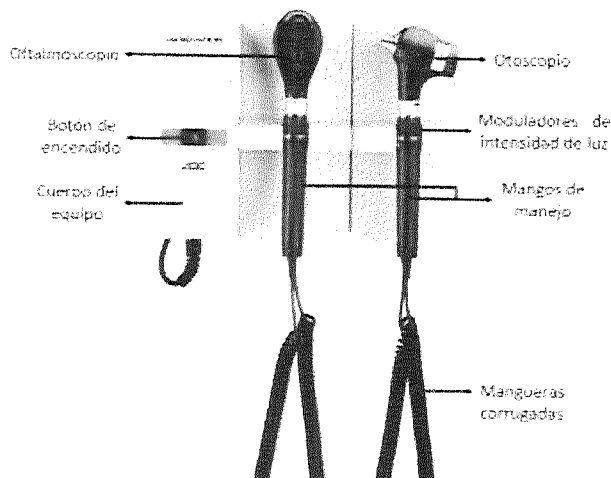

1. Modo de uso:

- Garantice que el equipo se encuentra conectado a la toma de energía de la pared
- Proceda con el encendido del equipo obturando el botón de encendido o botón principal
- Garantice que los cabezales del otoscopio y oftalmoscopio se encuentren bien asegurados antes de proceder con su uso
- Levante el oftalmoscopio u otoscopio de acuerdo a su necesidad
- Garantice que los cabezales se enciendan al retirar el mango del soporte principal
- Luego de realizar el diagnostico coloque el mango del equipo nuevamente en la base verificando que este se apague de forma automática

2. Advertencias y recomendaciones

- Procure no golpear el equipo, especialmente los mangos y cabezales del otoscopio y el oftalmoscopio
- En caso de falla, comunicarse con personal de servicio técnico de inmediato
- Limpiar los equipos después de cada uso
- Verificar que el equipo se mantenga apagado luego de la jornada, para evitar deterioro o daño del mismo.

3. Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

- Asegúrese de hacer uso correcto y dispuesto de los diferentes accesorios del equipo
- Garantice la correcta colocación de los mangos en el soporte principal y de los cabezales del otoscopio y oftalmoscopio

Limpieza y Desinfección

- Limpie con un detergente suave y una solución de agua (solución 1: 9). Enjuague.
- Limpie con alcohol isopropílico al 70% o con la solución utilizada por la institución garantizando que no sea corrosiva
- Realice limpieza de los lentes con un paño seco y suave para evitar rayaduras