


4. PRESENTACIÓN

4.1 Panel para vista frontal

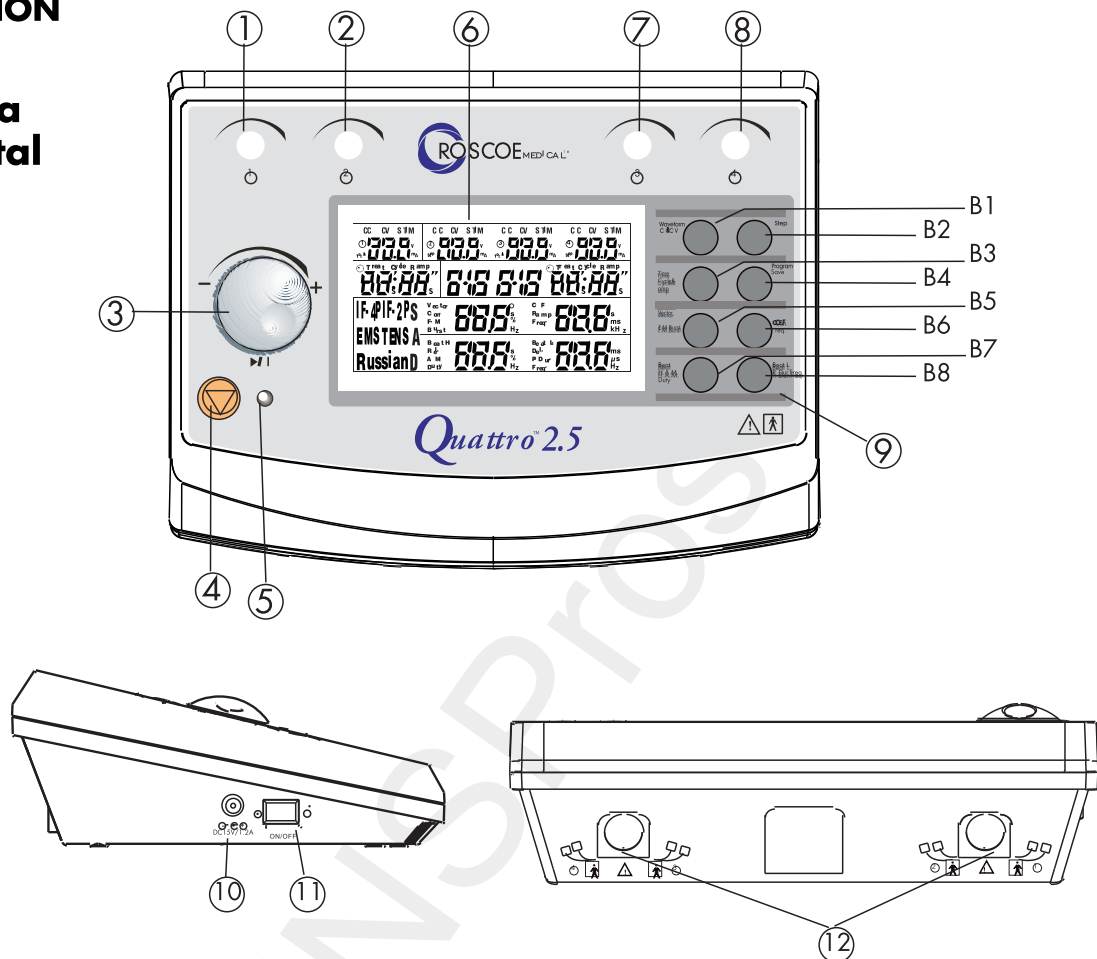

- 1) Botón Canal:
 - Pulse para ingresar los parámetros de tratamiento para el canal 1 y 2.
 - Durante el tratamiento, pulse para mostrar los parámetros del tratamiento para el canal 1 y 2.
 - Gire para ajustar la intensidad de salida del canal 1.
- 2) Botón Canal:
 - Pulse para ingresar los parámetros de tratamiento para el canal 1 y 2.
 - Durante el tratamiento, pulse para mostrar los parámetros de tratamiento para el canal 1 y 2.
 - Gire para ajustar la intensidad de salida del canal 2.
- 3) Perilla de control de parámetros y botón Pausa.
- 4) Botón Detener tratamiento: Pulse para detener el tratamiento de los canales actuales.
- 5) Luz indicadora de encendido
- 6) Pantalla LCD: Muestra la información actual del dispositivo.
- 7) Botón Canal:
 - Pulse para ingresar los parámetros de tratamiento para el canal 3 y 4.
 - Durante el tratamiento, pulse para mostrar los parámetros de tratamiento para el canal 3 y 4.
 - Gire para ajustar la intensidad de salida del canal 3.

8) Botón Canal:

- Pulse para ingresar los parámetros de tratamiento para el canal 3 y 4.
- Durante el tratamiento, pulse para mostrar los parámetros de tratamiento para el canal 3 y 4.
- Gire para ajustar la intensidad de salida del canal 4.

9) Para los ocho botones de selección de los parámetros, vea a continuación los detalles: B1: En el modo de espera, pulse el botón B1 por segunda vez para seleccionar la forma de onda terapéutica. Presione el botón B1 para seleccionar el modo de salida de CC/CV.

B2: En el modo de espera, presione el botón B2 por segunda vez y manténgalo presionado aproximadamente 5 segundos para cambiar a la terapia profesional o a la terapia normal. En el modo de espera de la terapia profesional, pulse el botón B2 para cambiar el paso de tratamiento.

B3: Presione el botón B3 para seleccionar el parámetro Hora/Ciclo/Rampa

B4: Presione el botón B4 para seleccionar el programa terapéutico. Mantenga presionado el botón B4 de nuevo para guardar la configuración.

B5: Presione el botón B5 para seleccionar el parámetro Vector/F.M./Burst

B6: Presione el botón B6 para seleccionar el parámetro C.F./Freq.

B7: Presione el botón B7 para seleccionar el parámetro Beat H./A.M./Duty

B8: Presione el botón B8 para seleccionar el parámetro Beat L./P.Dur/Freq

Observación:

CC: modo de salida de corriente continua

CV: modo de salida de voltaje continuo

F.M.: Modulación de frecuencia

Burst: Frecuencia de ráfaga

Freq. : Frecuencia

C.F.: Frecuencia portadora

Duty: Ciclo de trabajo para forma de onda Russian

Beat H.: Alta frecuencia de latido de barrido

A.M.: Modulación de amplitud

Beat L.: Frecuencia baja de latido de barrido

P.Dur.: Duración del impulso

Time: Tiempo de tratamiento

Ciclo: Tiempo del ciclo (Con/Rel)

Ramp: Tiempo de rampa

10) Receptáculo para adaptadores

11) Interruptor de Encendido/Apagado.

12) Conector de salida: conectar con conector de cable.