

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	




MONITOR FETAL

MARCA: FETAL CARE
MODELO: FC700


Recomendaciones antes de usar

- Compruebe que el equipo, los cables y los transductores no presentan signos visibles de deterioro. Si evidencia algún daño visible, se recomienda el reemplazo del equipo.
- Asegúrese que el equipo esta correctamente conectado a la corriente eléctrica y la batería se encuentra en buen estado.
- Asegúrese que el papel de impresión este correctamente cargado.

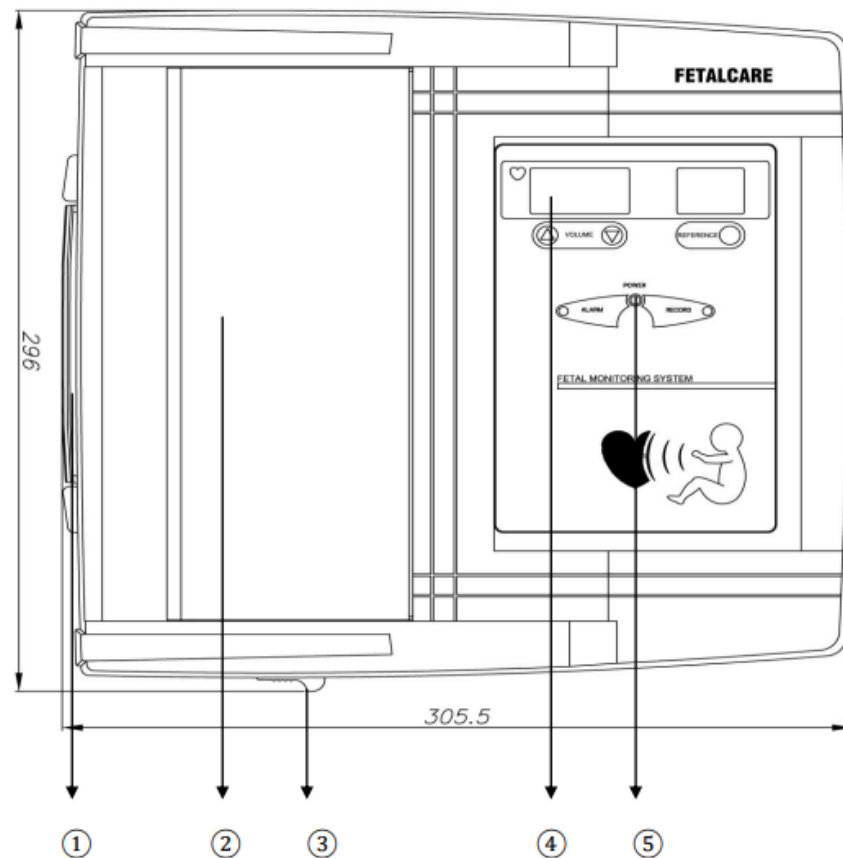

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Agarradera	4	Display
2	Compartimento de impresora	5	Panel de control
3	Botón de apertura de compartimento de impresora		


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

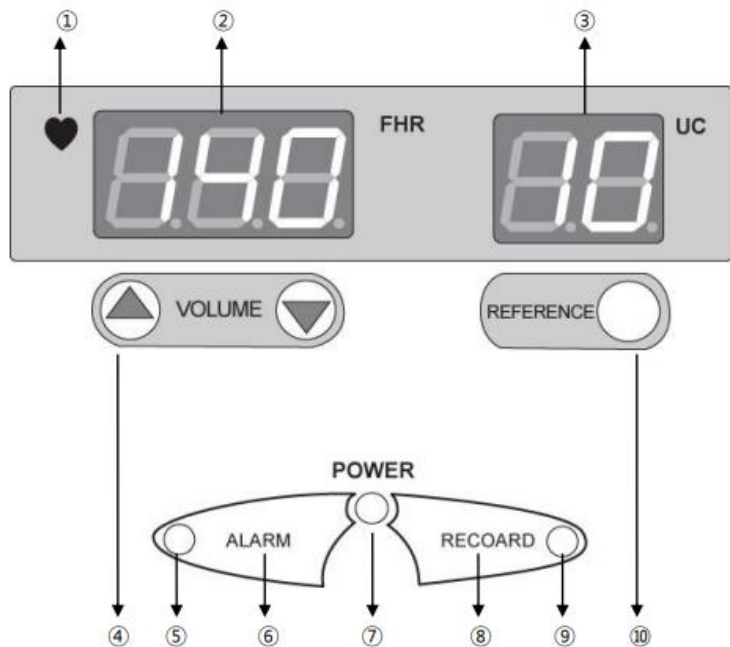

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Símbolo de ritmo cardiaco (Verde: estable, rojo: inestable)	6	Botón de encendido/apagado de alarmas.
2	Ritmo cardiaco del feto	7	LED de encendido/apagado del equipo.
3	Cantidad de contracciones uterinas (UC)	8	Botón de inicio/finalización de impresión.
4	Teclas de subir y bajar el volumen.	9	LED de inicio/finalización de impresión.
5	LED de encendido/apagado de alarma	10	Tecla para configurar el valor de UC al valor de referencia.

FUNCIONAMIENTO.

1. Conecte el equipo y enciéndalo.
2. Revise que los valores configurados estén seteados como se desea. De no ser así, configúrelos a los valores necesarios.
3. Posicione la sonda de Doppler y la sonda de UC (Contracciones uterinas) en la persona embarazada usando un cinturón como se muestra en las imágenes a continuación.

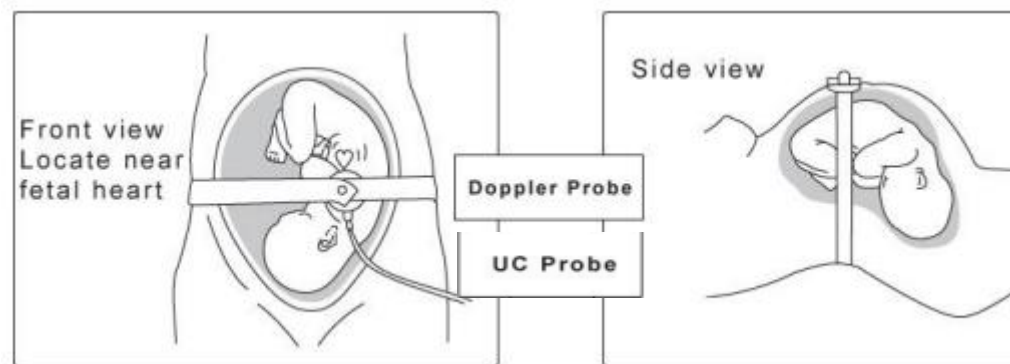

4. Dele a la paciente el Mark Jack para que presione cuando sienta movimientos del feto.
5. Presione el botón [REFERENCE] para configurar el valor de UC a cero.
6. Controle el volumen para escuchar bien el latido del corazón del feto.
7. Si se indica una frecuencia cardiaca precisa, presione la tecla [RECORD] para comenzar la impresión.

SÍMBOLOS



Apagado



Encendido



Conexión aislada del paciente

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Monitor	• Limpie la carcasa del monitor con un paño y utilice los detergentes diluyentes no corrosivos recomendados anteriormente. • Limpie la pantalla con un paño seco.
Accesorios	• Frótelos con un paño humedecido en solución limpiadora. • Límpielos con un paño humedecido en agua. • Séquelos al aire o seque la humedad restante con un paño seco.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el equipo y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.
- Inspeccione el equipo y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

ADVERTENCIAS:

- No use laca, diluyente, etileno o una sustancia oxidante.
- No sumerja la maquina ni el cable de la sonda en ningún liquido o detergente.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Falla	Posible causa	Solución
Er1	La sonda Doppler se desconectó durante el monitoreo.	Conecte la sonda Doppler nuevamente y presione las teclas de volumen [UP/DOWN] simultáneamente.
Er2	El papel se agotó durante la impresión.	Inserte el papel o presione las teclas de volumen [UP/DOWN] simultáneamente.

ALARMA	DESCRIPCION
FHR (Frecuencia cardiaca fetal)	Indica que la frecuencia cardiaca fetal medida está por encima o por debajo de los valores establecidos por un periodo de tiempo mayor al configurado. Además de la alarma aparecerá el mensaje (Er1) en el equipo. Siga los pasos indicados en “Fallas frecuentes”.
Se acabo el papel mientras se llevaba a cabo un registro	Indica que el equipo se quedó sin papel de impresión mientras llevaba a cabo un registro. Además de la alarma aparecerá el mensaje (Er2) en el equipo. Siga los pasos indicados en “Fallas frecuentes”
El equipo se encendió por primera vez.	Se emite una alarma sonora para indicar que el equipo se ha encendido.
Valores de configuración cambiaron y guardaron.	Se emite una alarma sonora para indicar que se llevaron a cabo modificaciones en los valores de configuración del equipo.