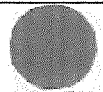
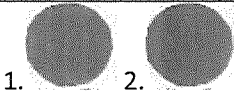
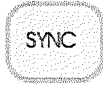
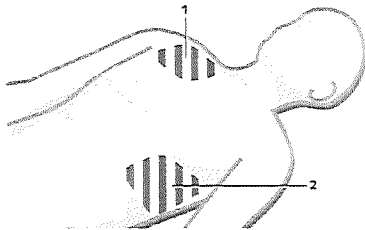


## GUIA RAPIDA DESFIBRILADOR PRIMEDIC™ DefiMonitor XD

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Encender el Desfibrilador                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 2. | Cambie al Modo Manual                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3. | Seleccione la Energía (5J -360J)!                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4. | Seleccione Paletas                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 5. | Para hacer una Carga de Energía, Usted debe primero presionar un botón de las paletas.                                                                                                                                                                                              |    |
| 6. | Si usted escucha la señal para descarga y usted puede visualizar la señal de ECG en la pantalla, usted puede realizar una descarga al paciente presionando juntos botones de las paletas.<br><b>Presiones ambos botones hasta que se realice la descarga. (1. Sternum; 2. Apex)</b> |   |
| 7. | Opcional: Para Cardioversión, Presione el Botón de SYNC                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 8. | Aplique el Gel de Desfibrilador a las Paletas y luego posicione las paletas en:<br><br>STERNUM Y APEX..<br><br>( 1 : Sternum; 2 : APEX )                                                                                                                                            |   |
| 9. | Después de realizada la descarga, retire las paletas del paciente o si es necesario suministre descargas adicionales.                                                                                                                                                               |                                                                                       |

# Manejo del marcapasos

## Indicaciones generales para el funcionamiento del marcapasos Pacer XD

Para la utilización del marcapasos Pacer XD PRIMEDIC™ deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de manejo:

- ❶ Conecte el DefiMonitor XD PRIMEDIC™. El marcapasos puede utilizarse sólo en modo manual. Cambie al modo correspondiente.
- ❷ Aplicar los electrodos adhesivos (SavePads Connect) al paciente
- ❸ Conecte los electrodos adhesivos con el cable de conexión para SavePads mediante el clip para electrodos. Para ello, véase el capítulo 8.2.3.
- ❹ Conectar el cable del SavePads Connect al DefiMonitor XD PRIMEDIC™ en la hemibrilla.
- ❺ Active el Pacer XD pulsando brevemente la tecla de conexión/desconexión del marcapasos  
(En este momento, el Pacer XD todavía no transmite ningún impulso de estimulación)
- ❻ Ajuste los parámetros:
  - Modo de funcionamiento
  - Frecuencia de estimulación
  - Intensidad de estimulación
- ❼ Active el marcapasos pulsando la tecla START/STOP.

El Pacer XD se apaga mediante la tecla de conexión/desconexión del marcapasos. Simultáneamente se emite una señal acústica.

Al encender el marcapasos puede que en el campo de indicaciones del marcapasos, en la parte superior izquierda del display, aparezcan el mensaje "Pacemaker Init." y una barra de progreso. Esto indica que se está realizando una autocomprobación interna del marcapasos. Tras unos segundos, el marcapasos estará listo para su configuración.

## Colocación de los SavePads PRIMEDIC™ Connect para la estimulación cardíaca

Para la estimulación cardíaca se han impuesto dos posiciones distintas de los electrodos.

- posición anterior - posterior
- posición anterior - anterior

La colocación y la polaridad de los electrodos influyen notablemente en la intensidad de estimulación necesaria.

La posición preferible es la **posición anterior - posterior**.

|           |                 | Posición                                                                                                                    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anterior  | Verde (F) ( - ) | lado anterior izquierdo del pecho, entre el esternón y el pezón izquierdo (aprox. posición V <sub>1</sub> /V <sub>2</sub> ) |
| Posterior | Rojos (R) ( + ) | lado posterior izquierdo del pecho, entre el vértice del omoplato y la columna vertebral                                    |

A posición anterior-posterior tiene la ventaja que la intensidad necesaria de estimulación, en muchos casos, es menor y en consecuencia se estimula menos la musculatura pectoral

En caso de contraindicación de la posición anterior-posterior (p. ej. cuando es probable la aparición de fibrilación ventricular), se puede emplear la posición anterior - anterior de forma alternativa.

Las posiciones corresponden a las de los electrodos adhesivos durante la desfibrilación.

|          |                 | Posición                                                                                                             |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anterior | Verde (F) ( - ) | corresponde a la posición apical, parte izquierda del pecho, sobre el vértice del corazón a nivel de la línea axilar |
| Anterior | Rojos (R) ( + ) | corresponde a la posición esternal, parte derecha del pecho, bajo la clavícula                                       |

# Ajuste de los modos de funcionamiento del marcapasos

Existen tres modos de funcionamiento para el marcapasos:

- DEMAND (ajuste por defecto)
- FIX
- OVERDRIVE

| Modo de funcionamiento | Significado                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMAND (por defecto)   | Se produce la estimulación "en caso de necesidad", es decir, cuando la frecuencia cardíaca espontánea es menor que la frecuencia DEMAND ajustada. |
| FIX                    | Estimulación de frecuencia fija. Independientemente de la frecuencia cardíaca espontánea se generará una frecuencia fija.                         |
| OVERDRIVE              | Sobreexcitación cardíaca con estimulación de frecuencia fija elevada (máx. 250 1/min) para la eliminación de p. ej. taquicardia ventricular.      |

Al encender el equipo, se activa automáticamente el modo DEMAND, que se indicará en la pantalla mediante texto legible

Para seleccionar otro modo, pulse la tecla de MODE una o varias veces, hasta que aparezca el modo de funcionamiento deseado en la pantalla.

Durante el ajuste del modo no se emitirán impulsos de estimulación.