

GUIA RÁPIDA DE MANEJO SLE 6000



CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL RESPIRADOR


- A. Compruebe que los colectores de agua estén vacíos.

Atención: Si el colector/los colectores de agua están montados con un tapón de vaciado manual y contienen agua, vacíe manualmente el agua antes de proceder con la configuración.

- B. Compruebe que el filtro en la parte trasera no tiene polvo.

Si el filtro se encuentra sucio, haga la siguiente limpieza:

Quite el protector del filtro del ventilador (1). No se necesita ninguna herramienta.

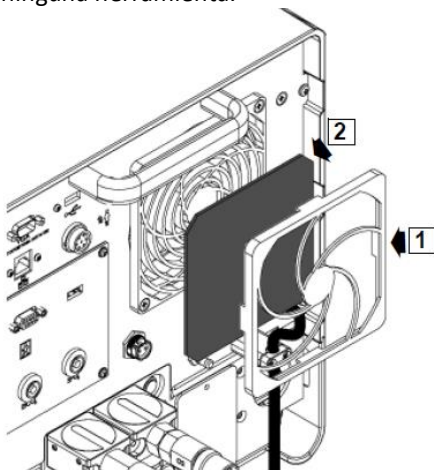

Quite el filtro, lave el filtro (2) en agua limpia


Advertencia: No retuerza ni deforme el filtro, ya que perdería su forma.

Seque el filtro (2) colocándolo entre dos toallas de papel hasta que no quede ningún resto de humedad.


Sustituya el filtro (2) y el protector del filtro (1).

Montaje del silenciador y del bloque de exhalación


Abra la cubierta de acceso al bloque de exhalación.

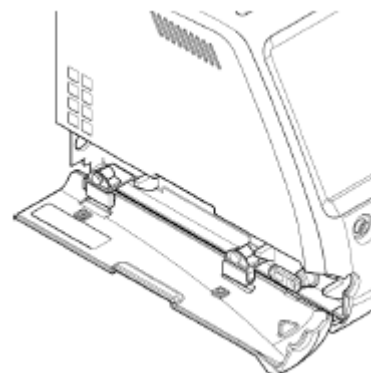

Limpie las tomas de aire con un paño con alcohol.

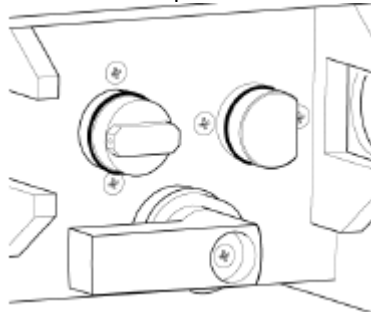


Conecte el silenciador al bloque de exhalación. Las bolas de la válvula de seguridad indican cuál es la parte trasera del bloque de exhalación.

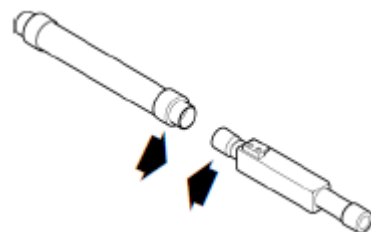

Conecte el conjunto a las tomas de aire y fíjelo en su sitio. Cierre la cubierta de acceso.

Nota: Asegúrese de que el silenciador y el bloque de exhalación se han limpiado conforme a las instrucciones de limpieza y desinfección.

Conecte el conjunto a las tomas de aire y fíjelo en su sitio.

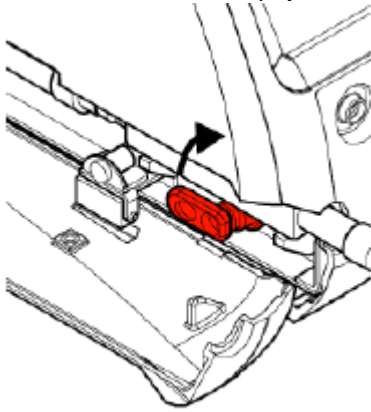

Cierre la cubierta de acceso.

Nota: El usuario no podrá cerrar la cubierta de acceso si el bloque de exhalación no está fijado en su sitio.

ENCENDER EL RESPIRADOR

Con el cable de alimentación de red conectado:

Pulse y mantenga pulsado el interruptor de alimentación durante 3 segundos. El indicador luminoso tiene que estar en ámbar (estático o parpadeando).



El indicador luminoso tiene que cambiar a color verde. El respirador se encenderá y se pondrá en el modo en espera.



El icono de la batería y el icono de alimentación de red indicarán que el respirador está funcionando con la alimentación de red.



Sin el cable de alimentación de red conectado:

Pulse y mantenga pulsado el interruptor de alimentación durante 3 segundos. La luz indicadora tiene que estar apagada.



El indicador luminoso tiene que cambiar a color verde. El respirador se encenderá y se pondrá en el modo en espera.



El icono de la batería solo aparecerá cuando la unidad esté funcionando con energía de la batería.



Nota: Cuando la unidad entre en el modo en espera, el usuario tendrá que cancelar el mensaje de alarma de fallo de alimentación de red una vez haya cancelado la alarma Calibrar sensor de flujo/Sensor de flujo no conectado.

CONFIGURAR RESPIRADOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SU PACIENTE


Selección del circuito del paciente: Hay tres circuitos de paciente aprobados para el uso con el SLE6000.

- Circuito de respiración para neonatos/lactantes de un solo uso – tubo de 10 mm, una resistencia calentadora.
- Circuito de respiración para neonatos/lactantes de un solo uso – tubo de 10/15 mm, doble resistencia calentadora.
- Circuito de respiración pediátrico de un solo uso – tubo de 15mm.

Tipo de respiración: invasiva o no invasiva

Conectar el sensor de flujo y calibrar:

Conecte el cable del sensor de flujo al sensor de flujo. Asegúrese de que la llave del conector del cable encaja en la ranura posterior del conector del sensor de flujo.

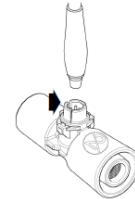

El respirador disparará la alarma Calibrar sensor de flujo. Pulse el botón «Calibrar» de la barra de información para activar el panel del sensor o pulse el botón «Herramientas» o el botón «Calibración y herramientas».

Ocluya el sensor de flujo para evitar que el flujo pase por los cables del sensor.



Atención: para evitar la contaminación del sensor de flujo, use guantes al calibrar.

Pulse el botón Iniciar calibración y aparecerá encima del botón el siguiente texto «Calibrando...»

Cuando la calibración haya superado la prueba, aparecerá «Calibración completada».

El sensor de flujo estará calibrado.

Haga el montaje de los circuitos y la cascada como se indica en el manual de uso.