
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Equidad. Calidad. Vida.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO					
		VERSIÓN		PÁGINA		DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES		AÑO	

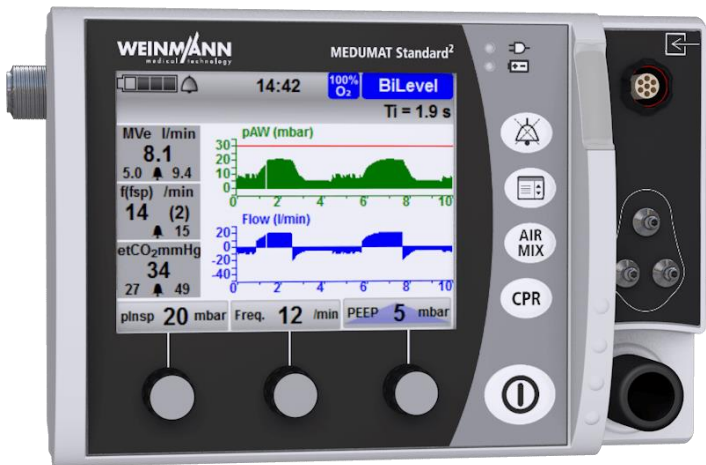


VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE

MARCA: WEINMANN
 MODELO: MEDUMAT STANDARD 2


Recomendaciones antes de usar

- Compruebe el estado de la batería y si es necesario, cárguela. Utilice el dispositivo siempre con la batería WM 45045.
- Compruebe si el filtro higiénico presenta algún deterioro externo. Si es necesario, cambie el filtro higiénico.
- Conecte los accesorios necesarios como se explica en la siguiente sección.

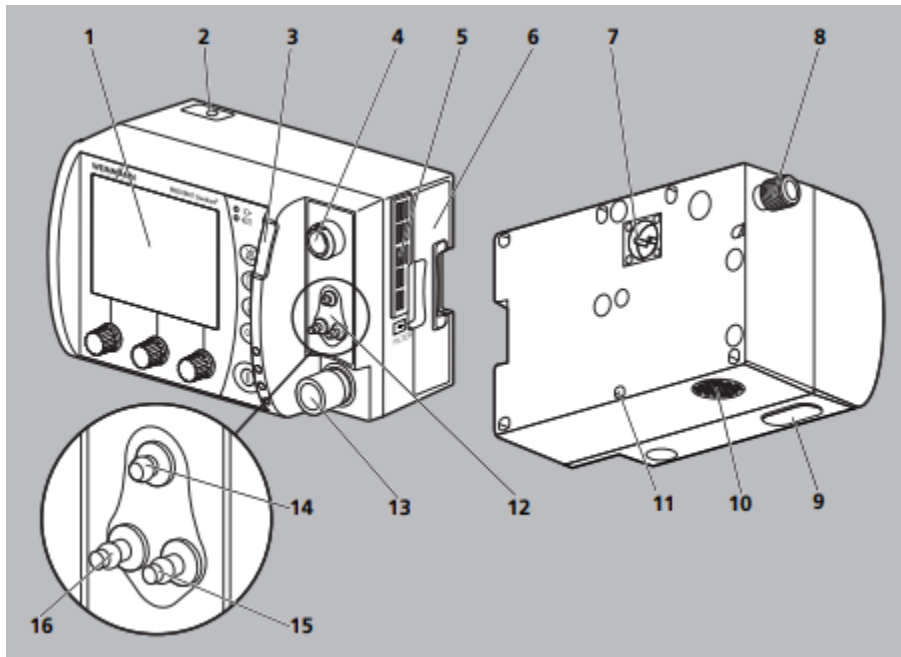

No.	PARTE	No.	PARTE
1	Pantalla	9	Lector de tarjetas SD
2	Tapa de servicio técnico.	10	Altavoz
3	Alarma luminosa.	11	Precinto de promo
4	Conexión para accesorios	12	Conexión para el sistema de tubos flexibles de medición
5	Compartimento para filtro	13	Conexión para el tubo flexible para la respiración artificial
6	Compartimento para batería	14	Conexión para tubo flexible para la medición de CO2
7	Conexión para la alimentación de corriente	15	Conexión para el tubo flexible para la medición de la presión
8	Conexión de gas comprimido	16	Conexión del tubo flexible para el control de la PEEP.


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

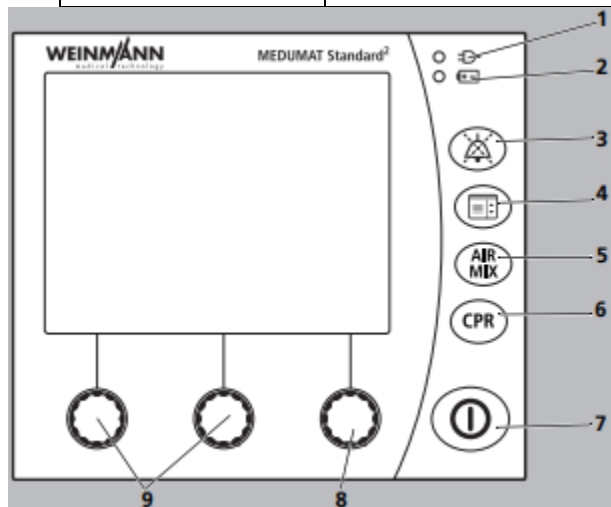

No.	PARTE	No.	PARTE
1	Indicador de alimentación de red	6	Tecla RCP
2	Indicador de estado de la batería	7	Botón On/Off
3	Tecla de alarma silenciosa	8	Botón de navegación derecho
4	Tecla de menú	9	Botón de navegación izquierdo/intermedio
5	Tecla Air Mix		

MONTAJE:

1. Acople el tubo flexible para la respiración artificial a la conexión prevista al efecto. Inserte el conector para el sistema de tubos flexibles de medición con la conexión prevista para este sistema. Si es necesario conecte el sensor FlowCheck, MEDUtrigger o el tubo para la medición de CO₂.

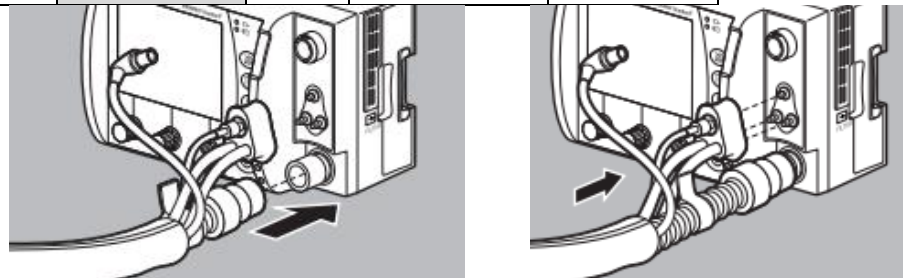

2. Para respiración artificial con tubo, acople la válvula del paciente del sistema de tubos flexibles para el paciente al tubo una vez finalizada la intubación. Para respiración artificial con máscara acople la máscara para respiración artificial a la válvula del paciente del sistema de tubos flexibles para el paciente.
3. Para conectar el sensor FlowCheck inserte el conector de una de las líneas de conexión (línea del sensor FlowCheck o línea de conexión FloCkeck con MEDUtrigger) en la conexión para accesorios del dispositivo. Conecte el sensor a la válvula del paciente. Enganche el conector para el sensor y a continuación, presione el conector hasta oír que queda enclavado.
4. Para conectar el sensor MEDUtrigger inserte el conector de una de las líneas de conexión para accesorios del dispositivo. Si es necesario, inserte el conector para sensor FlowCheck de la línea de conexión del sensor FlowCheck con MEDUtrigger en el sensor FlowCheck. Coloque el MEDUtrigger entre la máscara y el siguiente extremo del lado del paciente del sistema de tubos flexibles para el paciente.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

MODOS DE OPERACIÓN.

Modo de emergencia:

1. Conecte el dispositivo. Una vez finalizada la autocomprobación, el dispositivo muestra el menú de inicio.
2. Seleccione un modo de emergencia: Lactante, Niño o Adulto.
3. Se aplicarán los pre-ajustes introducidos en el menú de operador.

Modo parámetros del último paciente:

1. Conecte el dispositivo. Una vez finalizada la autocomprobación, el dispositivo muestra el menú de inicio.
2. Seleccione el campo “Ultimo paciente” o bien, espere a que finalice la cuenta regresiva.
3. Si es necesario, adapte y confirme los ajustes del último paciente.

Modo Nuevo paciente:

1. Conecte el dispositivo. Una vez finalizada la autocomprobación, el dispositivo muestra el menú de inicio.
2. Seleccione el campo “Paciente nuevo”.
3. Seleccione la estatura y el sexo del paciente o bien, desplácese hasta el campo “Tamaño” y prosiga girando el botón de navegación a fin de seleccionar el grupo de pacientes que desea (adulto, niño o lactante).
4. Pulsa el botón de navegación “siguiente”. Seleccione el modo de respiración artificial y si es necesario, ajuste los parámetros del modo de respiración artificial.
5. Seleccione el campo “iniciar”.

Cambio de modo de respiración artificial.

1. Una vez se haya ajustado un modo de respiración artificial, pulse brevemente el botón de menú . Acto seguido seleccione el campo “Menu” usando el botón de navegación derecho.

2. Seleccione el modo de respiración artificial y si es necesario ajuste los parámetros del modo de respiración artificial.
3. Seleccione el campo “iniciar”.

Empleo del dispositivo con el servicio de oxígeno o el servicio Air Mix.

1. Es necesario que ya este seleccionado un modo de respiración artificial.
2. Pulse brevemente la tecla “Air Mix” . La línea de estado muestra “Air Mix” y el dispositivo funciona en el servicio Air Mix.
3. Vuelva a pulsar brevemente la tecla “Air Mix”. Dependiendo de cómo se haya ajustado el gas de alimentación, la línea mostrara el ajuste y el dispositivo funcionara con dicha configuración.

Aplicación de respiración artificial en el modo RCP manual.

1. Pulse brevemente la tecla . Si es necesario cambiar el ritmo, use el botón de navegación derecho.
2. En la pausa respiratoria, mantenga pulsada la tecla MEDUtrigger hasta que se hayan efectuado dos impulsos de respiración artificial o bien, cuando los diodos estén encendidos pulse dos veces brevemente la tecla MEDUtrigger y active manualmente los impulsos de respiración artificial.
3. Si es necesario interrumpa el modo RCP manual mediante la tecla RCP. Después de abandonar el modo RCP, el dispositivo cambia siempre al modo IPPV.

Modo RCP IPPV.

1. Pulse brevemente la tecla  y cambie el ritmo usando el botón de navegación derecho de “Manual” a .
2. Si el paciente recupera un ciclo espontaneo, interrumpa el modo RCP IPPV mediante la tecla RCP.
3. El dispositivo volverá automáticamente al modo IPPV.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte	Limpieza
Dispositivo	- Frote con un trapo seco o húmedo, utilice agua o jabón suave. - Para su desinfección, frote la parte del equipo correspondiente con una solución de limpieza.
Batería	
Fuente de alimentación	
Bolsa de prueba	
Grifería para el oxígeno	Frote con un trapo seco o húmedo, utilice agua limpia.
Sistema de tubos flexibles reutilizable	- Limpieza en agua caliente con un producto de limpieza suave. - Desinfección por inmersión.
Sistema de tubos flexibles desechable	Artículo desechable, no reutilizable.
Cinta de velcro con clip	- Lave con agua y jabón suave. También está permitido su lavado hasta 30 °C en la lavadora sin centrifugar - Desinfección por inmersión.
Filtro higiénico	Artículo desechable, no reutilizable.
Filtro de entrada del dispositivo	
Adaptador para inhalación.	
Mascaras para respiración artificial	- Limpieza en agua caliente con un producto de limpieza suave. - Desinfección por inmersión.
Funda protectora para tubos flexibles	- Frotado húmedo con agua o algún producto de limpieza alcalino o lavado hasta 70°C en lavadora sin centrifugar. - Desinfección por inmersión.

RECOMENDACIONES:

- Limpie el equipo después de cada uso.
- Desmontar todos los componentes que entran en contacto con los gases respiratorios antes de realizar su limpieza y desinfección.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar agentes abrasivos.
- No sumergir el equipo, los componentes ni los accesorios en ningún líquido a no ser que se especifique lo contrario.
- No sumergir los sensores en agua, solventes o solución de limpieza.
- Tener cuidado que ningún residuo del producto de limpieza se acumule en las conexiones del equipo.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Quando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	CAUSA	SOLUCION
Señal de alarma con volumen demasiado bajo.	Volumen ajustado al 50%	En el menú de operador, ajuste el volumen del sonido en 100%
Ninguna señal acústica de alarma	Modo GVN activado.	Desactive GVN.
La alarma luminosa no se enciende		
Pantalla demasiado oscura	El brillo de la pantalla esta ajustado demasiado bajo	Adapte el brillo de la pantalla en el menú de operador
	Modo GVN activado	Adapte el brillo de GVN o desactívelo.
No es posible conectar el dispositivo	La batería no está bien insertada o esta descargada	Compruebe la batería
	Dispositivo defectuoso	Envíe el dispositivo a reparación.
Una cruz roja en el informe de estado del control de funcionamiento	Hay componentes no operativos.	Compruebe los componentes que aparecen indicados y si es necesario reemplácelos, repita el control de funcionamiento y si persiste el error envíe a reparación.
La batería no se carga pese a no estar llena	Temperatura de la batería <0°C o >45°C	Cargue la batería dentro del margen admisible de la temperatura
	Batería defectuosa	Reemplace la batería.
Consumo de oxígeno desacostumbradamente elevado	Fuga en la línea de oxígeno	Localice y elimine la fuga.
	La válvula del paciente no cierra completamente	Compruebe el sistema de tubos flexibles.
	Fuga al aplicar respiración artificial con mascara	Coloque al paciente la mascara de modo que quede asentada lo más herméticamente posible.