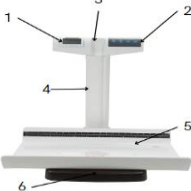


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012				
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023
Nombre del equipo:	Báscula pediátrica digital de bandeja	Modelo:	522KL		Riesgo del equipo:	I	
Marca:	Healt o meter				Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO			
 La báscula Health o meter professional fue diseñada para ser utilizada en un entorno médico profesional y por personal médico capacitado. Este producto fue diseñado para pesar bebés acostados o sentados en la bandeja. No modifique el producto ni lo utilice para ningún otro fin distinto al indicado.		 1. Pantalla 2. Botones de control 3. Baterías, se ponen por la parte trasera 4. Soporte de la pantalla 5. Bandeja o canasta 6. Base		1. Asegúrate de que la bandeja esté vacía y enciende la báscula, después coloca al paciente en la bandeja de manera uniforme. 3. La báscula mostrará el peso y se estabilizará. 4. Presionando el botón HOLD/RELEASE, se mantiene el peso. 5. Retira al paciente de la bandeja y la báscula volverá a ceros. 6. Se apaga presionando el botón ON/OFF.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FUNCIÓN DE APAGADO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
1.Capacidad: 23 kg 2.Resolución: 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g 3.Conectividad vía USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar 4.Pantalla LCD de 1" / 25 mm 5.Funciones: Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Cero Automático, Auto-apagado 6.Tamaño de la Bandeja (l x a x a): 24 1/5" x 14 1/2" x 2 5/8" 613 mm x 368 mm x 67 mm 7.Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a): 24 1/6" x 21" x 23 1/8" 613 mm x 533 mm x 587 mm 8.Peso del Producto: 20 lb / 9 kg 9.Cinta Métrica: 0" - 23" / 0 cm - 58 cm 10.6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional de 120V (# ADPT31)		1.Función de apagado automatico: La báscula se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad si esta siendo utilizada con las pilas. 2.Desactivar el apagado automático:Mantenga presionado el botón HOLD/RELEASE mientras la báscula está apagada, luego presione el botón ON/OFF para encenderla. Suelte ambos botones y aparecerá "AOF = 0", indicando que el apagado automático está desactivado. La báscula permanecerá encendida hasta que se apague manualmente. 3.Activar el apagado automático:Mantenga presionado el botón HOLD/RELEASE mientras la báscula está apagada, luego presione el botón ON/OFF para encenderla. "START" aparecerá brevemente en la pantalla seguido de "AOF = 1".El apagado automático se encuentra ahora activado.		1.La báscula no enciende: Reemplace las baterías, use una salida diferente ó reemplace el adaptador de CA. 2.Peso cuestionable o la báscula no se coloca en ceros:Retire el objeto que interfiere de la báscula, retire al paciente de la bandeja de pesaje, ponga la báscula en ceros y comience nuevamente el pesaje,coloque la báscula sobre una superficie nivelada y comience nuevamente el pesaje,verifique el peso con un valor de peso conocido. 3.Se realiza el pesaje, pero el proceso de pesaje lleva demasiado tiempo y el peso no se fija en la pantalla:Intente que el paciente se quede quieto. 4.La pantalla muestra el mensaje "Over": Retire el exceso de peso y use la báscula de acuerdo con los límites indicados. 5.La pantalla muestra el mensaje "Lo":Reemplace las baterías. 6.La báscula se enciende pero no registra una lectura de peso: Revise el cable de carga.			
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							