

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO		
	EQUIPO: ASPIRADOR	CÓDIGO:	NA
	MARCA: THOMAS	VERSIÓN:	1
	MODELO: 1630	FECHA DE ELABORACIÓN:	01/09//2022

USO DEL EQUIPO



Dispositivo que, mediante succión por presión negativa a través de una sonda, aspira y limpia secreciones, sangre u otros materiales de las vías respiratorias altas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Presión máxima 560 mm HG
- Requerimientos eléctricos 115 AC
- Tipo de Motor AC



ADVERTENCIAS

- Recuerde utilizar un filtro bacteriano para evitar el paso de fluidos al equipo
- No utilice el aparato si no funciona correctamente.
- Durante el funcionamiento del aparato no toque los cables conectados bajo ningún concepto.


PARTES DEL EQUIPO



- 1 Encender/Apagar
- 2 Filtro bacteriano
- 3 Frasco de desechos
- 4 Manguera para pacientes
- 5 Manija de agarre
- 6 Filtro de entrada de aire
- 7 Manómetro
- 8 Válvula reguladora
- 9 Cable de poder



Escanea este QR si necesitas usar el manual de usuario del Aspirador Thomas o la guía de alarmas y resolución de problemas a más profundidad.

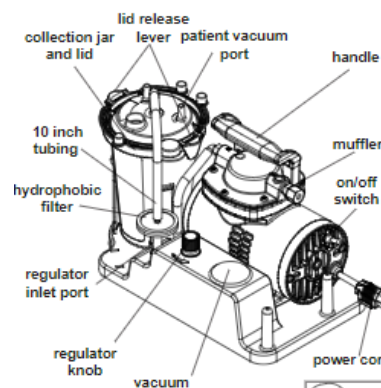

PASOS DE OPERACIÓN



- 1 Conecte el equipo al toma corriente
- 2 Conecte el filtro bacteriano al equipo
- 3 Conecte la manguera al equipo
- 4 Accione el interruptor de ON/OFF
- 5 Inicie el procedimiento con el paciente
- 6 Regule la succión si es necesario



POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

No enciende el equipo 	Verifique que el equipo este conectado a la red eléctrica y verifique el botón de ON/OFF
Sobrecalentamiento 	Dejar reposar el equipo unos minutos
No succiona 	Verificar que no haya obstrucción en las mangueras



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- 1 Utilice un paño de de Klorkleen + Vital Care según lo indicado en el procedimiento establecido