

|                                                                                   |                                                                            |                         |                |               |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |                |               |            |  |
|                                                                                   |                                                                            |                         | <b>VERSIÓN</b> | <b>PÁGINA</b> | <b>DE</b>  |  |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b>     | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |  |




### MONITOR DE SIGNOS VITALES

**MARCA:** MINDRAY  
**MODELO:** BENEVIEW T5


#### Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

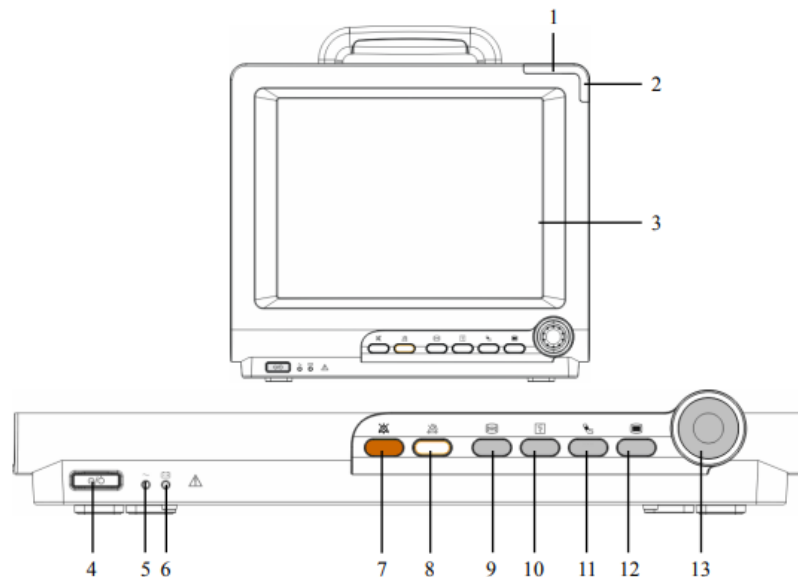

| No. | Nombre                                 | No. | Nombre                                            |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 1   | Luz de alarma                          | 8   | Botón para pausar o restaurar alarmas             |
| 2   | Luz de alarma técnica                  | 9   | Botón para congelar o continuar las ondas         |
| 3   | Pantalla de visualización              | 10  | Botón para iniciar o detener registros            |
| 4   | Interruptor de encendido/apagado       | 11  | Botón para iniciar/detener medición de PNI (NIBP) |
| 5   | LED de alimentación de CA              | 12  | Menú                                              |
| 6   | LED de batería                         | 13  | Mando                                             |
| 7   | Botón para silenciar sonidos de alarma |     |                                                   |

|                                                                                   |                                                                            |                         |                |               |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |                |               |            |  |
|                                                                                   |                                                                            |                         | <b>VERSIÓN</b> | <b>PÁGINA</b> | <b>DE</b>  |  |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b>     | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |  |

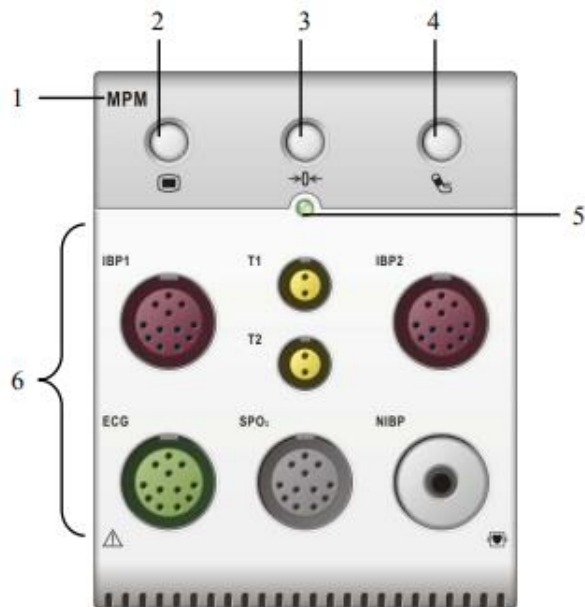

| No. | Nombre                          | No. | Nombre                     |
|-----|---------------------------------|-----|----------------------------|
| 1   | Nombre del modulo               | 4   | Tecla de inicio/parada PNI |
| 2   | Tecla de ajuste [Ajuste de MPM] | 5   | Indicador                  |
| 3   | Tecla de p cero [Rest. PI]      | 6   | Conectores de medición.    |

### Aceptar paciente nuevo.

Configure la admisión del paciente: Seleccione [Ajuste pacien] o [Menu principal] → [Ajustes paciente] → Seleccione [Dar de alta a pacientes] para eliminar los datos del paciente anterior → Seleccione [admitir paciente] y [Si] para aplicar los datos guardados del paciente anterior o [No] para borrar todos los datos guardados → En el menú “Datos Personales del Paciente” configure [Cat pacien] (determina la forma en la que el monitor procesa y calcula algunas mediciones) y [Marc.] (Seleccione [Si] en caso de que el paciente cuente con marcapasos). → Seleccione [OK]

### Monitorización ECG/RESP:

- Prepare la piel del paciente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor este encendido y preparado para monitorizar.
- Seleccione la ventana de parametros o el area de oneas de ECG para acceder al menu “Ajustes de ECG” → Seleccione [Conjunt deriv] y a continuación seleccione el tipo de derivadas que uso [3 deriv], [5 deriv], [12 deriv] o [auto]
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos, asegúrese de que aparezca el icono  en pantalla, de no ser así revise la sección “RECOMENDACIONES ANTES DE USAR” para configurar el marcapasos.
- La respiración se mide entre dos electrodos de ECG ya sean RA y LA de la derivada I o RA y LL de la derivación II. Para configurar la derivada ingrese al menú “Ajuste de Resp” y seleccione [Deriv Resp] y alterne entre [I] y [II]

### Monitorización de SpO2:

- Seleccione el sensor SpO2 según se requiera.
- Enchufe el cable del sensor SpO2 en el conector del SpO2 en el módulo de medición.
- Coloque el sensor correspondiente (dactilar o neonatal) en el paciente en el sitio adecuado.

### SÍMBOLOS



Encendido/apagado



Corriente alterna



Alarmas Silenciada



Alarmas pausadas.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |
|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |

#### Monitorización PNI (NIBP):

- Asegúrese de que el monitor se encuentra encendido.
- Compruebe que la categoría del paciente es la adecuada. De no ser así cámbielo en el menú “Ajuste de PNI”.
- Conecte los tubos de aire al conector de PNI del módulo MPM.
- Seleccione el manguito del tamaño apropiado y colóquelo en la parte superior del brazo o la pierna del paciente. Asegúrese que la marca  coincide con la ubicación de la arteria.
- Conecte el manguito a los tubos de aire y compruebe que la bolsa situada dentro de la cubierta no está doblada ni retorcida.
- Para iniciar la medición use la tecla de acceso rápido [Medir PNI] o la tecla de activación  situada en el panel frontal del monitor o en el modulo MPM.

#### Monitorización de temperatura:

- Seleccione la sonda adecuada para el paciente.
- Conecte la sonda o el cable de temperatura al conector de temperatura.
- Conecte correctamente la sonda al paciente.
- Compruebe que los ajustes de alarmas son los adecuados para el paciente.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

| Parte/Accesorio       | Limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apague el monitor de pacientes y desconéctelo de la línea de alimentación.</li> <li>● Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedecido con limpiacristales.</li> <li>● Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el limpiador.</li> <li>● Retire toda la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es necesario.</li> <li>● Seque el equipo en un lugar fresco y ventilado.</li> </ul> |
| Cable ECG             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Limpie la superficie del cable con un paño suave rociado con agua o agua con jabón neutro</li> <li>● Friegue el cable con un paño suave rociado con desinfectante.</li> <li>● Quite el desinfectante remante con un paño suave rociado con agua.</li> <li>● Coloque el cable en un fresco y ventilado para que se airee.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Sensor SpO2           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se puede utilizar el método del cable ECG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensor de temperatura | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se puede utilizar el método del cable ECG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brazalete PANI (NIBP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Extraiga el brazalete del conector y quite la bolsa de aire de la funda</li> <li>● Limpie la bolsa de aire y el tubo con un paño sumergido en agua potable o con jabón neutro y séquelos con un paño.</li> <li>● Limpie la funda del brazalete en el agua limpia con jabón neutro.</li> <li>● Coloque la cámara de aire dentro de su cubierta una vez secos.</li> </ul>                                                                                                |

### RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

### ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

| FALLA                                                   | POSIBLE CAUSA                                                                                                                  | ACCIÓN POR REALIZAR                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El equipo no enciende.</b>                           | Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.                                                               | Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.                                                                    |
|                                                         | Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.                                            | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
| <b>Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo</b> | Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta. | Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión. |
| <b>Medición falsa de los parámetros</b>                 | Ruptura o falso contacto de los cables.                                                                                        | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
|                                                         | Incorrecta colocación de los electrodos ECG                                                                                    | Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.                                                                                                     |
| <b>Descargas eléctricas en el paciente</b>              | Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.         | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
|                                                         | Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.                                                               | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
| <b>Deterioro de la salud del paciente.</b>              | Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.                                                                 | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |