


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO



DESFIBRILADOR

MARCA: MEDIANA
MODELO: D500

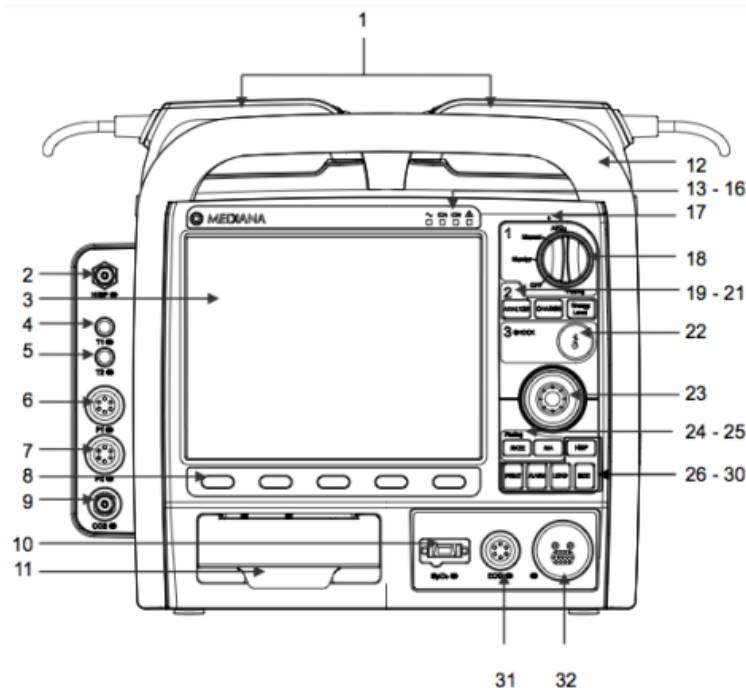


Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el equipo muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.
- Asegúrese de que el envase de los parches para el modo DEA este intacto y dentro de la fecha de caducidad indicada.

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Paleta	17	MIC
2	Conector NIBP	18	Botón de selección de Modo
3	LCD	19	Botón de ANALIZAR
4	Conector Temperatura 1	20	Botón de CARGA
5	Conector Temperatura 2	21	Botón de Nivel de Energía
6	Conector IPB 1	22	Botón de DESCARGA
7	Conector IPB 2	23	Botón de multi función
8	Techa suave	24	Botón de VELOCIDAD
9	Conector de EtCO2	25	Botón de mA
10	Conector SpO2	26	Botón de NIBP
11	Impresora	27	Botón de IMPRESIÓN
12	Manija	28	Botón de ALARMA

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

13	AC/DC en LED	29	Botón de CABLE
14	LED de estatus de carga de batería A	30	Botón de TAMAÑO
15	LED de estatus de carga de batería B	31	Botón de ECG
16	LED de servicio	32	Conector de paletas/almohadillas

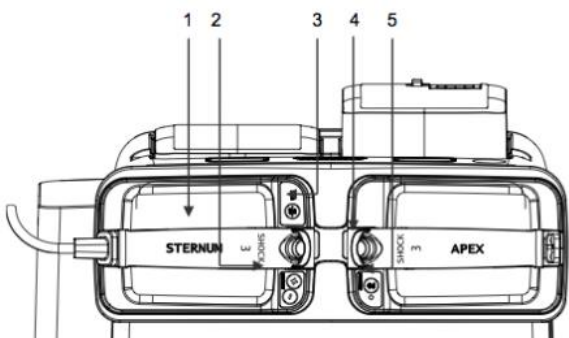


No.	Nombre	No.	Nombre
1	Paleta	4	Botón de CHOQUE
2	Botón de Nivel de Energía	5	Botón de CARGA
3	Botón REC		

ANTES DE USAR

- Si el paciente cuenta con marcapasos, asegúrese de que el “Detector de impulsos” este habilitado, para eso diríjase al menú HR/PR seleccionando el parámetro ECG con el botón multifunción → Seleccione [Detector de impulsos] → Seleccione [Permitido]
- Realice la **auto-prueba diaria** seleccionando el menú [CONFIGURACION] de la pantalla principal → Seleccione [Auto-prueba manual]. El monitor/desfibrilador lleva a cabo la prueba en 11 pasos donde indica los resultados.

Desfibrilación:

- Extraiga las palas y colóquelas sobre el paciente como se indica en la imagen.
- Seleccione la energía deseada pulsando “Seleccionar nivel de energía” y girando la perilla multifunción.
- Presione el botón “CARGAR” en las palas o el panel frontal.
- Presione el botón de descarga en ambas placas al tiempo o en el panel frontal.
- De ser necesario, repita la desfibrilación.

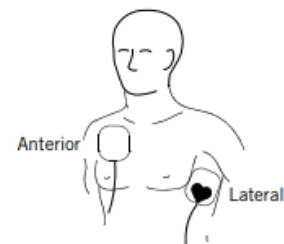


Nota: Si necesita usar el modo **Sincronizado** presione la tecla de función “Sync” en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para el **modo DEA** siga las instrucciones en pantalla

Modo de impulsos.

- Seleccione este modo girando la perilla de selección de modo.
- La frecuencia de impulsos y valor de corriente son mostrados en la parte superior de la pantalla y se muestran otros parámetros de información.

SÍMBOLOS

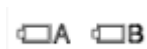	Estado de las alarmas		Alarmas pausadas
	Alarmas activas		Sonido apagado

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Desfibrilador/Monitor	● Limpie la superficie con un paño suave humedecido con la solución limpiadora, no abrasivo. ● Limpie las superficies superior, inferior y frontal ligeramente. Usar un paño suave seco para retirar el exceso de solución limpiadora o dejar secar a temperatura ambiente.
Paletas y placas	● Los procedimientos son los mismos que para el desfibrilador/monitor.
Cable ECG	● Limpie la superficie del cable con un paño suave rociado con agua o agua con jabón neutro ● Friegue el cable con un paño suave rociado con desinfectante. ● Quite el desinfectante remante con un paño suave rociado con agua. ● Coloque el cable en un lugar refrigerado y a la sombra para que se airee.
Sensor SpO2	Se puede utilizar el método del cable ECG.
Sensor de temperatura	Se puede utilizar el método del cable ECG.
Brazalete PANI (NIBP)	● Extraiga el brazalete del conector y quite la bolsa de aire de la funda ● Limpie la bolsa de aire y el tubo con un paño sumergido en agua potable o con jabón neutro y séquelos con un paño. ● Limpie la funda del brazalete en el agua limpia con jabón neutro. Coloque la cámara de aire dentro de su cubierta una vez secos.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor/desfibrilador y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.
- Inspeccione el monitor/desfibrilador y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo	Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta.	Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Quemaduras	Aumento de la resistencia por electrodos en mal estado o sin gel	Asegúrese de seguir el proceso establecido, reporte el evento ocurrido con el paciente para su tratamiento.
Inadecuado suministro de la descarga al paciente.	Mal estado o deterioro del equipo y sus componentes.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Selección inadecuada de la energía necesaria.	Asegúrese de seguir el proceso establecido para la selección de energía, rectifique los valores de energía y repita la descarga si es necesario.
El equipo no está listo para su uso al momento requerido	Mal manejo del equipo y proceso, desconexión del fluido eléctrico y fallas en la batería o deterioro del equipo.	Asegúrese de seguir los procesos establecidos para el uso y mantenimiento del equipo. Ubique el desfibrilador de remplazo más cercano para aplicarlo en el paciente.